



FACE FITNESS

## KULLANIM KILAVUZU

■ Bu ürün, düşük frekanslı elektrik stimülasyonu yoluyla yüz kaslarını çalıştırmak üzere tasarlanmıştır.

Bu bir tıbbi cihaz değildir.

**Türkçe  
Versiyon**



FACE FITNESS

## İÇİNDEKİLER

---

- 1 ÜRÜN İÇERİĞİ
- 2 ÜRÜN AÇIKLAMASI
- 3 FACE FITNESS NASIL KULLANILIR
- 4 ÖZELLİKLER / UYARILAR

## 1 ÜRÜN İÇERİĞİ

### Ürün içeriği

※ İçerik, modele ve firma düzenlemelerine bağlı olarak gösterilenden farklı olabilir.



FACE FITNESS Cihazı




Kullanım Kılavuzu



USB Şarj kablosu  
(USB 'C' tipi)

## 2 Açıklama

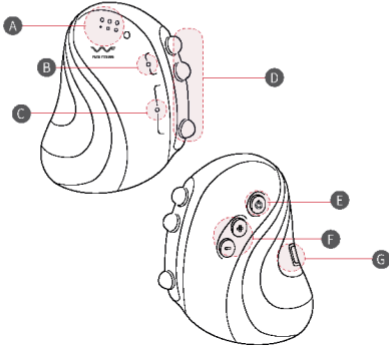

İsim	İşlev
A Yoğunluk Şarj Göstergesi	Yoğunluk (1~3) ve şarj durumu göstergesi LED
B LED A Ayar Göstergesi LED	A (dar aralıklı elektrot) ayarı seçildiğinde mavi LED yanar
C B Ayar Göstergesi LED	B (geniş aralıklı elektrot) ayarı seçildiğinde mavi LED yanar
D Elektrot	Düşük frekansın çıkış noktasıdır. Düşük frekans, yalnızca seçilen moda göre seçilen elektrotta çıkar.
E Güç/Mod Düğmesi	Güç ON / OFF (AÇIK / KAPALI ) işlevi için 2 ~ 3 saniyeden uzun süre basılır ve A / B ayarı için kısa süre ile basılır.
F Yoğunluk Kontrol Düğmesi	Yoğunluk seviyesini 1'den seviye 3'e artırma veya azaltma düğmesidir
G Şarj istasyonu	USB 'C' tipi

### 3 Face Fitness Nasıl Kullanılır

#### 1 Yüzünüzü yıkayın



Cihazı kullanmadan önce yüzünüzü yıkayın ve kurulayın.

#### 2 Gücü AÇIN

#### 3 Kullanılacak modu seçin



Gücü açmak için:  
Power/Setting (Güç/Ayar)  
düğmesine 2~3 saniye  
boyunca basın, modu seçmek  
için Power/Setting (Güç/Ayar)  
düğmesine kısa süreli basın.



**A Ayarı**

**(Başlangıç ayar modu)  
dar aralıklı elektrot**



**B Ayarı**

**geniş aralıklı elektrot**

#### ④ Yoğunluk kontrolü



Yoğunluğu ayarlamak için  $\oplus$  veya  $\ominus$  düğmelerini kullanın.

#### ⑤ Kozmetiklerin uygulanması



Yüz ve boyun bölgesine yeterli miktarda 'WF Face Fitness Via X Collagen soothing gel' uygulayın. Gerekli ise cihazı kullanmadan önce elektrotlara da jel uygulayabilirsiniz.

#### ⑥ Kullanım



Ayar modundaki tüm elektrotların cilde temas ettiğinden emin olduktan sonra cihazı kullanın.

1 dakikalık kullanımdan sonra 'kısa' bir bip sesi duyulur ve 2 dakika ve 7 saniye sonra 'uzun' bir bip sesi duyulur. Cihazınızda "uzun" bir bip sesi duyarsanız, uyguladığınız bölgeyi değiştirin. Yüzün ve boynun bir tarafındaki 9 nokta yaklaşık 19 dakika ve boyun yaklaşık 2 dakika sürede tamamlanır ve güç otomatik olarak kapanır. Yüz ve boynun iki tarafı, yaklaşık 38 dakikada tamamlanır. (Hassas bölgelere dikkatli bir şekilde bakım yapmak mümkündür.) Elektrot cilde çok yakınsa, tahriş edicidir, bu yüzden hafifçe bastırın.

(Elektrotlar ve cilt yüzeyinin her ayarda düşmemesi için cilde yakın kullanın.)

Problemlili cilde sahip kullanıcılar, bakımdan sonra yüzlerini ılık suyla yıkamalıdır.

## [ WF FACE FITNESS 9 NOKTA ]

Elektrotlar yüz bölgesinin tamamına bakım yapmak için, yüzdeki dokuz farklı noktaya temas eder. A Ayarı dar bir alanı çalıştırır, B Ayarı geniş bir alanı çalıştırır.





## A AYARI (dar aralıklı elektrot)



①  
Resimde gösterildiği gibi, cihazı kaş kuyruğunun tepesine çapraz olarak cilt üzerine yerleştirin.




②  
Resimde gösterildiği gibi, cihazı ağız açısının yanına çapraz olarak yerleştirin.




③  
Cihazı elmacık kemiklerinin alt kısmına dikey olarak yerleştirin.

## B AYARI (geniř aralıklı elektrot)

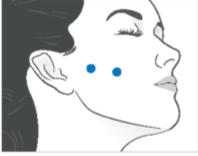


④ Cihazı, elmacık kemiğinin altından kulağına çapraz olarak cilt üzerine yerleştirin.

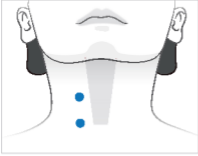

⑤ Uvuladan kaçınarak cihazı, cildinize dikey olarak boyun tarafına yerleştirin.



⑥ Cihazı, ağzınızın ucundan çapraz olarak aşağıya doğru çenenizin ucuna yerleştirin.

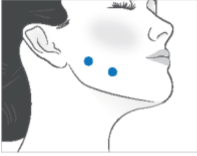

⑦

Cihazı, kulağınızın yanında  
çenenizin ucuna yatay olarak  
yerleştirin.



⑧

Cihazı, yüzün yan tarafına, kaş  
ve elmacık kemiği arasına dikey  
olarak yerleştirin.



⑨

Cihazı yatay şekilde alnın  
ortasına yerleştirin.

**9 noktalı bakımı tamamlandıktan sonra, cihazı yüzün  
diğer tarafına ve boyun bölgesine de uygulayın.**

## Şarj Etme

※ İşlem sırasında LED şarj gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp sönüyorsa şarj işlemi gereklidir.

1. 'C' tipi USB şarj kablosunu şarj istasyonuna bağlayın.
2. Şarj sırasında, kırmızı LED art arda yanar ve söner.
3. Tamamen şarj olduğunda mavi LED yanar.

※ Ürün ile verilen şarj cihazını kullandığınızdan emin olun.

- Tamamen şarj etme süresi yaklaşık 3 saat 15 dakikadır ve üç adımda 35 kereden fazla (yaklaşık 11 saat) kullanılabilir. Bu, şarj ve kullanım ortamına bağlı olarak değişebilir.
- Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, lütfen şarj cihazını güvenle çıkarın.
- Bu ürün şarj sırasında kullanılmaz.

### Düşük pil



Kırmızı LED yanıp söner

### Şarj oluyor



Kırmızı LED soldan sağa hareket eder

### Şarj tamamlandı



Mavi LED yanıp söner

## 4 ÖZELLİKLER / UYARILAR

Ürün adı	WF (FACE FITNESS)
Model adı	WF-100
Şarj Bilgisi	Giriş: 110-240V~, 50/60Hz, 0.15A Çıkış: DC 5V, 1.2A
Batarya Bilgisi	DC 3.7V, 1200mAh
Boyut ve Ağırlık	190mmX155mmX62mm, 426g (Tüm paket) Room 1701, Bundang Suji, U-Tower, 767, Siŋsu-ro,
Üretici	Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16827, Kore
Menşei	Kore Cumhuriyeti

### Uyarılar

1. Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
2. Bu ürün yüz ve boyun (belirtilen boyun bölgesi) bakımı içindir. Cihazın, belirtilen bölgeler dışındaki bölgelerde kullanılmasından veya uygunsuz şekilde kullanılmasından kaynaklanan zararlı sonuçlardan sorumlu değildir.
3. Cihazı kullanmadan önce değerli metal eşyalarınızı (Kolye, küpe, yüzük vb.) çıkarın.
4. Metal alerjiniz veya hassas cildiniz varsa cihazı kullanmayın.
5. Kullanım sırasında düşürmeyin veya sert bir darbeye maruz bırakmayın.
6. Bu ürün su geçirmez değildir. Suda kullanılamaz veya suyla yıkanmaz. Dışı, su, kağıt mendil vb. malzemeler ile temizlenebilir.
7. Nemli yerlerde veya su altında (küvet vb.) kullanılmaz. Elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.
8. Her parça için, lütfen bizim tarafımızdan sağlanan ürünleri kullanın.
9. Ürünü değiştirmeyin, parçalarına ayırmayın veya tamir etmeyin.
10. Kullanım sırasında ciltte, hafif bir karıncalanma veya uyuşukluk olabilir. Bu durum, cihazın düşük yoğunlukta kullanılmasıyla azaltılabilir veya yok edilebilir.
11. Cihazı kullanırken, optik sinir uyarılması nedeniyle geçici olarak yanıp sönen bir ışık (yanıp sönen algılama) hissedebilirsiniz. Cihazı kullanmadığınız zamanlarda bu belirtiler devam ederse, derhal kullanmayı bırakın.
12. Bir sorun veya arıza varsa, inceleme veya onarım için lütfen A / S merkeziyle irtibata geçin.

## **Tehlike**

Aşağıda gösterildiği gibi, tıbbi elektrikli cihazlarla birlikte kullanmayın. Tıbbi elektrikli ekipman arızası veya kazası vücutta ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- Kalp pili gibi vücutta kullanılan elektrikli cihazlar
- Suni kardiyopulmoner gibi yaşam desteği sağlayan elektrikli cihazlar
- Elektrokardiyografi gibi monteli tıbbi elektrikli cihazlar
- İnsülin pompası gibi in vitro takılı tıbbi cihazlar

## **Uyarı**

Aşağıdaki kişilerde veya etkilenen bölgelerde kullanılmaz.

1. Yakın zamanda geçirilen cerrahi bir operasyon nedeniyle yara izi veya ameliyat izi olanlar
2. Flebit, tromboflebit, kılcal damar hasarı, varisli damarlar, deri döküntüsü, iltihaplanma bölgesi, enfekte cilt veya şişmiş cilt bölgesi gibi damar hastalıkları olanlar
3. Akut hastalar
4. Hamile ve emziren kadınlar
5. 18 yaşın altındaki kişiler
6. Elektrik uyarımına normal dışı tepki veren kişiler
7. Metal alerjisi olanlar
8. Telenjektazili kişiler
9. Vücudunda metal implantasyonu olan veya implant hastası olan kişiler
10. Daha önce epilepsi veya nöbet geçirmiş kişiler
11. Kırık sonrası akut travma veya kanama geçiren kişiler
12. Kalp veya kardiyovasküler hastalıkları bulunan kişiler
13. Multipl skleroz hastaları
14. Flebit hastaları (aktif olduğunda)
15. Kanseri veya (serebral) enfarktüsü olan kişiler
16. Yüz bölgesinde sinir hasarı olan kişiler
17. Tiroit hastaları

## **Pil Uyarıları**

Bu ürün sistemde yerleşik bir pile sahiptir, bu nedenle satın alındıktan sonra ilk kez kullanımdan önce pili tamamen şarj edin.

1. Batarya bir sarf malzemesi olduğundan, uzun kullanım süresi boyunca kullanım süresi yavaş yavaş azalır.
2. Yerleşik pili çıkarmayın veya değiştirmeyin.
3. Pili çıkarmanız veya değiştirmeniz gerekirse lütfen A / S merkeziyle irtibata geçin.

## **Saklama**

1. Doğrudan güneş ışığından, yüksek sıcaklık veya nemden koruyun.
2. Ürünü kullandıktan sonra, yabancı maddelerin elektrotta kalmasını önlemek için ıslak bez ve ardından kuru bir havluyla silin. Su veya sıvı ile yıkamayın.
3. Ürün yüzeyini aşındırabilecek alkol gibi güçlü kimyasallar kullanmayın.
4. Ürün harici bir şok veya basınç nedeniyle hasar görebilir veya tahrip olabilir.
5. Lütfen çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
6. Ürünün yakınında uçucu maddeler bırakmayın.
7. Neme, doğrudan güneş ışığına veya sıcak hava cihazlarına yakın yerlerde saklamayın veya kullanmayın.
8. Pilin tahliyesini önlemek için pili en az üç ayda bir şarj edin. Pil uzun süre tamamen boşalmış bir durumda kalırsa, pil ömrü azalabilir.
9. Güç açıldıktan hemen sonra cihaza güç gelmezse veya kapanırsa, pil bitmiştir.

Bu durumda, cihazı şart ettikten sonra kullanın. Batarya tamamen boş ise şarj işlemi normalden uzun sürebilir.

## 6 ÜRÜN GARANTİSİ

### Ürün Garantisi

Bu ürün kalite kontrol standardımız uyarınca denetimden geçmiştir. Bir anızanın söz konusu olması durumunda ürün bu garantinin içeriğine bağlı olarak tamir edilecektir.

-Bu garanti yeniden düzenlenmeyecektir.

-Tamir talepleriyle ilgili olarak garanti kartını bu ürünü satın aldığınız satın alım yerine ya da merkez götürün.

Ürünün Adı	Garanti Süresi
Satın Alım Tarihi	2 Yıl
İmalat No.	
Alıcı	
Alıcının Adresi	
Alıcının İletişim Adresi	