




TARTI KULLANMA KILAVUZU

MARKA: AMAZFİT

MODELLER: AMAZFİT SMART SCALE (A2003)

Cihaza Genel Bakış

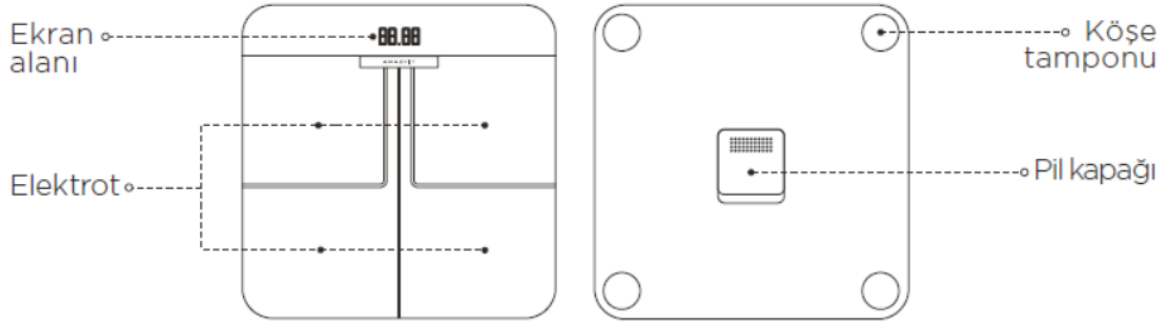

KURULUM

Uygulamayı yükleme

Zepp uygulamasını (bundan sonra "uygulama" olarak anılacaktır) indirmek için QR kodunu taratın veya uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazanızda "Zepp"i aratın.


Notlar:

1. En iyi deneyim için uygulamayı istendiği gibi en son sürüme güncelleyin.
2. Sistem Android 5.0 veya iOS 10.0 ve üzeri sürümlerle uyumludur.



Pilleri takma

Pil kapağını açın ve dört adet AAA pili, pil bölmesinin iç tarafında belirtilen yönlerde takın.

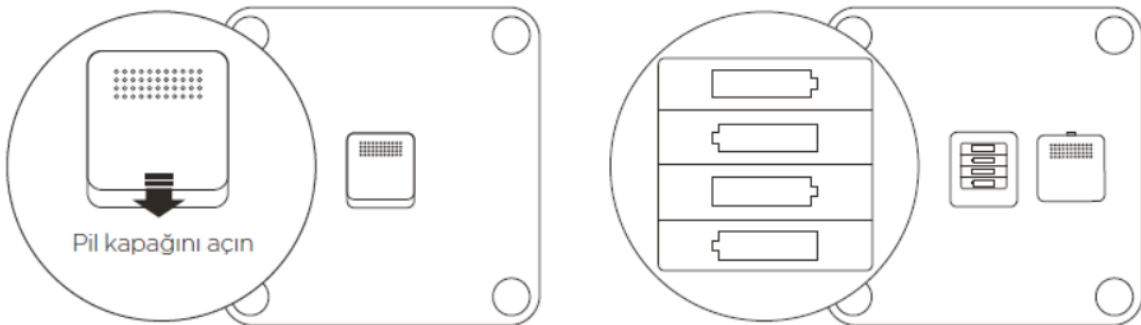

Tartıyı Ekleme

Zepp uygulamasını açın, kaydolun veya hesabınızla oturum açın, ardından tartıyı hesabınızla eşleyin ve ekrandaki yönergelere uygun olarak kişisel verilerinizi girin.

Tartıyı eşleştirdikten sonra tartım kayıtlarını ve vücut bileşimi bilgilerini uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Kişisel veriler, vücut bileşiminizi analiz etmek için kullanılır. Sonuçların doğru olmasını sağlamak için lütfen doğru kişisel verileri girin.

Wi-Fi'yi Yapılandırma

İlk eşleştirmeden sonra Wi-Fi'yi istendiği gibi yapılandır' a tıklayın, bir Wi-Fi ağı seçip parolayı girin ve yapılandırmanın tamamlanmasını bekleyin.

Notlar:

1. Tartı, 5GHz Wi-Fi bağlantılarını değil, yalnızca 2.4GHz Wi-Fi bağlantılarını destekler.
2. Wi-Fi bağlantısını daha sonra yapılandırmayı tercih ederseniz, uygulamayı sonrasında açabilir, uygulamaya bağlanmak için tartıya çıkabilir, Wi-Fi'yi yapılandır' a tıklayabilir, bir Wi-Fi bağlantısı seçebilir ve yapılandırmayı tamamlamak için parolayı girebilirsiniz.

Ölçümü Başlatma

Tartıyı sert ve düz bir zemine koyun.

Şekilde gösterildiği gibi tartıya yalın ayak çıkın. Ayaklarınızın derisinin tartıdaki dört elektrotla iyi temas ettiğinden emin olun.

Kilonuz ölçüldükten sonra tartı, vücut yağ oranı, kalp atış hızı gibi vücut bileşiminizi hesaplamaya başlar.

Ölçüm sırasında tartıda ölçülen her bir bilgi türünü ardı ardına görüntüleyebilirsiniz. Ölçüm tamamlandıktan ve veriler eşitlendikten sonra uygulamada ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.



Notlar:

1. Bu tartı tarafından sağlanan vücut bileşimi verileri yalnızca bilgi amaçlıdır ve tıbbi bir tavsiye oluşturmaz.
2. Tartıyı hareket ettirmek veya çarpmak doğruluğu etkileyebilir, bu durumda ölçümün doğru olduğundan emin olmak için ögeyi yeniden tartmanız gerekir.

İstem İşaretleri

	Wi-Fi		Vücut bileşimi ölçümünü kapat
	Bluetooth		Vücut yağ oranı
	Kas kütlesi		Vücut su yüzdesi
	Protein yüzdesi		Kemik kütlesi
	İç organlardaki yağ derecesi		Bazal metabolizma
	Deri altı yağ		İskelet kası
	VKİ		Fiziksel yaş
	Kalp atış hızı		Fazla kilo

Bir Ölçü Birimi Seçilmesi

Tartı, varsayılan olarak ağırlığı kilogram (kg) cinsinden hesaplar. Tartının ölçü birimini uygulamadaki cihaz ayarları üzerinden değiştirebilirsiniz.

Tartı, ağırlığı kilogram (kg), libre (lb) ve stone (st) cinsinden gösterebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ

Ad: Amazfit Akıllı Tartı

Ölçü Birimi: kg / lbs

Artış Aralığı: 0,1 kg / lbs

Wi-Fi Frekansı: 2412 - 2472 MHz

Wi-Fi Maks. Çıkış: 20 mW

Bluetooth Frekansı: 2402 - 2480 MHz

Bluetooth Maks. Çıkış: 3 mW

Kablosuz Bağlantı: 2,4 GHz 802,11 b/g/n Wi-Fi, 2,4 GHz Bluetooth 5.0

İşletim Sıcaklığı: 5°C - 40°C

Güç Kaynağı: 4 adet 1,5 V AAA pil

Model: A2003

Boyutlar: 320 x 320 x 25 mm

Net Ağırlık: 2,2 kg

Tartma Aralığı: 5 kg - 180 kg

Gövde Malzemesi: Kırılmaz cam, ABS mühendislik plastiği

Uyumluluk: Android 5.0 veya iOS 10.0 ve üzeri sürümler

Paket İçeriği: Amazfit Akıllı Tartı, kullanım kılavuzu

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım işlemi söz konusu değildir.

Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz. Periyodik bakım gerekmemektedir.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ ve KULLANIM HATALARI

Önlemler

Tartının kalp pili veya implant yoluyla yerleştirilmiş diğer medikal cihazları olan kişiler tarafından kullanımına izin verilmemelidir.

Kaymayı önlemek için tartıyı kaygan bir zemine koymayın ve tartıyı ayaklarınız veya tartı ıslakken kullanmayın.

Kendiniz tartılırken tartının yanlışlıkla ters dönmesini önlemek için her zaman tartının ortasına ayak basın.

Tartıyı yalnızca kuru bir ortamda kullanın ve suyun içine batırmayın.

Tartıyı temizlemek için tartının yüzeyini nemli bir bez ve hafif bir deterjanla silin. Organik çözücüler veya diğer kimyasalları kullanmayın.

Pil, yanlış bir türle değiştirilirse patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri yönergelere göre bertaraf edin.

Piller bittikten sonra potansiyel pil akmasını ve oksitlenmeyi önlemek için bu pilleri hemen çıkarın.

Hamilelerin kullanmaması önerilir. Hamilelerin kullanımı durumunda, tartılmadan önce lütfen "vücut bilesimi ölçümünü" kapatın.

Profesyonel sporcular ve düzenli olarak egzersiz yapan kişiler tartılmak için "Spor Modu"nu kullanmalıdır.

Kendinizi iyi hissetmediğinizde (ateş, ishal, sarhoşluk), aşırı su kaybı yaşadığınızda, sauna veya kaplıcaya girdikten sonra veya yoğun egzersiz sonrası lütfen tartılmayın.

Vücut bilesimi ölçümü verileri, vücutlarında metal cihazlar bulunan, vücudun su tutmasında değişikliklere yol açan ilaçlar kullanan, ayak tabanındaki üst derileri kalın olan kişiler ve özel koşullara sahip belirli diğer bireyler tarafından kullanıldığında değişiklik gösterebilir.

SORUN GİDERME

Lütfen <https://support.amazfit.com/en> adresindeki web sitesinin SSS bölümüne göz atın

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■

İthalatçı Firma

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
TEL: 0212 245 36 66

Üretici Firma

ANHUI HUAMI INFORMATION TECHNOLOGY CO. LTD.



ALIM SATIM İŞLERİNDE KULLANILAMAZ

huami

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Amazfit smart scale

Model: A2003

Supplied Accessories:

Software:

Manufacturer

Name: Anhui Huami Healthcare Co.,Ltd.

Address: A1204, Building A4, No. 800 Wangjiang Road, Hefei,

Country: P.R.China

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒

References to the relevant standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

2011/65/EU

2014/53/EU:

Article 3.1a: EN 62368-1 : 2014+A11:2017

Article 3.1a: EN 62479:2010

EN 50663:2017

Article 3.1b: EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015

Article 3.2: EN 300 328 V2.2.2

Signed for and on behalf of: Anhui Huami Healthcare Co.,Ltd

Place and date of issue: A1204, Building A4, No. 800 Wangjiang Road, Hefei, China 2020-6-16

Signature:

Name, function:

Lloyd Wong Certification Manager

huami

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün:Amazfit smart scale

Model:A2003

Yazılım:

Verilen Aksesuarlar:

Üretici

Adı:Anhui Huami Healthcare Co.,Ltd.

Adres:A1204, Building A4, No. 800 Wangjiang Road, Hefei,

Ülke:P.R.China

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒

Uygunluğun beyan edildiği ilgili standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

2011/65/EU:

2014/53/EU:

Madde 3.1a: EN62368-1 : 2014+A11:2017

Madde 3.1a: EN 62479:2010

EN 50663:2017

Madde 3.1b: EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2;

EN 55014-1:2017; EN55014-2:2015

Madde 3.2: EN 300 328 V2.2.2

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:

Yayınlanma yeri ve tarihi:

İmza:

Ad, işlev:

Anhui Huami Healthcare Co.,Ltd
A1204, Building A4, No. 800 Wangjiang Road, Hefei, China
2020-9-15

Lloyd Wong Certification
Manager