




XIAOMI MASSAGE GUN 2 EU
Kullanım Kılavuzu

MARKA: XIAOMI
MODEL: XMFG-M451

KURULUM VE KULLANIM BİLGİSİ

Masaj Tabancası

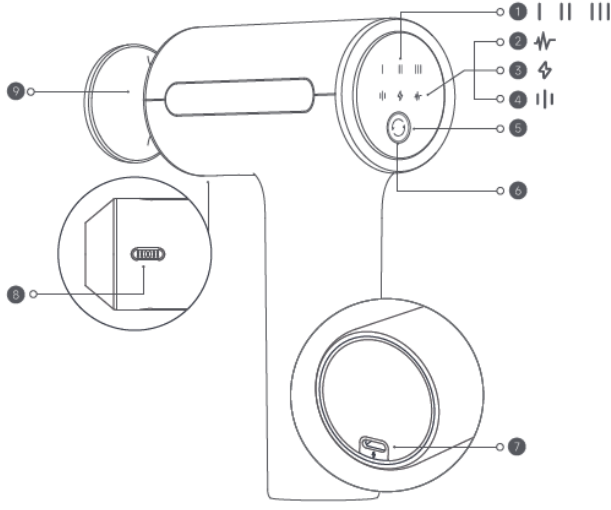


- | | |
|--|----------------------------------|
| ① Seviye/Pil Seviyesi Göstergesi | ⑥ Basınç Sensörü Göstergesi |
| ② Akıllı hızlı Masaj Modu Göstergesi | ⑦ Şarj Bağlantı Noktası |
| ③ Şarj Göstergesi | ⑧ Havalandırma |
| ④ Sabit hızlı Egzersiz Modu Göstergesi | ⑨ Masaj Başlığı Bağlantı Noktası |
| ⑤ İşlev Düğmesi | |

KULLANIM

Egzersizden sonra oluşan kas ağrısını hafifletin ve sıkı kasları gevşetiniz.

- Uzun süre oturma ve kötü duruşun neden olduğu sırt ve omuzlardaki kas ağrısını veya sertliğini rahatlatınız.
- Günlük masajla kasların rahatlamasına yardımcı olur.


Ürün Aksesuar Listesi

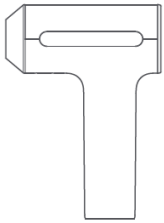


Masaj Tabancası



Saklama Çantası

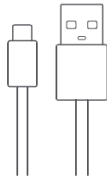


Şarj Kablosu

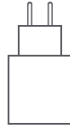

Güç Adaptörü



Yuvarlak Başlık

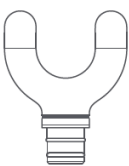

U Şeklinde Başlık



Düz Başlık



Kullanım Kılavuzu




Garanti Bildirimi

- Yuvarlak başlık: Omuz, bel, kol, kalça, uyluk ve kalfar gibi daha büyük kas gruplarının masajı için uygundur.
- U şeklinde başlık: Omurganın yanları, kalfar ve sırt bölgesi masajında uygundur.
- Düz başlık: Tüm kasları rahatlatmak için uygundur.

NOT: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Başlığı Takma ve Çıkartma

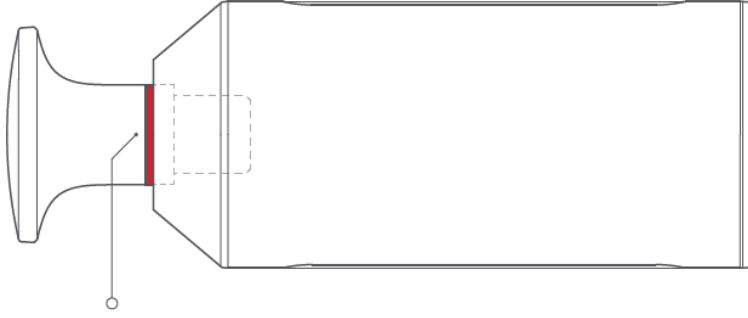

Kurulum Şeması

- İstenen masaj türü için uygun bir masaj başlığı takınız.
- Masaj başlığını takarken, masaj başlığı tabanını masaj tabancasının ağzına kuvvetlice itiniz ve başlıktaki çizginin ağzı ile aynı hizada olduğundan emin olunuz.

Not:

Şekildeki kırmızı çizgi kurulum şemasıdır, gerçek üründe parlak bir yüzeydir.


Başlığı Sökme

Masaj başlığını tutup dışa doğru çekiniz, döndürünüz ve yerinden çıkana kadar çekiniz.

DİKKAT:

- Lütfen masaj tabancası kapalıyken masaj başlığını takınız ve çıkarınız, masaj tabancasını açmadan önce başlığın tam yerine oturduğundan emin olunuz.
- Sıkışmayı önlemek için kullanım sırasında masaj başlığını ayarlamayınız, takmayınız veya çıkarmayınız.
- Bu cihazın, gözetim altında olmamaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmemiş olması durumunda fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmaması gerekir.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Bu cihaz yalnızca yetkin kişiler tarafından değiştirilmesi gereken piller içerir.
- Bu cihaz değiştirilemeyen piller içermektedir.

Şarj Etme

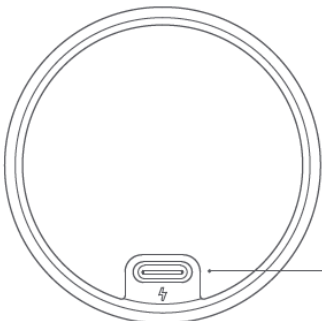

Şarj Bağlantı Noktası

Şarj kablosunu şarj bağlantı noktasına takınız ve güç adaptörünü prize takınız.

Not: Masaj tabancası şarj olurken otomatik olarak açılır ve kapatılamaz. Lütfen şarj için kutudan çıkan güç adaptörünü kullanınız.

Pil seviyesi göstergesi durum açıklaması



Şarj oluyor: Şarj olurken pil seviyesi göstergesi beyaz yanıp söner ve gerçek zamanlı pil düzeyine göre orantılı olarak sırayla soldan sağa doğru yanar.

Tam dolu şarj: Aynı anda üç göstergesi 20 saniye yanıp söner ve sonra tamamen kaybolur. Lütfen masaj tabancasını doğru zamanda prizden çıkarınız.

- Ürün tam şarj olduktan 20 dakika sonra otomatik olarak kapalı moda girer. 230 V, 50Hz ile tam olarak şarj edildiğinde bu ürünün güç tüketimi 0,16 W'tır.
- Kullanım sırasında: Mevcut seviyeye uygun gösterge beyaz yanmaya devam eder.
- Pil seviyesi düşük: Mevcut seviyeye uygun gösterge kırmızı yanıp söner. Lütfen masaj tabancasını zamanında şarj ediniz.

Yönergeler

Açma: Güç düğmesine 2 saniye basılı tutunuz. Seviye ve mod göstergeleri masaj tabancasının açık olduğunu gösterecek şekilde yanar.

Kapatma: Güç düğmesini 2 saniye basılı tutunuz. Masaj tabancası durur ve seviye göstergesi masaj tabancasının kapalı olduğunu gösterecek şekilde kapanır. Varsayılan olarak 10 dakikalık sürekli çalışma sonunda masaj tabancası otomatik olarak kapanır.

Seviye ayarlama: Açıldığında 1, 2 ve 3. seviyeler arasında geçiş yapmak için güç düğmesine basınız. Seviye göstergeleri soldan sağa sırayla 1, 2 ve 3. düzeyleri gösterir.

Mod değiştirme: Masaj tabancası açıkken sabit hızlı mod ve akıllı hızlı mod arasında geçiş yapmak için işlev düğmesine basınız, ilgili mod göstergesi beyaz yanacaktır.

Durduktan sonra tekrar başlatma: Aşırı basınç uygulanırsa koruma devreye girer ve masaj tabancası çalışmaz. Bu gibi durumlarda masaj tabancasını yeniden başlatmak için 15 saniye içinde güç düğmesine basınız, süre 15 saniyeyi aşarsa masaj tabancasını açmak için güç düğmesini 2 saniye basılı tutunuz.

Düzye hafızası: Motor durursa veya masaj tabancası kapanırsa sistem otomatik olarak mevcut çalışma modunu ve düzeyini hatırlar. Masaj tabancasının sonraki açılışında varsayılan olarak kapanmadan önceki moda ve seviyeye döner. Sistem hem sabit hızlı hem akıllı hızlı mod seviyelerini sırayla hatırlayacaktır. Modlar arasında geçiş yapılırken seviyeler uygun şekilde değişebilir.

Modlar Hakkında



• Sabit hızlı egzersiz modu: Egzersiz sonrası ağrı ve yorgunluğu gidermek için uygun, bağ dokuları verimli bir şekilde gevşetmek ve kas canlılığını hızla geri kazanmak için sabit bir hızda masaj yapınız.

• Akıllı hızlı masaj modu: Masaj ritmini değiştirerek kaslardaki baskıyı gidermek için değişen hızlarda masaj yapınız. Günlük rahatlama ve yorgunluğu gidermek için kullanılır.

Basınç yoğunluğu göstergesi halkası durum açıklaması



Gösterge halkası zili çaldığında basınç yoğunluğu düşük demektir ve masaj tabancası hafif bir masaj durumundadır. Yoğunluğu tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

- Gösterge halkası sürekli beyaz yandığında masaj yoğunluğu orta ve masaj tabancası normal durumda demektir. Yoğunluğu tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.
- Gösterge halkası sürekli turuncu yandığında masaj yoğunluğu yüksek demektir. Sakatlanmaları önlemek için basınç yoğunluğunun azaltılması önerilir.

Masaj Tabancası Kullanımı

Masaj başlığını rahatlatmaya ihtiyaç duyulan kas bölgesine doğru yavaşça itiniz ve ileri geri hareket ettiriniz. Fark edilir düzeyde ağrı olan bölgeler için basınç yoğunluğunu biraz artırıp 15 ila 30 saniye tutabilirsiniz.

Notlar

- Masaj tabancası kullanımına düşük seviyeden başlamanız önerilir.
- Yeterli kas yoğunluğunun olduğu bölgelerde kullanılması önerilir.
- Lütfen aynı bölgede 1 dakikadan daha uzun süre tutmayınız.
- Sakatlanmaları önlemek için aşırı güç uygulamaktan kaçınınız.
- Önerilen kullanım süresi 10 dakikadır. Yine de sertlik ve ağrı hissediyorsanız masaj süresini uygun şekilde uzatabilirsiniz. Sürekli olarak 30 dakikadan uzun kullanmayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Ad: Xiaomi Masaj Tabancası 2	Net Ağırlık: Yak. 815 g
Model: XMFG-M451	Şarj Bağlantı Noktası: Type-C
Ürün Boyutları: 145 × 64 × 200 mm	Nominal Giriş: 5V — 2A
Pil Türü: Lityum iyon pil	Pil Kapasitesi: 2450 mAh
Çalışma Sıcaklığı: 5°C ila 40°C	

Sorun Giderme

Sorunlar	Olası Nedenler	Çözümler
Şarj olurken pil seviyesi göstergesinin ışığı yanmıyor.	Güç adaptörü şarj kablосуna düzgün bağlanmamış.	Şarj kablосу ve güç adaptörünün düzgünce takıldığından emin olun.
	Masaj tabancası tam şarj olduktan sonra şarj göstergesi normal görünür.	Masaj tabancası normal kullanılabilir.
	Yukarıdaki iki olasılık çözülmesine rağmen sorun devam ederse, lütfen satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.	
Pil yavaş şarj oluyor.	Pil sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek.	Pilin sıcaklığı normale dönene kadar bekleyin ve daha sonra kullanıma devam edin.
	Güç adaptörünün voltajı veya çıkışı çok düşük.	Lütfen şarj için kutudan çıkan güç adaptörünü kullanın.
Masaj tabancası çalışmıyor.	Pil zayıftır veya bitmiştir.	Kullanmadan önce masaj tabancasının şarjını doldurun.
	Masaj tabancası aşırı basınç nedeniyle arada duruyor.	Masaj tabancasını yeniden başlatın.
	Yukarıdaki iki olasılık çözülmesine rağmen sorun devam ederse, lütfen satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.	
Basınç yoğunluğu göstergesi halkası yanmıyor.	Düşük pil	Kullanmadan önce masaj tabancasının şarjını doldurun.
	Masaj tabancası açık değil	Masaj tabancasını açmak için güç düğmesini 2 saniye basılı tutun.
Motor tuhaf sesler çıkıyor.	Motora yabancı bir nesne girmiş.	Lütfen satış sonrası hizmet bölümüyle iletişime geçin.
	Motor arızası var.	
Masaj tabancasının sıcaklığı çok yüksek.	Kullanım süresi çok uzun.	Bekleme sıcaklığı normale döndükten sonra masaj tabancasını kullanın. Tek seferde 10 dakikadan uzun süre ve sürekli olarak 30 dakikadan uzun süre masaj tabancasının kullanılması önerilmez.
	Motor arızası var.	Lütfen satış sonrası hizmet bölümüyle iletişime geçin.

Kullanım Talimatları:

Masaj tabancasını baş, yüz, dirsekler, dizler ve diğer eklem yerlerinde, omurgada ve kas kütlesinin az olduğu diğer kemikli bölgelerde kullanmayınız.

- Karotid sinüse zarar vermemesi için masaj tabancasını boynun önünde, arkasında (servikal vertebral) veya yanlarında kullanmayınız. Aksi halde bayılmaya ve ani kalp durmasına neden olabilir.
- Masaj tabancasını koltuk altlarında, üst kolun içinde, köprücük kemiğinin iç kısmında, dirsek içlerinde, dizin arkasında, karında, böbrek bölgesinde, genital bölgelerde veya sinirlerin ve kan damarlarının yoğun olduğu diğer hassas yerlerde kullanmayın.
- Masaj tabancasını böbrek taşı, üreter taşı, mesane taşı, üretra taşı, idrar yolu enfeksiyonu vb. idrar yolu hastalığı olan kişilerde karın altında kullanmayınız.
- Masaj tabancasını vücutta morluklar veya ağrı, yüzeysel yaralar, lokal ateş, kırmızı şişlik veya rahatsızlık, iltihaplanma, kas spazmları, kas yırtılmaları, akut burkulmalar, ezilmeler ve incinmeler olan bölgelerde kullanmayınız.
- Masaj tabancasını yorucu egzersizden sonra ateş, mide bulantısı, kusma veya kas ağrısı veya güçsüzlüğü gibi semptomlar ortaya çıkarsa kullanmayınız ve en kısa zamanda tıbbi yardım alınız.
- Masaj tabancasını kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar, kan hastalıkları, pıhtılaşma bozuklukları, trombositopenik purpura, boyun plağı, varisli damarlar, venöz tromboz, kanser, tümörler ve mental hastalığı bulunan kişilerde kullanmayınız.
- Masaj tabancasını kırıkları veya metal implantları olan kişilerde kullanmayınız.
- Masaj tabancasını araç kullanırken veya dikkat gerektiren hassas işlemleri gerçekleştirirken kullanmayınız.

- Masaj tabancasını aşırı masajın neden olacağı kas hasarını önlemek için çok uzun süreler boyunca aralıksız olarak kullanmayınız.
- Profesyonel olarak fitness yapmıyorsanız veya atlet değilseniz lütfen düşük seviyeden başlayıp vücudunuz alışıkça seviyeyi yavaşça yükseltiniz.

DİKKAT:

Masaj tabancası teslim edilmeden önce şarj edilmiştir. Paketi açtıktan sonra kullanmadan önce masaj tabancasını tamamen şarj etmeniz önerilir.

Sıkışmayı önlemek için çalışma sırasında parmaklarınızı, saçınızı veya vücudun diğer kısımlarını masaj başlığı ile masaj tabancasının ağızı arasındaki ekleme yaklaştırmayınız.

- Masaj başlığı ucuna veya şarj bağlantı noktasına yabancı cisimler sokmayın veya yerleştirmeyiniz.
- Masaj tabancasını suya veya diğer sıvılara daldırmayınız.
- Masaj tabancasını nemli ortamlarda kullanmayınız.
- 5°C–40°C ortam sıcaklığında şarj ediniz ve kullanınız.
- Pil performansını etkilememesi için masaj tabancasını aşındırıcı ortamların yanı sıra su ve ateş kaynaklarından uzakta tutunuz.
- Masaj tabancasını kendiniz onarmaya, sökmeye veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayınız.
- Masaj tabancasını şarj olurken kullanmayınız.
- Şarjı tam dolduğunda masaj tabancasını doğru zamanda prizden çıkarınız.
- Uzun süre kullanılmadıysa masaj tabancasını kullanmadan önce şarj ediniz.
- Masaj başlığının bir kısmı silikondan yapılmıştır. Silikon alerjisi olan kişiler için, lütfen yuvarlak başlığı ve U şeklindeki başlığı kullanmayınız, düz başlık önerilir.

Masaj tabancasını kullanmaya uygun olmayan gruplar

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

Çocukların ve 80 yaş üzerindeki kişilerin de kazaları önlemek için masaj tabancasını kullanmaları yasaklanmıştır.

Aşağıdaki koşullardan biri geçerliyse masaj tabancasını kullanmadan önce lütfen saygın bir hastanede bir cerrah veya uzman bir doktorla görüşün ve izin aldıktan sonra gözlem altında kullanınız.

- Hamile veya yeni doğum yapmış kadınlar,
- 60 yaş ve üzerindeki kişiler,
- Rabdomiyoliz hastaları,
- Eksik uzuvları olan veya belden aşağısı felçli kişiler,
- Kalp pili veya stenti bulunan kişiler,
- Son 12 ay içinde cerrahi operasyon geçirmiş kişiler,
- Anormal omurga, eklemleri veya kemikleri olan veya osteoporoz, servikal spondiloz ve lomber disk herniasyonu gibi ortopedik hastalıklardan muzdarip kişiler,
- Hastalık veya yaş nedeniyle uzuvları veya hareketliliği kısıtlanmış kişiler,
- Hastalıkla ilgili komplikasyonları olan kişiler (nöropati veya retina hasarı gibi).

Arıza veya Bozulma Durumunda

- Masaj tabancasını düşürmekten, titretmekten veya vurmaktan kaçınınız. Güçlü darbeler bileşenlere hasar verebilir veya olağan dışı çalışmaya neden olabilir. Yukarıdakiler meydana gelirse lütfen derhal satış sonrası hizmet departmanına başvurunuz.
- Masaj tabancasının uzun süre sürekli kullanımı yüzey sıcaklığında artışa ve dolayısıyla hasara neden olabilir. Tek seferde çok uzun süre kullanmayınız.
- Masaj tabancasının ısınması, duman çıkarması veya aşırı ses yapması vb. durumlarda hemen kullanmayı bırakınız ve satış sonrası hizmet ekibi ile iletişime geçiniz.
- Masaj tabancası kullanım sırasında aşırı ısınır veya deforme olursa, şişerse veya pil sızıntısı olursa hemen kullanmayı bırakınız ve satış sonrası hizmet departmanı ile iletişime geçiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsile sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsile sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
 - Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
 - Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
 - Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
 - Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
 - Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
 - Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
 - Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.
- Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM

Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır.

Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

BASİT BAKIM VE ONARIM SIRASINDA UYULMASI GEREKENLER

Temizlik

Masaj tabancasını ve masaj başlıklarını temiz, hafif nemli yumuşak bir bez veya ıslak mendille düzenli olarak silin ve saklama poşetine veya kutusuna geri koymadan önce kuru bir bez veya kâğıt havluyla kurulayın.

Uyarılar

Suyla durulamayın veya masaj başlıklarını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

- Masaj tabancasını temizlerken kapalı olduğundan ve prize takılı olmadığından emin olun.
- Masaj tabancasına hasar verebileceği, çatlamaya veya renk değişimine neden olabileceği için temizliğinde aşındırıcı sıvılar kullanmayın.

Saklamayla ilgili önlemler

- Masaj tabancasını kuru ve serin bir yerde saklayın.
- Masaj tabancasını sıcaklığı 40°C'nin üzerinde veya -5°C'nin altındaki bir ortamda saklamayın. Pil performansını etkilememek için nemden, su veya ateş kaynaklarından veya aşındırıcı ortamlardan uzak tutun.
- Saklama veya seyahat sırasında masaj tabancası çantasına koyulabilir.
- Masaj tabancasına vurmeyin, sıkmayın, düşürmeyin, atmayın veya çizmeyin.
- Masaj tabancası araba, tren, gemi ve uçakta taşınabilir. Güvenli bir yere yerleştirilmelidir.
- Uzun süre kullanılmadıysa masaj tabancasını kullanmadan önce şarj edin.
- Masaj tabancası saklama sırasında aşırı ısınır veya deforme olursa, şişerse veya pil sızıntısı olursa hemen kullanmayı bırakın ve satış sonrası hizmet departmanı ile iletişime geçin.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.

Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.

Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Cihaz ıslak ise cihazı açmayın. Cihaz açıksa derhal kapatın ve pilini çıkarın (cihaz kapanmıyorsa veya pilini çıkaramıyorsanız olduğu gibi bırakın). Daha sonra cihazı bir havlu ile kurulayın ve servise götürün.

Sıvılar, etiketin rengini değiştirir ve bu durum cihazın içinde su hasarı olduğunu gösterir. Cihazda su hasarı oluşması, üreticinin sağladığı garantiyi geçersiz kılabilir.

Cihazınızı yüksek yoğunlukta toz ya da havada uçan maddelerin bulunduğu alanlarda kullanmayın ya da saklamayın. Toz veya yabancı maddeler cihazın arızalanmasına neden olabilir ve yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

Cihazı sadece düz yüzeylere koyun

Cihaz düşerse hasar görebilir.

Cihazı çok sıcak veya çok soğuk yerlerde tutmayın.

Cihazı uzun süre boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Pil kutupları metal nesnelerle temas ederse yangın çıkabilir. Cihazı manyetik alanların yakınında bulundurmayın

Manyetik alanlara maruz kalması halinde cihaz bozulabilir veya pili boşalabilir.

Kredi kartları, telefon kartları, banka hesabı kartları ve yolcu biniş kartları dahil manyetik şeritli kartlar manyetik alanlardan hasar görebilir.

Mıknatıslı kapağı olan taşıma kılıfı ya da aksesuarları kullanmayın veya cihazınızın manyetik alanlarda uzun süreli kalmamasını sağlayın.

Cihazı ısıtıcıların, mikrodalga cihazların, sıcak pişirme aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınına koymayın. Pil akabilir.

Cihaz aşırı ısınabilir ve yangın çıkarabilir.

Cihazı düşürmeyin veya cihazın darbe almamasını sağlayın.

Cihazın ekranı hasar görebilir.

Bükülür veya şekli bozulursa cihaz hasar görebilir veya parçaları arızalanabilir.

Cihaz aşırı ısınır cihazı veya uygulamaları bir süreliğine kullanmayın.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.



BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

ÜRETİCİ FİRMA

Üretici: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

İTHALATÇI FİRMA

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

SERVİS BİLGİ SİSTEMİ

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.



Orjinal Uygunluk Beyanı

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Xiaomi Massage Gun 2

Model: XMFG-M451

SKU No.: BHR9483EU

Parti veya Seri Numarası: 80073/XXXXXXXXXXXXX

(The 14 X's represent number or letter generated to distinguish product or assemble part type)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, building 8, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Ülke: China

Manufacturers authorized EU Representative

Adı: Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Adres: Prinses Beatrixlaan 582, 2505BM, The Hague, The Netherlands

Ülke: Netherlands

contact@support.mi.com

Yazılım versiyonu: N/A

Aksesuarlar ve Bileşenler

Aksesuarlar	Modeli
Power Adaptor	A726-050200U-EU2
Battery	C1061B5

farklı pazarlarda, Bu belgede listelenen tüm aksesuarlar ve bileşenler her zaman dahil değildir

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda açıklanan beyannamenin amacı, aşağıdaki ilgili Avrupa Birliği direktiflerine ve/veya mevzuatlarına uygundur:

Radio Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☐
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☒
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☒
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☒
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐

Standardın tarihi de dahil olmak üzere kullanılan ilgili Avrupa Birliği standartlarına yapılan atıflar veya uygunluğun beyan edildiği şartnamenin tarihi de dahil olmak üzere diğer teknik şartnamelere yapılan atıflar:

Uygulanan Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15+A16, EN IEC 60335-2-32:2021 EN 62233:2008	GZES240801632501	SGS
EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	SZEM240800710701	SGS
2011/65/EU, (EU)2015/863	CANEC24017712701	SGS
Commission Regulation (EU) No 2023/826	GZEE240800337131	SGS

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:

Sertifikanın Referans Numarası:

4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası: n/a

Şu kişinin adına ve namına

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Yayınlanma yeri ve tarihi:

#019, 9th Floor, building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

2025-03-18

İmza:

Ad, işlev:

Ürünün Renkli Görüntüsü:





Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Xiaomi Massage Gun 2

Model: XMFG-M451

SKU No.: BHR9483EU

Batch or Serial Number: 80073/XXXXXXXXXXXXXX

(The 14 X's represent number or letter generated to distinguish product or assemble part type)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Address: #019, 9th Floor, building 6, 33 Xierqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name: Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Address: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Country: Netherlands

contact@support.mi.com

Software Version: N/A

Accessories and Components

Accessories	Model
Power Adaptor	A728-050200U-EU2
Battery	C1081B5

In different markets, not all accessories and components listed in this document are always included

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant European Union directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☐
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☒
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☒
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐

References to the relevant European Union standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Implemented Standard	Test Report No.	Test lab
EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15+A16, EN IEC 60335-2-32:2021 EN 62233:2008	GZES240801832501	SGS
EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	SZEM240800710701	SGS
2011/85/EU, (EU)2015/863	CANEC24017712701	SGS
Commission Regulation (EU) No 2023/826	GZEE240800337131	SGS

Notified Body (Optional):

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number: n/a

Signed for and on behalf of

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Place and date of issue:

#019, 9th Floor, building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
2025-02-18

Signature:

Name, function:

Danny Yang / Cert. Engineer



Color Image of product:

