

EVOFONE

**XIAOMI MASAJ ALETİ
KULLANMA KILAVUZU**

**MARKA: XIAOMI
MODELLER: MJJMQ02-ZJ**

KURULUM VE KULLANIM BİLGİSİ


Ürüne Genel Bakış

Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Masaj Tabancasının Kullanım Alanları*

- Egzersiz sonrası kas ağrılarını ve gerginliğini hafifletir.
- Hareketsizliğe bağlı olarak boyun, omuz ve beldeki kas ağrılarını ve gerginliklerini hafifletir.
- Günlük masajla kasların gevşemesine yardımcı olur.

Masaj Tabancası:

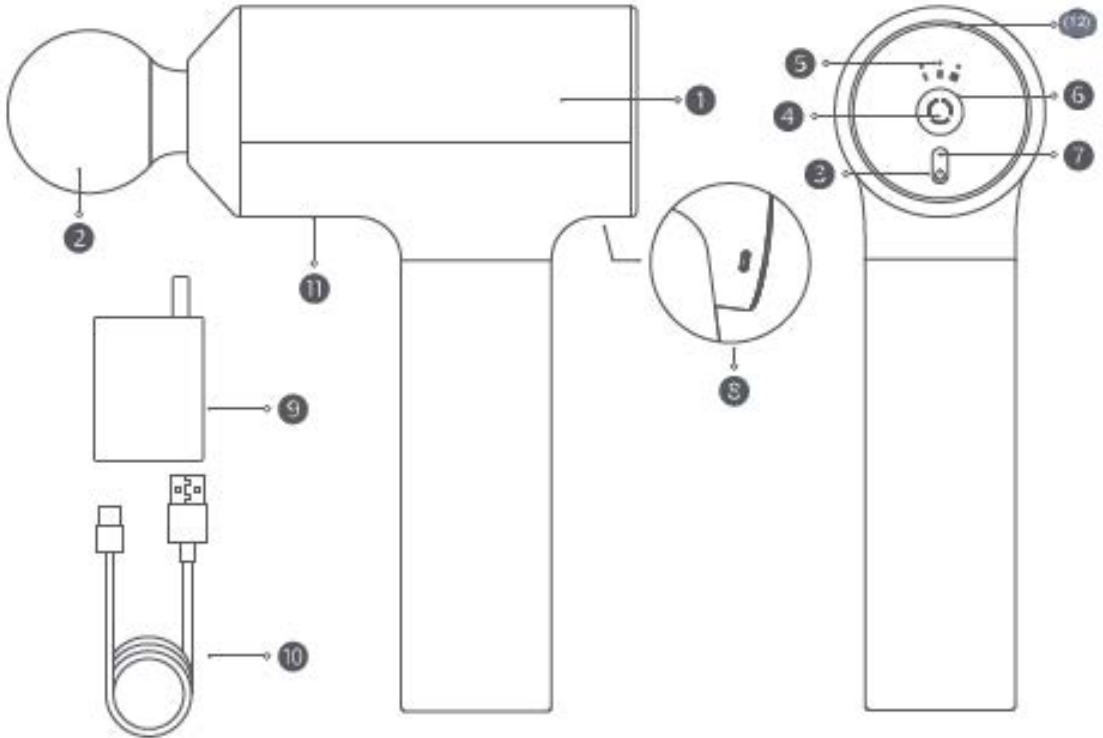

- | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 Masaj Tabancası | 2 Masaj Başlığı | 3 Güç düğmesi | 4 Hız Düğmesi |
| 5 Hız Göstergeleri | 6 Basınç sensörü | Gösterge PİL Seviyesi Göstergesi | |
| 8 Şarj bağlantı noktası | 9 Güç adaptörü | 10 Şarj kablosu | → Hava Çıkışı |
| 12 Gizli Hava Girişi | | | |

Masaj Başlıkları:



Yuvarlak kafa



Düz kafa



Kurşun Kafası

- Yuvarlak başlık: Kollar, sırt, dahil daha büyük kas gruplarına masaj yapmak için uygundur. kalça kasları, uyluklar ve baldırlar.
- Düz kafa: Tüm farklı kasları gevşetmek için uygundur. • Mermi başı: Meridyenler, avuç içi ve avuç içi dahil daha derin dokuları hedeflemek için uygundur. Ayak tabanları.


Nasıl kullanılır

Açılıyor

Masaj tabancasını açmak için güç düğmesini basılı tutun.

3 Hız

Xiaomi Masaj Tabancasının farklı masaj türleri için üç hızı vardır. Arzu ettiğiniz yoğunluk seviyesine göre uygun hızı seçebilirsiniz, en düşük hızdan denemeniz tavsiye edilir.

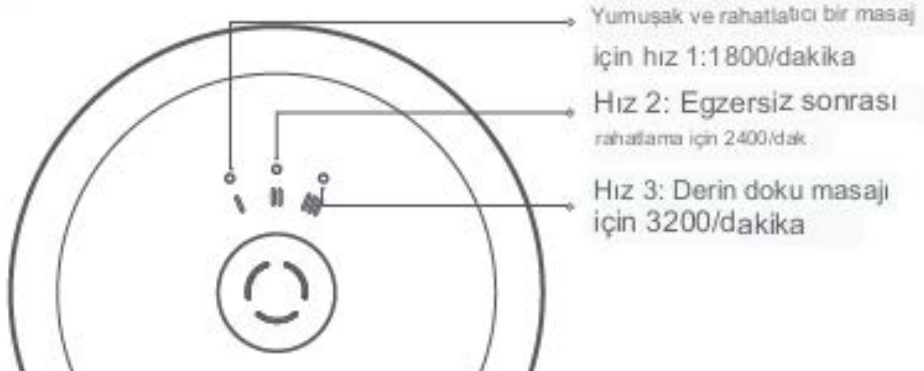

Anahtarlama Hızları

Masaj tabancası açıldıktan sonra otomatik olarak 1. hızda başlar.

1, 2 ve 3 hızları arasında geçiş yapmak için masaj tabancası açıkken hız düğmesine basın.

Masaj Tabancasını Duraklatma

Kullanım sırasında masaj tabancasını duraklatmak için güç düğmesine basın. Kullanmaya devam etmek için tekrar basın.

Kapatma

Masaj tabancası kapanana kadar güç düğmesini basılı tutun.

Duraklatıldığında, masaj tabancası 10 dakika işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanacaktır. Pili korumak için masaj tabancası, duraklama süreleri hariç 10 dakikalık kullanımdan sonra otomatik olarak kapanacaktır. Masaj tabancasını kullanmaya devam etmek için tekrar açabilirsiniz.

Masaj Tabancasını Kullanmak

Masaj tabancasını kullanmadan önce masaj yapılacak tüm vücut bölgelerinin veya giydiğiniz ince kıyafetlerin temiz ve kuru olduğundan emin olun.

Adım 1: Bir masaj başlığı

takın İstenilen masaj türüne uygun bir masaj başlığı takın.

Masaj başlığını masaj tabancasının namlu ucuna sonuna kadar sokun, kafadaki çizginin namlu ağzıyla aynı hizada olmasını sağlamak.

Adım 2: Masaj tabancasını kullanın

Masaj tabancasını açın ve uygun bir hız seçin. Başınızı hedef kas grubuna yerleştirin ve istenilen düzeyde basınç uygulayın. Masaj başlığını yavaşça kas grubu üzerinde hareket ettirin ve ağrı duyduğunuz her basınç noktasında 30 saniye boyunca kalın. 10 dakikadan fazla masaj yapmayın.

Masaj tabancası kendi başına baskı uygulayacağından üzerine çok fazla baskı uygulanmasına gerek yoktur. Masaj tabancasını kemikler, eklemler ve arterler üzerinde kullanmayın.

Adım 3: Masaj tabancasının bakımını yapın ve temizleyin

• Masaj başlığını masaj tabancasından çıkarın ve hem masaj başlığını hem de masaj tabancasını nemli bir havluyla silin. Daha sonra hem başlığı hem de tabancayı kuru bir bezle kurulayın ve saklama kutusuna geri koyun.

• Masaj tabancasını kuru ve iyi havalandırılan, aşındırıcı gazlardan uzak bir alanda saklayın. • Hasar verebileceği veya çatlatabileceği için masaj tabancasını temizlemek için aşındırıcı sıvılar kullanmayın. masaj tabancasını kullanın veya rengini değiştirin.

• Masaj tabancası arabalarda, trenlerde, gemilerde ve uçaklarda taşınabilir. Taşıma sırasında titreşim, çarpışma, yuvarlanma ve düşmelerden kaynaklanan hasarları önlemek için yukarı bakacak şekilde yerine sabitlenmelidir.

• Masaj tabancasını saklamadan veya taşımadan önce temizleyin ve saklama kutusuna koyun.

Göstergeler

Masaj tabancası açıldığında tüm göstergeler yanacaktır. 1 saniye sonra yalnızca güç göstergesi ve hız göstergesi açık kalacaktır.

Hız Göstergeleri

Masaj tabancası açıldığında hız 1 göstergesi varsayılan olarak beyaza dönecektir.

Basınç Sensörü Göstergesi

- Hiçbir basınç uygulanmadığında gösterge kapalı kalacaktır.
 - Normal basınç uygulandığında gösterge beyaza dönecektir.
- Çok fazla basınç uygulandığında gösterge turuncuya dönecektir. • Aşırı ısınma koruması tetiklenirse gösterge kırmızı renkte yanıp sönecek ve masaj tabancası 10 saniye sonra kapanacaktır. Böyle bir durumda masaj tabancasının çok sıcak olup olmadığını ve hava girişi veya hava çıkışının tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Masaj tabancasını çalıştırmadan önce 5 dakika soğumasını bekleyin. Sorun devam ederse lütfen yardım için satış sonrası servis departmanı ile iletişime geçin.

Pil Seviyesi Göstergesi


Masaj Tabancası Durumu	Gösterge Durumu	Pil seviyesi
Çalışma Durumu	Masaj tabancası açıkken beyaz kalır.	>%20
	Masaj tabancası açıkken turuncu kalır. Lütfen şarj edin hemen.	%0 < Pil seviyesi %20
Şarj Durumu	Masaj tabancası açılmıyor ve gösterge 5 kez turuncu renkte yanıp sönüyor. Lütfen hemen şarj edin.	%0
	Şarj sırasında gösterge şarjın normal olduğunu göstermek için turuncu renkte yanar.	<%100
	Tamamen şarj olduğunda gösterge beyaza döner.	100%

Doluyor

- Masaj tabancasını kapatın, C Tipi şarj kablosunu masaj tabancasının şarj portuna takın ve ardından kabloyu bir güç kaynağına bağlayın. Masaj tabancası şarj sırasında açılmaz.
- Masaj tabancasını kapatıldıktan sonra şarj ederken, pil seviyesi göstergesi normal şekilde yanmıyorsa masaj tabancasının veya güç adaptörünün aşırı ısınıp ısınmadığını kontrol edin. Böyle bir durumda C Tipi şarj kablosunu masaj tabancasından çıkarın ve tabanca ile güç adaptörünün 2 saat soğumasını bekleyin ve ardından tekrar şarj etmeyi deneyin. Sorun devam ederse lütfen yardım için satış sonrası servis departmanı ile iletişime geçin.
- C Tipi şarj kablosu bir güç kaynağına bağlanırsa ve masaj tabancası açıkken şarj portuna takılırsa, masaj tabancası otomatik olarak kapanacak ve şarj olmaya başlayacaktır.

Masaj Alanları


Not: Bir kasa masaj yapmak için, kasanın ortasından başlayın ve her iki yönde dışarıya doğru hareket edin ve yukarıdan aşağıya doğru masaj yapın. Daha büyük kas grupları için, masaj yaparken kasanın esnediği yönü izleyin.

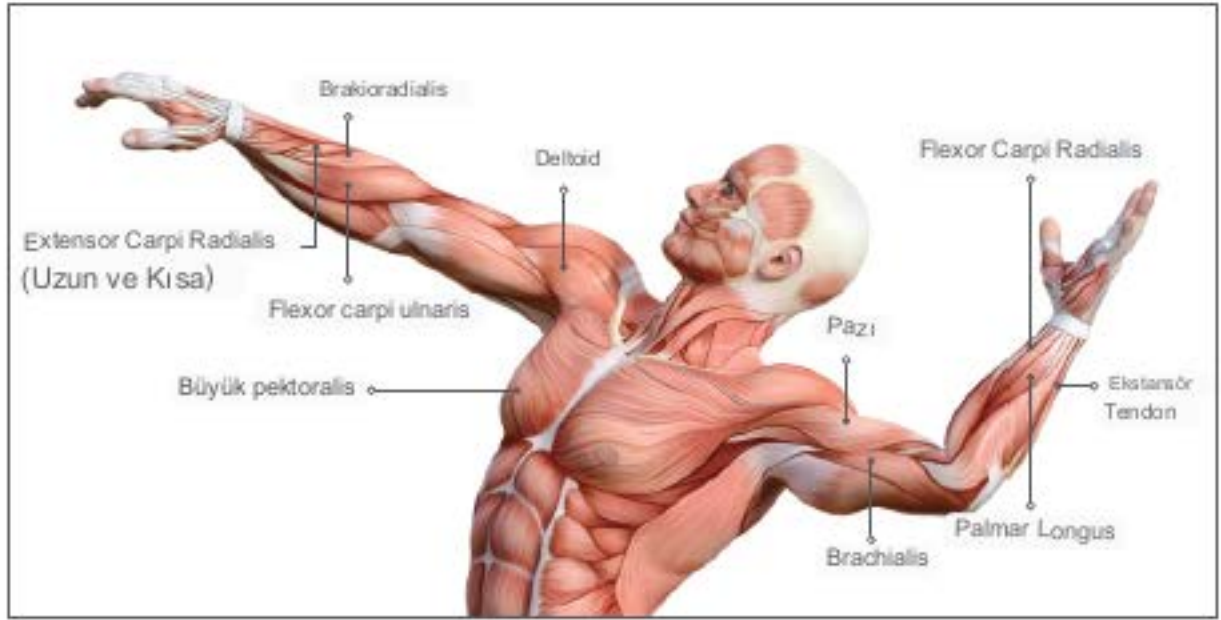

Kol

Kas	Zaman (saniye)	Tekrarlar
Brakioradialis	10-15	3
Deltoid	12-20	3
Ekstansör carpi radialis (uzun)	5-10	2
Ekstansör carpi radialis (kısa)	5-10	2
Flexor carpi ulnaris	10-15	3
Büyük pektoralis	12-20	3
Brachialis	12-20	3
Palmar longus	12-15	3
Ekstansör tendon	5-10	2
Pazu	12-20	3
Flexor carpi radialis	10-15	3


Masaj Alanları

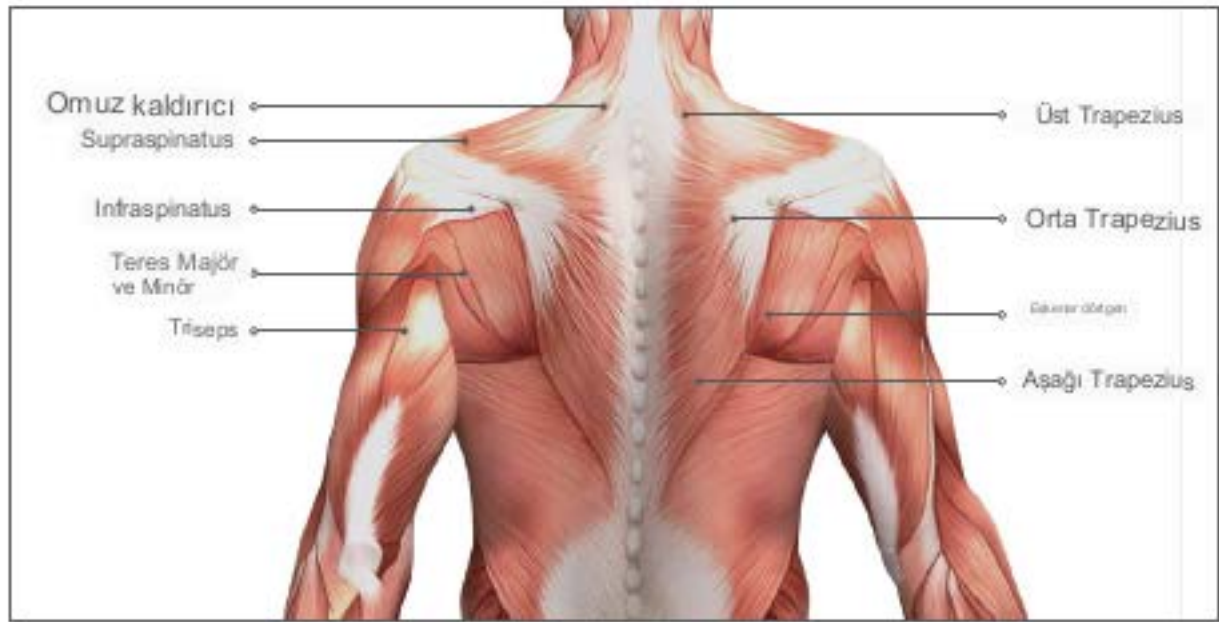

Omuzlar/sırt


Kas	Zaman (saniye)	Tekrarlar
Omuz kaldırıcı	10-15	2
Supraspinatus	10-15	3
Infraspinatus	10-15	2
Teres majör	10-15	2
Teres minör	10-15	2
Triseps	15-20	3
Üst trapezius	15-20	3
Orta trapezius	15-20	3
Ekstremiter dirliği	20-30	3
Ast trapezius	15-20	3

Masaj Alanları

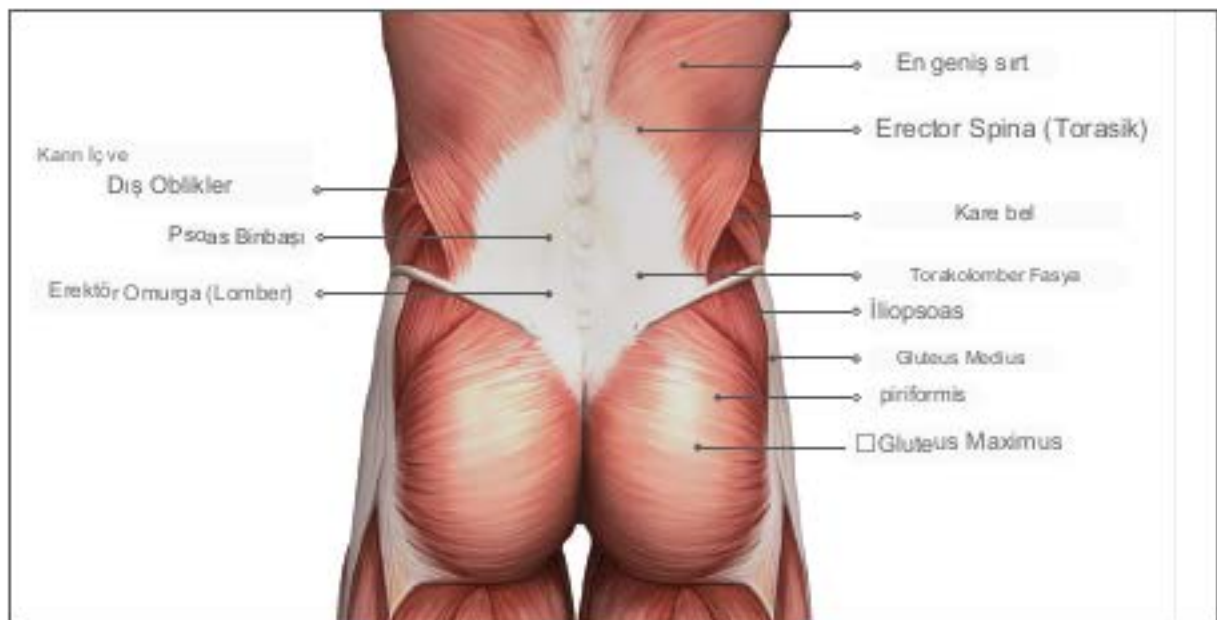

Bel


Kas	Zaman (saniye)	Tekrarlar
Kann iç ve dış oblikler	10-15	2
Psoas majör	30-60	3
erektör spinae (lomber)	30-60	4
En geniş sırt	30-60	4
erektör spinae (torasik)	15-20	2
Kare bel	20-30	2
Torakolomber fasya	40-60	3
İliopsoas	20-30	3
Gluteus maksimumus	20-60	4
piriformis	20-90	1
Gluteus medius	20-60	4

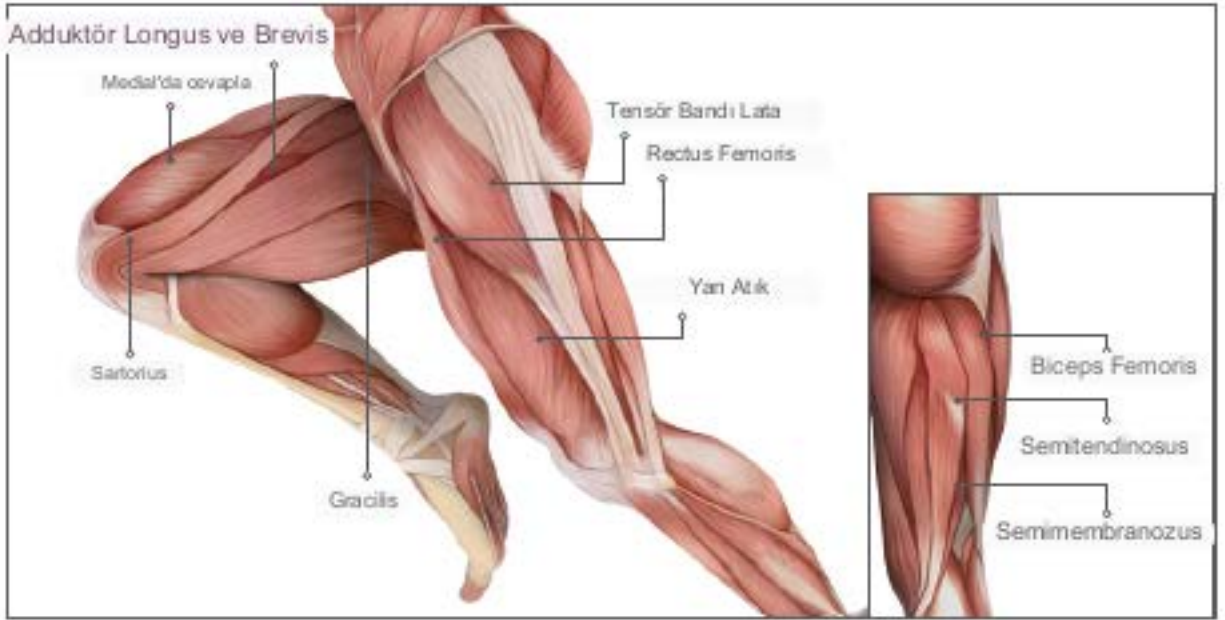

Uyluk

Kas	Zaman (saniye)	Tekrarlar
Kısa bir giriş	10-15	2
Adduktör longus	10-15	2
Medial'da ovapla	30-45	2
Sartorius	30-45	1
Gracilis	10-15	2
Tensör fasya lata	15-20	2
Düz uyluk	30-45	2
Yan Atık	30-45	2
Biceps femoris	20-30	3
Semitendinosus	20-30	3
Semimembranosus	20-30	3

Masaj Alanları

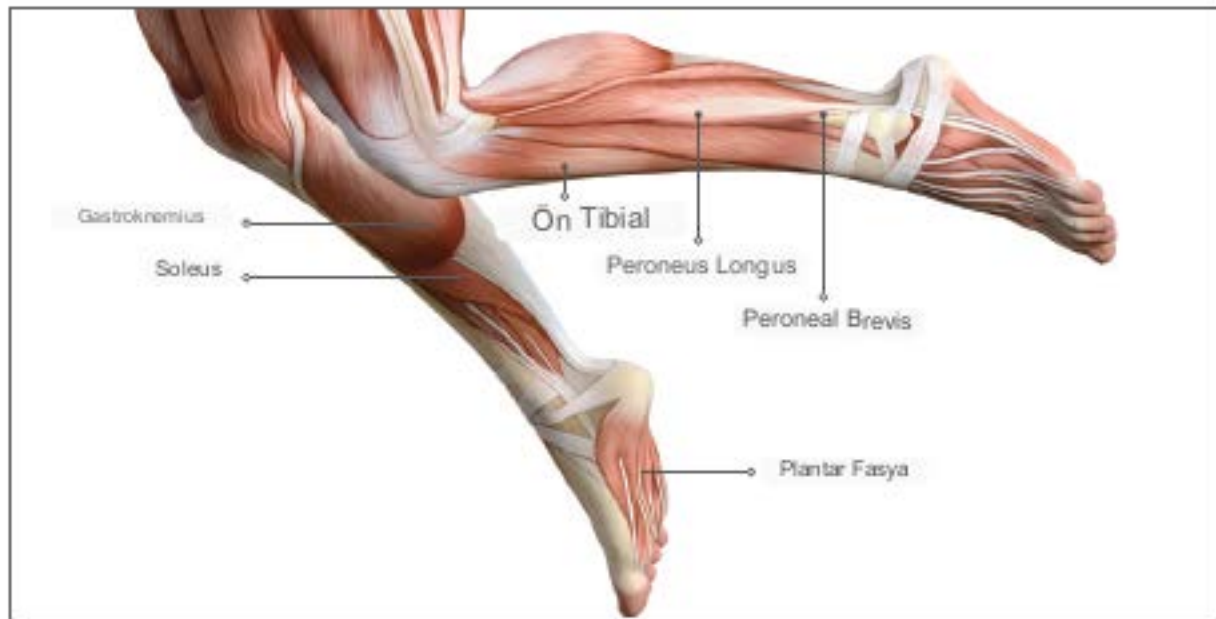

Crus ve Ayak

Kas	Zaman (saniye)	Tekrarlar
Gastrocnemius	20-30	3
Soleus	20-30	3
Ön kaval kemigi	15-20	2
Peroneus longus	15-20	2
Fibula kısa	15-20	2
plantar fasya	20-30	3

VERİMLİ ENERJİ TÜKETİMİ

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmeleri nedeniyle farklılık gösterebilir.

Pilin Çıkarılması

A Uyarı: Pil çıkarıldığında masaj tabancası artık kullanılamaz.

Aşağıdaki adımlar yalnızca masaj tabancasının kalıcı olarak elden çıkarılmasından sonra tamamlanmalıdır. Rutin bakım için masaj tabancasını kendi basınızda sökmeyin.

1. Masaj tabancasını güç kaynağından ayırın ve kabuğunu çıkarın.
2. Aküyü, motoru ve NTC'yi bağlayan kabloları kesin.
3. Pili çıkarın ve kırık yüzeyleri kapatmak için yalıtım yapıştırıcısı kullanın kablolardan.
4. Pili sabit bir geri dönüşüm tesisine atın ve tüm talimatlara uyun. bunu yaparken yerel çevre koruma yasaları ve kılavuzları.

Dikkat:

- Masaj tabancasını almadan önce pilin çıkarılması gerekir. Daha önce masaj tabancasını güç kaynağından ayırın. pilin çıkarılması.
- Masaj tabancası yalnızca bir profesyonel tarafından sökülmelidir.

Üretildiği şirket: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Shenzhen Accompany Technology Co., Ltd.

Adres: 26. Kat, Gaoxin Topluluğu Birleşik Genel Merkez Binası, No.63, Gaoxin

Güney 10. Yolu, Binhai Topluluğu, Yuehai Caddesi, Nanshan Bölgesi, Shenzhen, Çin.

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com adresini ziyaret edin.

Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen www.mi.com/global/service/userguide adresine gidin.

Kullanım Kılavuzu Sürümü: V1.0

Önemli bilgi

Uyarılar

Dikkat: Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz masaj tabancasını kullanmayı hemen bırakın.

Masaj tabancasını ıslak veya kirlili cilt üzerinde ya da terli giysiler üzerinde kullanmayın; aksi takdirde bu durum

masaj tabancasının servis ömrünü kısaltır. Parmaklarınızı,

saçınızı veya vücudunuzun herhangi bir kısmını şafttan ve makinenin alt kısmından uzak tutun.

Sıkışma meydana gelebileceği için masaj başlığını kullanın.

Masaj tabancasını kullanırken hava girişini veya hava çıkışını tıkamayın. Masaj

tabancasını suya batırmayın veya hava girişine veya hava çıkışına su girmesine izin vermeyin. Çıkış.

Masaj tabancasını ateş kaynağının yakınına koymayın veya ateşe atmayın.

Masaj tabancasıyla birlikte verilen şarj cihazı dışında herhangi bir şarj cihazı kullanmayın.

Masaj tabancasını kendi başınıza sökme veya değiştirme.

Masaj tabancasına vurmeyin, sallamayın veya düşürmeyin.

Bu masaj tabancasını kullanmaya uygun olmayan gruplar

Masaj tabancası küçükler tarafından kullanılmamalıdır. Bu bir oyuncak değildir ve yanlış kullanımı

yaralanmalara neden olabilir.

Masaj tabancası, ebeveynlerinin veya vasilerinin gözetimi olmadan resit olmayanlar tarafından kullanılmamalı,

temizlenmemeli veya bakımı yapılmamalıdır.

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya

deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmesi ve cihazın kullanım talimatlarını anlamaları koşuluyla kullanılabilir. ilgili tehlikeler.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Bu

cihaz yalnızca uzman kişiler tarafından değiştirilebilen piller içerir.

Pili şarj etmek için yalnızca bu cihazla birlikte verilen ayrılabilir besleme ünitesini kullanın. Aşağıdaki

kişiler masaj tabancasını yalnızca doktora danıştıktan sonra kullanmalıdır:

Hamile veya emziren kadınlar

Kalp pili veya implante edilebilir defibrilatör kullanan

kişiler yakın zamanda ameliyat geçirmiş ve metal implant taktırmış kişiler.

Omurga kırık veya kemikle ilgili sorunları olan kişiler

Hastalıkla ilgili herhangi bir komplikasyonu olan kişiler (nöropati veya retina hasarı gibi)

Masaj tabancası aşağıdaki alanlarda kullanılmamalıdır

Boyun üstü, koltuk altı ve kasların daha az kapladığı diğer alanlar organlara ve aorta yakın alanların yanı sıra.

Kemikler ve eklemler. Masaj tabancası ağrı veya rahatsızlığa neden olmadan yalnızca kas yumuşak dokularında kullanılmalıdır.

Herhangi bir morarmış, yaralanmış veya rahatsız edici bölge.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

Önlemler

.Bu masaj tabancasını masaj yapmak için kullanmak için kullanım kılavuzundaki tüm talimatları kesinlikle izleyin.

. Masaj tabancasını kullanmadan önce gerektiği gibi çalıştığından emin olun.
bu kullanım kılavuzunda belirtilmiştir.

. Masaj tabancasını kullandıktan sonra, ter ve yağ oluşumunu önlemek için masaj tabancasını ve masaj başlığını hemen temizleyip kurulaştırın.

.Masaj tabancasını tek seferde 1 saatten fazla kullanmayın.

• Masaj tabancasını vücudun aynı bölgesinde 60 saatten fazla kullanmayın.
saniye.

.Masaj başlığı takılı olmadan masaj tabancasını çalıştırmayın.

● Masaj tabancasını şarj olurken kullanmayın.

● Tamamen şarj olduktan sonra masaj tabancasını şarj cihazından çıkarın.

.Masaj tabancası açıkken, sıkışma meydana gelebileceği için şekilde gösterildiği gibi bölgeye dokunmayın.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Adı: Xiaomi Masaj Tabancası

Modeli: MJMQ02-ZJ

Nominal Giriş: 20 V=1A

Pil Kapasitesi: 22,2 V = 2600 mAh

Çalışma Sıcaklığı: 0 ila 35°C

Bağlantı Noktası Türü: Tip-C

Güç Adaptörü Girişi: 100-240 V 50/60 Hz 0,7 A

Güç Adaptörü Çıkışı: 20 V 1,35 A

Pil Türü: Lityum iyon pil

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU -İSTANBUL

444 21 18

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.



TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

Shenzhen Accompany Technology Co.,Ltd.

26th Floor, Gaoxin Community Unltd Headquarters Building, No.63, Gaoxin South 10th Road,

Binhal Community, Yuehal Street, Nanshan Distrlct,

Shenzhen, China

China

Orijinal Uygunluk Beyanı

AB UYGUNLUK BEYANI

Ürün: Xiaomi Masaj Aleti
Model: MJJM02-ZJ
Parça No.: BHR5608EU
Seri No. 36909/AXAB40XXXXXXXX (X yerine rakamsal değer gelebilir)

Üretici veya Yetkili Temsilcisi:
Adı: Shenzhen Accompany Technology Co.,Ltd.
Adres: 26th Floor, Gaoxin Community United Headquarters Building, No.63, Gaoxin South 10th Road, Blnhal Community, Yuehal Street, Nanshan Distrct, Shenzhen, Çin
Ülke: Çin

Üreticinin AB Temsilcisi
Adı:
Adres:
Ülke:

Bu beyan Üreticinin kendi sorumluluğunda hazırlanmıştır

Beyanın konusu:

Yukarıda açıklanan beyanın konusu, aşağıdaki ilgili Birlik uyum direktifleri ve/veya mevzuatlarına uygundur.

Telsiz Ekipman Direktifi	2014/53/EU	<input type="checkbox"/>
Düşük akım Direktifi	2014/35/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
EMC Direktifi	2014/30/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Zararlı Malzemelerin Kısıtlanması	2011/65/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Ekotasarım Yönetmeliği	2009/125/EC	<input checked="" type="checkbox"/>
Makina Direktifi	2006/42/EC	<input type="checkbox"/>
Oyuncak Güvenliği	2009/48/EC	<input type="checkbox"/>
Kişisel Koruyucu Donanım	2016/425	<input checked="" type="checkbox"/>
İnşaat Malzemeleri	305/2011	<input type="checkbox"/>
Kozmetik ürünler	1223/2009	<input type="checkbox"/>
Medikal Ürünler	Direktif 93/42/EEC	<input type="checkbox"/>

Standartlar	Test Rapor No	Test lab
EN 60335-1: 2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15 EN 60335-2-32: 2003+A1+A2 EN 62233: 2008	CN21NHAQ 001	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.
EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019	CN210XH1 001	TÜV Rheinland (China) Ltd.
EN IEC63000:2018	190134797b 002	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.

Adına İmzalanan

Yer:

Shenzhen Gocompany Technology Co., Ltd.
26th Floor, In Gommunitye- Headquarters Building, No.63,
Gaoxin 4th Industrial Community, Yuehai Street, Nanshan
District, Shenzhen
2021


CE

İmza

Yourong Lai
Compliance Engineer

İsim-Unvan

Resim:

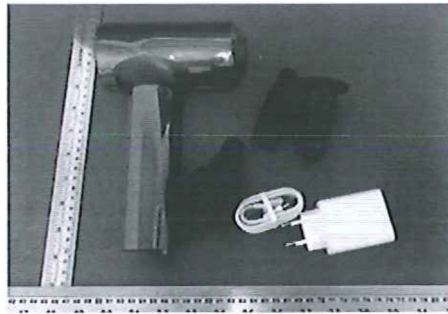

Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: **Xiaomi Massage Gun**
 Model: **MJMQ02-ZJ**
 SKU No.: **BHR5608EU**
 Batch or Serial Number: **36909/AXAB40XXXXXXXX (the eight X's represent the number starting from 00000001)**

Manufacturer or his authorized representative:

Name: **Shenzhen Accompany Technology Co.,Ltd.**
 Address: **26th Floor, Gaoxin Community United Headquarters Building, No.63, Gaoxin South 10th Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China**
 Country: **China**

Manufacturers authorized EU Representative

Name:
 Address:
 Country

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	<input type="checkbox"/>
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	<input type="checkbox"/>
Machinery (MD)	2006/42/EC	<input type="checkbox"/>
Toys safety	2009/48/EC	<input type="checkbox"/>
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/>
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	<input type="checkbox"/>
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	<input type="checkbox"/>
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 60335-1: 2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15 EN 60335-2-32: 2003+A1+A2 EN 62233: 2008	CN21NHAQ 001	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.
EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019	CN210XH1 001	TÜV Rheinland (China) Ltd.
EN IEC63000:2018	190134797b 002	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.

Notified Body (Optional) :

Name of notified body: -
Reference Number of the certificate:
4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of

Place and date of issue:

Signature:

Name, function:

Shenzhen Accompany Technology Co.,Ltd.
26th Floor, Gaoxin Community United Headquarters Building, No.63,
Gaoxin South 10th Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan
District, Shenzhen, China
2021-11-24

Yourong Lai
Compliance Engineer



Color Image of product:

