

Mİ SMART ELEKTRİKLİ DİŞ FIRÇASI T500 KILAVUZU


MARKA: Mİ

MODELLER: MES601

KURULUM

Ürüne Genel Bakış


Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

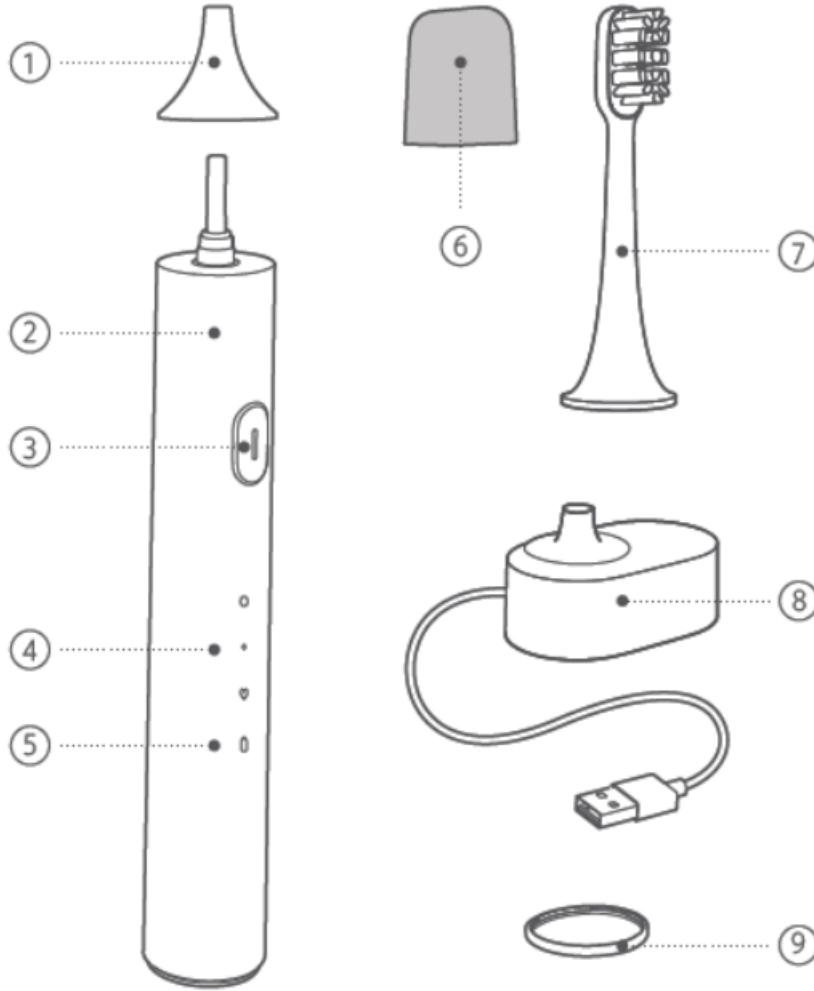


1. Mil Koruma Kapağı
2. Diş Fırçası Tutacağı
3. Açma / Kapama Butonu
4. Mod Göstergesi
 - Standart mod
 - Nazik Mod
 - ♥ Özel mod
5. Bluetooth / Pil Seviyesi Göstergesi
6. Fırça Başlığı Kapağı
7. Fırça Kafası
8. Şarj Yuvası
9. Renkli Yüzük (Ayırt etmesi kolay)

Nasıl kullanılır


1. Fırça başlığının, diş fırçası sapının ön tarafıyla aynı yönde takıldığından ve fırça başlığı ile sap arasında hafif bir boşluk olduğundan emin olun. Motordan daha fazla güç elde etmek için, yüksek frekanslı salınım sırasında fırça kafasının sap ile çarpışmasını önlemek için boşluk gereklidir.

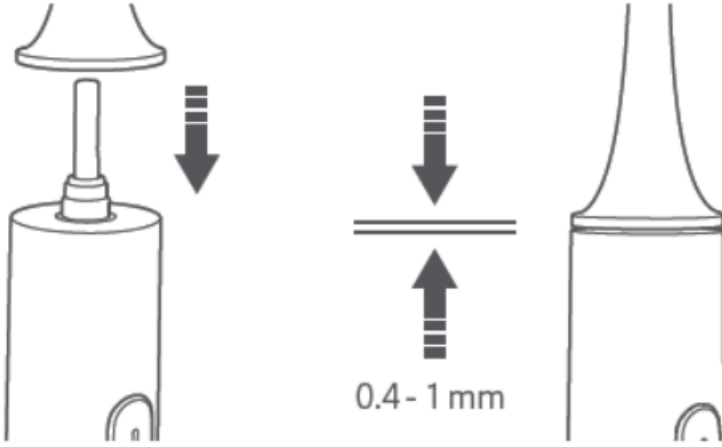

2. Fırça kafasını ıslatın ve fırça kafasına uygun miktarda diş macunu sıkın.

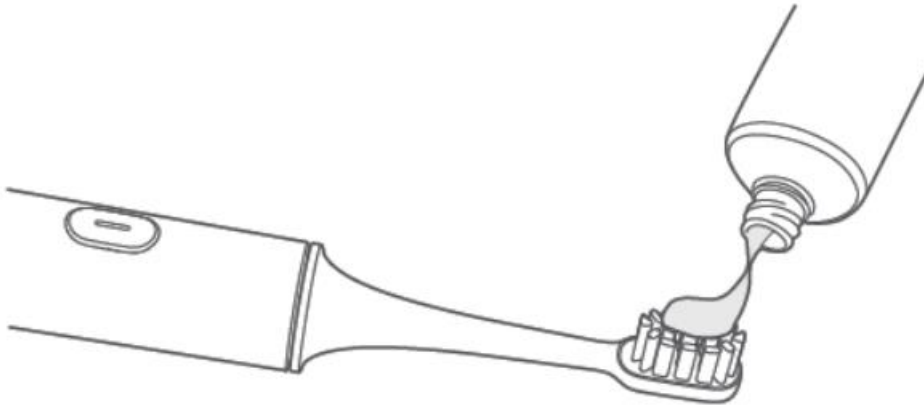

3. Açma / Kapatma / Mod değiştirme

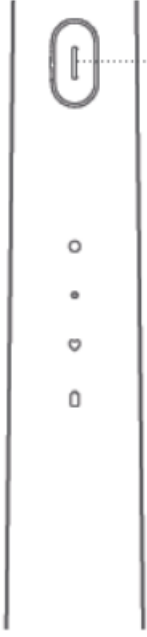

Açma: Diş fırçasını açmak için düğmeye basın.

Mod değiştirme: Diş fırçasını açtıktan sonra 10 saniye içinde düğmeye basın.

Duraklat: Duraklatmak için düğmeyi 1 saniye basılı tutun, diş fırçası 30 saniye duraklatıldıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Diş fırçasınız 10 saniyeden fazla çalıştığında, kapatmak için düğmeye basmanız yeterlidir.

Kapatma: Diş fırçasını açtıktan sonra 10 saniye içinde, c ustom modundayken kapatmak için düğmeye bir kez basın.



Not: Fabrika ayarlarını geri yüklemek için düğmeyi 12 saniye basılı tutun. Fabrika ayarlarını geri yüklemeyden önce veri kaybını önlemek için lütfen verilerinizi uygulama ile senkronize edin.

4. Sağlıklı Fırçalama

Fırça başlığını diş eti çizgisine 45 ° açıyla tutun ve yavaşça dişler ve diş eti çizgisi boyunca hareket ettirin.

Fırçalama sırasında, diş fırçası, kullanıcıdan fırçalama konumunu değiştirmesini istemek için her 30 saniyede bir kısa bir süre duraklıyor.

Kullanım sırasında aktif bir duraklama olmadığında, fırçalama modu sona erdiğinde diş fırçası otomatik olarak kapanacaktır (fırçalama modu uygulama aracılığıyla ayarlanabilir).

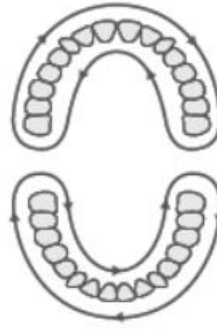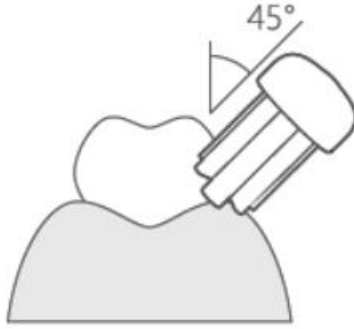

Diş fırçası, basıncı gerçek zamanlı olarak algılayan bir aşırı basınç koruma sistemi ile donatılmıştır. Diş fırçalama sırasında çok fazla basınç kullanıldığında, pil seviyesi göstergesi hızlı bir şekilde kırmızı renkte yanıp sönecek ve diş fırçası titreşimi otomatik olarak azaltacaktır.

Üç fırçalama modu mevcuttur:

Standart Mod: Günlük ağız hijyenine uygun

Nazik Mod: Hassas dişler için uygundur

Özel Mod: Varsayılan olarak 2 dakikalık bir başlangıç modu. Fırçalama ayarları ve süresi uygulama üzerinden ayarlanabilir.

5. Fırça kafasını temizleme

Fırçalamadan sonra fırça kafasını akan suyla durulayın.

Duruladıktan sonra, temiz ve hijyenik tutmak için fırça başlığını koruyucu kapakla birlikte takın.



Diş hekimleri, fırça başlığının üç ayda bir değiştirilmesini önerir.


6. Bu diş fırçasında 3 renkli halka (gri, mavi, yeşil) bulunur, tercihinize göre değiştirilebilir.



Renkli halkanın doğru hizalanmasının resmi

Diş fırçasını bir elinizle baş aşağı tutun ve diğer elinizle renkli halkayı çıkarmak için bir çivi kullanın.

Renkli halkanın üçgen şeklini (halkanın içindeki pimler aşağı bakarken) diş fırçası sapının üçgen alt kısmı ile hizalayın ve yerine bastırın.

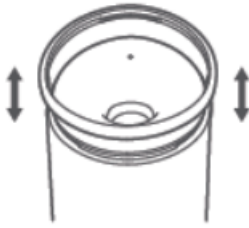


Resme bakın



Akıllı İşlevler

1. Diş fırçası, basıncı gerçek zamanlı olarak algılayan bir aşırı basınç koruma sistemi ile donatılmıştır. Diş fırçalama sırasında çok fazla basınç kullanıldığında, pil seviyesi göstergesi hızlı bir şekilde kırmızı renkte yanıp sönecek ve diş fırçası titreşimi otomatik olarak azaltacaktır.

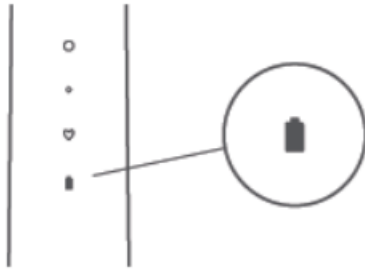

Diş fırçalama sırasında: Pil seviyesi göstergesi çok fazla baskı uygulandığında hızla kırmızı yanıp söner.

2. Fırçalama süresini, modunu ve sıçrama korumasını Mi Home uygulaması / Xiaomi Home uygulaması aracılığıyla ayarlayabilirsiniz. Fırçalamayı bitirdikten sonra verileri görüntüleyebilir ve bir rapor oluşturabilirsiniz.

3. Mi Home / Xiaomi Home Uygulaması ile Bağlanma

Bu ürün Mi Home / Xiaomi Home uygulaması * ile çalışır. Cihazınızı Mi Home / Xiaomi Home uygulamasıyla kontrol edin.

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Veya indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home / Xiaomi Home" u arayın. Mi Home / Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokununuz ve ardından cihazınızı eklemek için komut istemlerini izleyin.

Uygulama, Avrupa'da Xiaomi Home uygulaması olarak anılmaktadır (Rusya hariç). Cihazınızda görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır.



Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin.

Çevresel koruma

Diş fırçasının hizmet ömrü sona erdiğinde, yerleşik pilin kullanıldığı ülkenin veya bölgenin yerel yasa ve düzenlemelerine göre çıkarılması, atılması ve geri dönüştürülmesi gerekir.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Adı: Mi Smart Elektrikli Diş Fırçası T500 Modeli: MES601

Anma Gerilimi: 3,7 V Anma Gücü: 2 W

Nominal Giriş: 5 V 0,5 A

Şarj Süresi: 12 saat

Maksimum Çıkış Gücü: 0 dBm

Pil Kapasitesi: 700 mAh

Frekans Bantları: 2402–2480 Mhz IP Derecesi: IPX7

Çalışma Frekansı: 80-90 kHz (<25dBuA / m @ 10m)

Fırça Başlığı Boyutları: 24.6 x 24.6 x 85.0 mm

Diş Fırçası Sapı Boyutları: 28,1 x 28,3 x 187,5 mm


Şarj oluyor

Diş Fırçası Durumu	Pil Düzeyi Göstergesi Durumu	Pil Düzeyi
Kullanma	Camgöbeği	100%-60%
	Turuncu	60%-20%
	Kırmızı	20%-10%
	Hızla yanıp sönen kırmızı (Diş fırçası açılmaz)	<10%
Şarj oluyor	Camgöbeği	100%
	Yavaşça yanıp sönen camgöbeği	100%-60%
	Yavaş yavaş yanıp sönen turuncu	60%-20%
	Yavaşça yanıp sönen kırmızı	<20%

Diş fırçasının şarj yuvası T500 için tasarlanmıştır ve diğer ürünlerle uyumlu değildir.

Pil azaldığında, gösterge hızla kırmızı renkte yanıp söner ve diş fırçası açılmaz. Diş fırçasının tamamen şarj olması yaklaşık 10 ila 16 saat sürer.

Diş fırçası şarj halindeyken, onu uygulamaya bağladığınızda pil seviyesi göstergesi üç kez yanıp sönen maviye döner. Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra diş fırçasının göstergesi mavi kalır. Verileriniz senkronizasyonu tamamladıktan sonra otomatik olarak uygulama ile bağlantısı kesilecek ve diş fırçasının göstergesi mevcut pil seviyesini gösterecektir. Diş fırçasının uygulamaya bağlanamaması durumunda gösterge değişmeden kalır, yani mevcut Teknik Özellikler pil seviyesini gösterir.

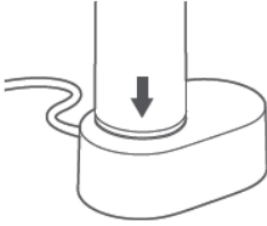

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım işlemi söz konusu değildir.

Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARI

Güvenlik talimatları

Diş fırçasını ilk kez kullanırken kaşıntıya veya küçük diş eti kanamalarına neden olabilir. Bu, diş etlerinin elektrikli diş fırçasının verimli bir şekilde temizlenmesine alışkın olmadığı durumlarda normaldir. Diş etleriniz henüz alışmamışsa özel modu kullanmanız önerilir. Normalde diş eti kanamaları bir ila iki hafta içinde durur. Diş fırçasını kullanmayı bırakın ve devam ederse bir diş hekimine danışın.

Uyarı

Ortodontik tedavi gören kullanıcılar veya diş tamiri veya implant yaptıran kullanıcılar bu diş fırçasını kullanmadan önce diş hekimine veya ortodontistine danışmalıdır.

Bu diş fırçası, elektromanyetik cihazlar için güvenlik standartlarına uygundur. Cihazın kalp pilleri veya diğer implante cihazlarla birlikte kullanılmasıyla ilgili sorularınız için lütfen kullanmadan önce bir doktora veya implante cihazın üreticisine danışın.

Bu diş fırçası yalnızca dişleri, diş etlerini ve dili temizlemek için tasarlanmıştır. Başka hiçbir amaçla kullanmayın. Herhangi bir rahatsızlık veya ağrı hissederseniz, diş fırçasını kullanmayı bırakın ve diş hekiminize danışın.

Şarj yuvasını suya veya başka bir sıvıya batırmayın.

Fişin üzerinde sıvı varken şarj yuvasını prize takmayın.

Bu diş fırçası dahili bir şarj edilebilir pil içerir ve asla ateşe maruz bırakılmamalı, şarj edilmemeli, kullanılmamalı veya yüksek sıcaklıkta bir ortamda saklanmamalıdır.

Diş fırçasına vurmayın veya düşürmeyin. Darbe veya düşme nedeniyle hasar görürse, kullanmayı bırakın.

Diş fırçasını kendi başınıza değiştirmeye, sökmeye veya onarmaya çalışmayın.

Yalnızca şarj için IPX4 veya üstü ile uyumlu bir şarj cihazı kullanın.

Önlemler

Kullanmadan önce diş fırçasında belirgin hasar olup olmadığını kontrol edin. Ağır hasar görmüşse kullanmayın.

Fişi prize takmadan önce, yerel güç kaynağının voltajının diş fırçasının güç adaptörünün nominal voltaj girişiyle eşleştiğinden emin olun.

Şarj yuvasını dışarıda doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın.

Diş fırçasını banyo yaparken veya duş alırken kullanmayın

Fırça kafasını başkalarıyla paylaşmayın.

Güç kablolarını prize takılıken şarj yuvasının etrafına sarmayın.

Bir prize takılıken şarj yuvasının üstüne herhangi bir metal nesne koymayın.

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişebilir

SORUN GİDERME

Sorun giderme		
Sorun	Olası Nedenler	Çözümler
Düğmeye basarak açılmıyor	Şarj oluyor	Diş fırçasını şarj yuvasından çıkarın
	Bluetooth bağlandı	Telefonunuzun Bluetooth'unu devre dışı bırakın
	Pil seviyesi çok düşük	Diş fırçasını şarj etmek için şarj yuvasına yerleştirin
Fırça kafası mile takılmıyor	Fırça kafasının içine sıkışmış bir şey var	Nesneyi fırça başlığından çıkarmak için bir araç kullanın
	Şafta sıkışmış bir şey var	Şaftı temizleyin
	Gerçek bir fırça kafası değil	Orijinal bir fırça başlığı ile değiştirin
Aşırı güç tüketimi ve sık sık şarj etme	Telefonla Bluetooth üzerinden uzun süre eşleştirildi	Diş fırçasını kullanmadığınızda Bluetooth'u devre dışı bırakın
	Çok sık kullanılıyor	Diş fırçasını şarj etmek için şarj yuvasına yerleştirin
Fırça başlığı titreşimi zayıf	Fırça kafası düzgün takılmamış	Fırça başlığı ile tutamak arasına sıkışmış bir şey var
	Fırça başlığı ile tutamak arasına sıkışmış bir şey var	Fırça kafasını çıkarın ve nesneyi çıkarın
Uygulamaya bağlanamıyor	Telefonunuzun Bluetooth'u etkinleştirilmemiş	Telefonunuzun Bluetooth'unu etkinleştirin ve Mi Home uygulaması / Xiaomi Home uygulamasıyla kontrol edin
	Diş fırçası telefondan çok uzakta	Telefonu diş fırçasının yanına yerleştirin
	Diş fırçası titriyor	Diş fırçasını kapatın ve tekrar bağlanmayı deneyin

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

İthalatçı Firma

ELECTROCRAFT TELEFON VE AKSESUARLARI TEDARİK İTHALAT İHRACAT LİMİTET ŞİRKETİ

ADRES: HOBYAR MH. MİMAR KEMALETTİN CD. NO:6 KAT:4 GENÇTEN TİC. MERKEZİ MO: 60
FATİH/İSTANBUL

TEL: 0212 890 27 22

Üretici Firma

SOOCAS (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO. LTD.



BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR



Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Mi Smart Electric Toothbrush T500
Model: MES601
SKU No.: NUN4087GL
Parti veya Seri Numarası:24876/XXXXXXX (the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Soocas (Shenzhen) Technology Co.,Ltd.
Adres: Floor 11, Building 2, Chongwen Garden,Nanshan iPark,No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Ülke:China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:
Adres:
Ülke

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radio Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☐
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☐
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☐



Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihli dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60335-2-52:2003+A1:2008+A11:2010, EN 62233:2008	EN190731009S	EMTEK(NINGBO)CO.,LTD.
ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016	ES190731001W01	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 62479:2010	ES190731001W02	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017, ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017	ES190731001W03	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 55011:2016	ES190731002E	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
2011/65/EU	CANEC1906163601	SGS

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:
Sertifikanın Referans Numarası:
4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:
Soocas (Shenzhen) Technology Co.,Ltd.
Yayınlanma yeri ve tarihi:
Floor 11, Building 2, Chongwen Garden,Nanshan
iPark,No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District,
Shenzhen



2018.11.5



Ad, işlev: Ruiffle.Xiong ; Proiect Director



Ürünün Renkli Görüntüsü:



Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Mi Smart Electric Toothbrush T500

Model: MES601

SKU No.: NUN4087GL

Batch or Serial Number: 24876/XXXXXXXX (the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Soocas (Shenzhen) Technology Co.,Ltd.

Address: Floor 11, Building 2, Chongwen Garden, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen

Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:

Address:

Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☐
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐
		☐



References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60335-2-52:2003+A1:2008+A11:2010, EN 62233:2008	EN190731009S	EMTEK(NINGBO)CO.,LTD.
ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016	ES190731001W01	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 62479:2010	ES190731001W02	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017, ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017	ES190731001W03	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 55011:2016	ES190731002E	EMTEK(SHENZHEN)CO.,LTD
2011/65/EU	CANEC1906163601	SGS

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of:

Soocas (Shenzhen) Technology Co.,Ltd.

Place and date of issue:

Floor 11, Building 2, Chongwen Garden,Nanshan
iPark,No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District,
Shenzhen

Name, function: Ruiffle.Xiong ; Project Director



Signature: 2019.11.5



Color Image of product: