


MOR  ED
Beauty Factory

إنتاج يركز على الابتكار

 MY WORLD



MORMED ليس مجرد شركة مصنعة للمعدات
هو شريك الحل الذي يساعدك على تنمية وتطوير عملك.

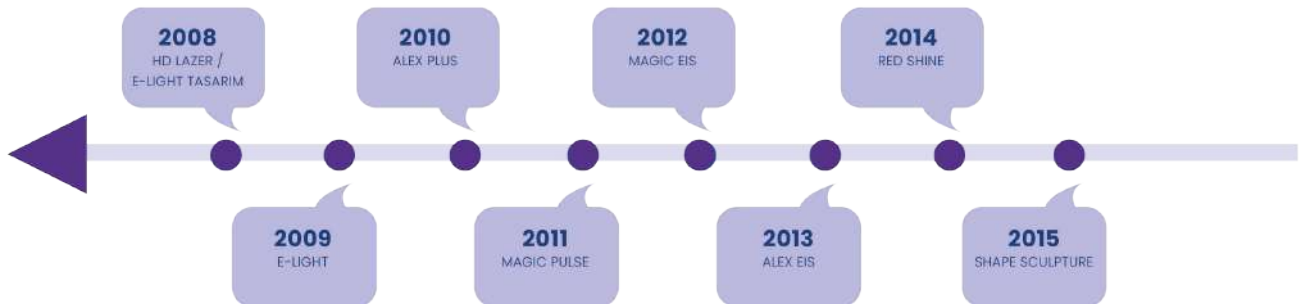

معلومات عنا

قصتنا في عام 2004 . بدأ الأمر عندما دخل دكتور حسين دغار في مجال الطب التجميلي أعطت أول ثمارها مع عيادة التجميل في عام 5002 وأعطت ثمرتها الثانية مع أكاديمية التجميل أوزليم دغار في عام 2007 في عام 2008 نحن فخورون بالريادة الأولى في تركيا في إنتاج المعدات من خلال إنتاج أجهزة IPL المحلية

أثناء كونها الممثل التركي لمنتجات التجميل والميزوثيرابي الإسبانية في عام 2011 ، أضفت أجهزة التخسيس والعناية بالبشرة إلى مجموعة أجهزتها. في هذا السياق ، تهدف إلى تلبية الحاجة الكاملة إلى المعدات والخبرة التي ستحتاجها الصالونات

مجموعة مورمد مع استمرار نشاطها في مجالات التجميل وإدارة العيادات والتعليم والإنتاج والاستيراد ، لم تتردد في نقل خبراتها إلى أصحاب المصلحة



الفهم الأساسي لمورمد هو الاستمرار في النمو من خلال التركيز على كسب عملائها

تتبنى عملائها كشركاء لها. لديها نهج الخدمة الذي يقف إلى جانبهم في كل خطوة ويرى أن مشاكلهم هي مشاكلهم وهي تساعد ازدياد ارباح عملائها لقد كان المصدر الوحيد للإعلان وإكسبر النمو منذ إنشائه

نهدف إلى المساهمة اقتصاديًا في وطننا حيث نعيش وننتج ، وأن نكون من بين المنظمات ذات السمعة الطيبة في بلدنا. لقد واصلنا عملنا بجدية كبيرة لتنمية بلدنا من خلال نقل المعرفة والخبرة من السنوات التي خلفناها وراعنا إلى التكنولوجيا التي ننتجها ، وما زلنا نفعل ذلك بكل دوافعنا

الآن نحن فخورون وسعداء بأن نكون رواد صناعة التجميل الطبي في بلدنا. يدفع مورمد ديونه الأخلاقية لهذا البلد من خلال بيع منتجاته وعلاماته التجارية للعالم كله من خلال ممثليه

احتلت شركة مورميت العلامة التجارية في العالم بأجهزتها Diode Cardinale و Tatouage و Hobraz و Shape Sculpture و HydrOxyPeel و Red Shine و Magic Eis و Alex و Big Shaper و Magic Sound و Striaoff قد احتلت مكانها في عالم العولمة وتقدم بما يتماشى مع الأهداف التي حددتها دون إبطاء تحت. وتواصل إضافة القيمة والتوظيف إلى القطاع باستخدام التقنيات المختلفة التي تنتجها من خلال تسريع دراسات البحث والتطوير يوماً بعد يوم. سنستمر في إنتاج أنظمة مختلفة ومبتكرة وذات قيمة مضافة نتيجة لجهودنا التي استمرت بنفان كبير لسنوات عديدة

نحن نقدم خدمة لجميع تركيا من خلال فروعنا في قونية وأنقرة واسطنبول

سنكون سعداء لرؤيتك كعضو في هذه العائلة الرائعة

Dr. Hüseyin Dağar
Özlem Dağar



MORMED

Beauty Factory



المحتويات

شريكنا/ معلومات عنا	02-03
المحتويات	04-05
اجهزة الليزر	
Ilex	06
Diode Cardinale	07
Red Shine Hybrid	08
Red Shine RF+	09
Red Shine	10
Red Shine Fein	11
Alex Eis	12
Alex Premium	13
Alex Plus Magic	14
Pro Magic Eis	15
Magic Pulse	16
İğneli Epilasyon	17
	18
استتيك الجلد	
Tatouage	19
Hydroxypeel	20
Dermarc	21
Strivak - Striaoff	22
Viso Care	23
HD Focus / Eco Hifu / Fraxi HD	24
Aqua Peeling / 4+1 / 8+1 / 12+1 / Cilt Bakımları	25
التحيف الموضعي	
Big Shaper	26
Magic Sound	27
Big Fit	28
Shape Sculpture	29
Hobraz	30
Hobraz Plus	31
Moreno	32
Royal Lift	33
Big Mag	34
Estcultor	35
Bindex	36
Pasif Jimnastik/ G5 /Lenf Drenaj	37



جيل جديد من جهاز لي ALEXANDRITE



Ilex وهو جهاز لإزالة الشعر بالليزر بطول موجي 755 + 1064 نانومتر وتقنيات الليزر Alexandrite

ودهون التي طورتها شركتنا بفضل أدائها العالي ، واستخدامها الآمن والفعال ، فهي خيار مثالي في إزالة الشعر للحصول على أفضل النتائج المتوقعة من حيث التكلفة والتطبيق مع الطول الموجي 755 و 1064 نانومتر ، يركز جهاز xell على جذر الشعر ويوفر إزالة فعالة ومريحة مع طريقة إزالة دائمة للشعر. نظرًا لأنه ينتج الهواء البارد نفسه ، فلا توجد تكلفة إضافية لغاز التبريد

مبدأ العمل

الطول الموجي 755 + 1064 نانومتر تمتصه الصبغة الموجودة في جذر الشعر ويتلف جذر الشعر. يسمح لك Ilex بالوصول إلى درجة حرارة كافية في جذر الشعر في وقت قصير جدًا وتطبيق إزالة الشعر بشكل دائم

محتوى التكنولوجيا

تتميز Ilex بتقنية إزالة الشعر بالليزر المجهزة برأس بطول موجي 557 و 1064 نانومتر ونظام هواء بارد متكامل يتيح لك Ilex إجراء المعاملات في وقت قصير جدًا بفضل قدرته على الصعود حتى 3 هرتز

مزايا الأعمال

بفضل سرعته المتزايدة التي تصل إلى 3 هرتز ، فإنه يوفر الفرصة للتطبيق على المزيد من الأشخاص في وقت أسرع وأقصر استخدام عملي مع تصميم رأس مريح يوفر الوقت بفضل التطبيق السريع والعملي

بفضل نظام التبريد القوي ، توفر جلسة مريحة ومستمرة. إنه يوفر سهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح وشاشة اللمس الرقمية الذكية. مع قضيبه المؤهل ، فإنه يوفر مخاطر منخفضة للغاية من الآثار الجانبية

نتائج ناجحة مع علاج فعال لجميع أنواع البشرة وبصيلات الشعر يسمح بإزالة الشعر بشكل مريح مع عتبة ألم منخفضة

بفضل تقنية الجيل الجديد ، توفر إزالة الشعر لمدة 4 مواسم تكلفة مناسبة لضربات


لا حاجة للغاز مع نظام هواء بارد متكامل

الفوائد التي تعود على المستخدم النهائي

تطبيق إزالة الشعر الذي يمكن الشعور بتأثيره حتى بعد الجلسة الأولى فرصة إزالة شعر مريحة وغير مؤلمة مستوى عالٍ من الراحة أثناء عمليات إزالة شعر الجسم بالكامل فرصة فعالة لإزالة الشعر في جميع الفصول عملية إزالة سريعة للشعر وجلسة قصيرة إمكانية الاستمرار في الحياة اليومية بعد العملية دون انقطاع

خصائص التقنية

83 * 120 * 59	الحجم
91 كغ	الوزن
220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
10.4 شاشة لمس	الشاشة
التركيبة والالتكيزي اختياري	اللغات
1	عدد الرووس
ALEXANDRITE LAZER - YAG LAZER	تقنية العمل
رمادي	اللون
راس ILEX	العناوين المستخدمة

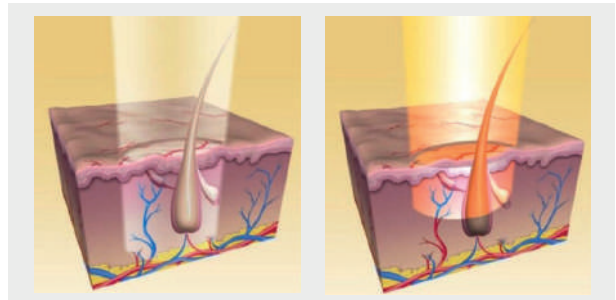

DIODE CARDINALE

خفيف الوزن وسريع وغير مؤلم والآن يوفر المزيد من التأثيرات القوية مع رأس خفيف الوزن



مزايا رأس الألياف مقابل رأس الصمام الثنائي العادي

DIODE CARDINALE 808 هو جيل جديد من أجهزة إزالة الشعر التي طورتها مجموعة موريت الذي يوفر فرصة إزالة الشعر عن طريق نقل الطاقة المتولدة في الجهاز بدلاً من الضوء المتولد في رأس الصمام الثنائي الكلاسيكي ، ويتم نقل هذه الطاقة إلى الرأس عبر الألياف الضوئية

مبدأ العمل

نظراً لأن قيمة الطاقة أعلى من تقنيات الصمام الثنائي الأخرى ، فإن تلف الشعر مرتفع نظراً لأن قيمة الطاقة أعلى من تقنيات الصمام الثنائي الأخرى ، فإن تلف الشعر مرتفع نظراً لأن الطاقة يتم توفيرها من خلال الجهاز ، فإن عمر الرأس يكون أطول نظراً لأن الطاقة تُعطى بالتساوي ، يتم تقليل مستوى الألم إلى الحد الأدنى ويوفر إزالة شعر ممتعة **CARDINALE 808** هو النظام الذي يسمح لضوء **808** نانومتر في الجهاز بالوصول إلى الجلد ومريحة. تكلفة الضربات أقل. تصل الطاقة إلى جذور الشعر بالتساوي

الفوائد التي تعود على المستخدم النهائي

فرصة إزالة شعر مريحة وغير مؤلمة
فرصة آمنة لإزالة الشعر باستخدام قضيب مؤهل
مستوى عالٍ من الراحة أثناء عمليات إزالة شعر الجسم بالكامل
التكنولوجيا المثالية لشعر الظهر الكثيف للرجال
إزالة شعر فعالة في جميع الفصول دون تأخير في حياتك الاجتماعية
إزالة سريعة للشعر ، فترات جلسات قصيرة


الإجراء

مزايا الأعمال

تكلفة اللقطة اقتصادية أكثر من رؤوس الصمام الثنائي الأخرى
يوفر الوقت بفضل التطبيق السريع والعملي
بفضل المواد الاستهلاكية طويلة الأمد والمتينة ، نقل الحاجة إلى الخدمة الفنية
يوفر جلسة مريحة بفضل نظام التبريد المتطور. توفر 4 مواسم لإزالة الشعر بسهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح ورأسه خفيف الوزن وشاشته الرقمية الذكية التي تعمل باللمس. مع قضيبه المؤهل ، فإنه يوفر مخاطر منخفضة للغاية من الآثار الجانبية

المواصفات الفنية

60 * 117 * 73 CM	الحجم
60 KG	الوزن
220-240V/50-60HZ	قيم العمل الكهربائي
10.4 شاشة لمس	الشاشة
اللغة التركية او الانكليزي	اللغات
اختياري 808 NM - 755 NM	طول الموجه
مبرد - هواء - ماء	نظام التبريد
متسلسل-مفرد	نظام العمل
(ذهبي) اختياري	اللون
CARDINALE رووس	العناوين المستخدمة

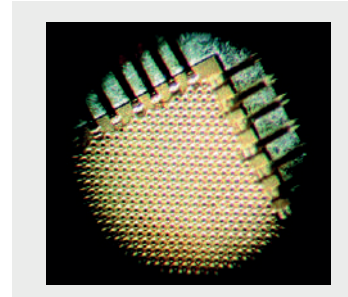

RED Shine Hybrid

مع 3 أطوال موجية مختلفة في جهاز واحد فعال وكثريع ومريح وأكثر قوة الآن



مزايا الأعمال

نظرًا لأنه يعطي أطوال موجية مختلفة في نفس الوقت في لحظة واحدة ، فإنه يساعد على إزالة الاختلاف في عدد الجلسات بين أنواع الشعر إنه يوفر الوقت بفضل تطبيقه السريع والعملية بفضل المواد الاستهلاكية طويلة الأمد والمتينة ، تقل الحاجة إلى الخدمة الفنية. بفضل نظام التبريد الفائق ، يوفر فرصة جلسة مريحة ومستمرة. إنه يوفر سهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح ورأسه الخفيف الوزن وشاشة اللمس الرقمية الذكية

إمكانية إزالة الشعر لمدة 4 مواسم بثلاث تقنيات مختلفة للأطوال الموجية مع قضيبه الموهل ، فإنه يوفر مخاطر منخفضة للغاية من الآثار الجانبية

تقلل جلسات التحكم من خلال تقنية إطلاق النار السريع

توفر عملية إزالة شعر مريحة بأقل ألم

تكلفة التصوير مناسبة

فوائد للمستخدم النهائي

ألم أقل وإزالة شعر مريحة

يكاد يكون من المستحيل التسبب في تلف الجلد والبقع على البشرة

الداكنة بمستوى عالٍ من الراحة أثناء عمليات إزالة شعر الجسم

بالكامل. التكنولوجيا المثالية لشعر الظهر الكثيف للرجال

فرصة فعالة لإزالة الشعر في 4 مواسم

إزالة سريعة للشعر ، جلسات قصيرة

إمكانية الاستمرار في الحياة اليومية بعد العملية دون انقطاع

Redshine Hybrid Diode

هو جهاز لإزالة الشعر بالليزر ديود تم تطويره بواسطة Mormed Group والذي يجمع بين أكثر 3 أطوال موجية فعالية وأمانًا (808 نانومتر ، 755 نانومتر و 1064 نانومتر) لبصيلات الشعر أثناء إزالة الشعر ويسمح بالتطبيق المتزامن

مبدأ العمل

توفر تقنية REDSHINE HYBRD إزالة شعر عملية وفعالة بإرسال موجة (808nm-1064nm) او (1064+808+755)نانو متر أطوال موجية مختلفة على الجلد في لحظة واحدة بنفس شعاع الضوء وتعديله وفقًا لنوع الشعر. يستهدف كل واحد من أطوال موجات الليزر الثلاثة المختلفة بنية تشريحية مختلفة في بنية الشعر وأعماق الأنسجة المختلفة

محتوى التكنولوجيا

808 نانومتر ديود: هذا الطول الموجي يمتص الميلانين بشكل معتدل. لذلك ، فهو يوفر إزالة آمنة للشعر على البشرة الداكنة

الكسندريت 755 نانومتر: هذا الطول الموجي هو الطول الموجي الذي يعطي الشعر لونه ويمتصه

الميلانين أكثر من غيره. إنه فعال للغاية على البشرة الفاتحة والشعر الداكن


1064 نانومتر هذا الطول الموجي مثالي للبشرة الداكنة جدًا والجلد المدبوغ مع امتصاص منخفض

للميلانين. الطول الموجي 1064 نانومتر هو الطول الموجي الذي يمكنه اختراق بصليات الشعر

بعمق. يساعد ذلك في تحقيق نتائج ناجحة في إزالة الشعر المتواجد بعمق مثل منطقة الظهر والعانة

المواصفات الفنية

59 * 120 * 53 CM	الحجم
63 KG	الوزن
220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
10.4 شاشة لمس	الشاشة
اللغة التركية او الانكليزي	اللغات
755 - 808 - 1064 NM	طول الموجة
مبرد - هواء - ماء	نظام التبريد
متسلسل-مفرد	نظام العمل
أرجواني داكن	اللون
RED SHINE راس	العناوين المستخدمة

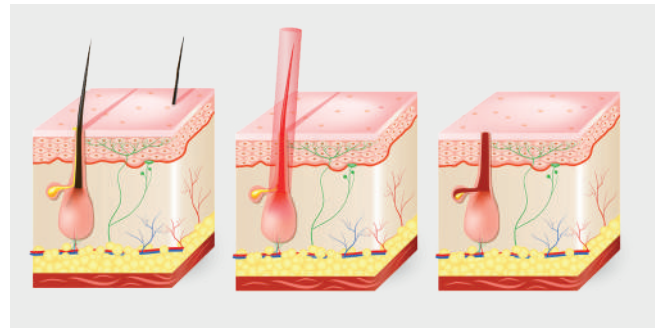

RED Shine +RF

نظام إزالة الشعر بالليزر الأكثر فعالية على الشعيرات
الرقيقة والخفيفة



مزايا الأعمال

إنها الطريقة الأكثر فعالية في بنية الشعر الرقيق ولون الشعر الفاتح
يبلغ طولها الموجي 808 نانومتر ، فهي تقلل من خطر إلحاق الضرر بالجلد وتوفر إزالة شعر
أسرع وأكثر أمانًا

إنه يوفر الوقت بفضل تطبيقه السريع والعملي

الحد الأدنى من متطلبات الخدمة الفنية بفضل المواد الاستهلاكية طويلة الأمد والمتينة
فرصة جلسة مريحة ومستمرة بفضل نظام التبريد الفائق

سهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح وشاشته الرقمية الذكية التي تعمل باللمس

إمكانية إزالة الشعر لمدة 4 مواسم بتقنية الجيل الجديد

عملية إزالة الشعر مع مخاطر منخفضة للغاية من الآثار الجانبية مع قضيب مؤهل

توفر إزالة شعر مريحة مع عتبة ألم منخفضة

تكلفة التصوير مناسبة

تدمير جذور الشعر بمستوى عالٍ مقارنة بتقنيات الصمام الثنائي الأخرى

ضرر أقل للرأس مع ميزة تسخين إضافية

نتائج أكثر نجاحًا وفعالية مع تقنية الترددات الراديوية

الفوائد التي تعود على المستخدم النهائي

أكثر فعالية في إزالة الشعر بفضل تقنية التردد اللاسلكي

فرصة إزالة شعر مريحة وغير مؤلمة

إزالة الشعر بشكل آمن على البشرة الداكنة

مستوى عالٍ من الراحة أثناء عمليات إزالة شعر الجسم بالكامل

إزالة شعر فعالة في جميع الفصول دون تأخير في حياتك الاجتماعية

فترات جلسات قصيرة مع عملية إزالة سريعة للشعر

فرصة لمواصلة حياتك اليومية بعد العملية دون أي انقطاع

REDSHINE DIODE + RF هي تقنية إزالة الشعر بالليزر من الجيل الجديد التي طورتها
Mormed Group بهدف تسخين الجلد وبصيلات الشعر على أعلى مستوي تدمير بصليات
الشعيرسة ، وذلك بفضل ميزة Diode + RF

مبدأ العمل

بفضل تقنية RF يتم رفع درجة الحرارة أولاً حتى 45 درجةً ما يوفر إزالة شعر أكثر فعالية
مع طاقة أقل لليزر. وبهذه الطريقة ، يمكن تحقيق المزيد من الفعالية على الشعر ذي اللون الفاتح
والأكثر نعومة

محتوى التكنولوجيا

تحتوي آلة إزالة الشعر بالليزر RED SHINE DIODE + RF التي تحتوي على نظام

إطلاق تسلسلي ، على تقنية RF + في رأسها ، على عكس أجهزة الليزر ديود الأخرى التي

تعمل بالتسلسل

باستخدام تقنية التردد اللاسلكي بزيادة درجة حرارة الجلد أثناء العملية ، مما يؤدي إلى نتائج
أكثر نجاحًا وأسرع في إزالة الشعر

يتميز الصمام الثنائي 808 نانومتر بامتصاص الميلانين ذي الطول الموجي المتوسط. لهذا
السبب ، توفر إزالة شعر آمنة للبشرة الداكنة إنه يقع في نطاق الطول الموجي الفعال في تدمير
بصيلات الشعر

المواصفات الفنية

60 * 126*84 CM	الحجم
63 KG	الوزن
220-240V/50-60HZ	قيم العمل الكهربائي
10.4 شاشة لمس	الشاشة
اللغة التركية او الانكليزي	اللغات
اختياري 755 - 808 - 1064 NM	طول الموجة
مبرد - هواء - ماء	نظام التبريد
0 - 25 J	معدل العمل
متسلسل-مفرد	نظام العمل
أرجواني داكن	اللون
روس RED SHINE +RF	العناوين المستخدمة



RED Shine

عملية أكثر الآن مع 3 رؤوس قابلة للتغيير بأحجام مختلفة الصرع قابل للتكيف في كل منطقة



RED SHINE 808 DIODE هو جهاز سريع وفعال لإزالة الشعر بطول موجي 808 نانومتر من إنتاج Mormed Group بفضل الطول الموجي الذي يبلغ 808 نانومتر ، وهو أطول من أنظمة إزالة الشعر الأخرى ، فهو يقلل من خطر إتلاف الجلد ويوفر إزالة شعر أكثر راحة

مبدأ العمل

توفر تقنية REDSHINE إزالة فعالة وآمنة للشعر من خلال توفير الوقت في عملية إزالة الشعر باستخدام تقنية النبضات الثانية 01 باستخدام الطول الموجي 808 نانومتر

محتوى التكنولوجيا

الطول الموجي 808 نانومتر لديه امتصاص معتدل للميلانين. لهذا السبب ، توفر إزالة شعر آمنة للبشرة الداكنة. إنه يقع في نطاق الطول الموجي الأكثر فعالية وفعالية في تدمير بصيلات الشعر

مزايا العمل

الاستخدام العملي في المناطق الضيقة والواسعة مع 3 رؤوس مختلفة الأحجام قابلة للاستبدال

مع طولها الموجي 808 نانومتر ، تقلل من خطر إتلاف الجلد وتوفر إزالة شعر أكثر أمانًا وأسرع الحد الأدنى من متطلبات الخدمة الفنية بفضل المواد الاستهلاكية طويلة الأمد والمتينة

إنه يوفر الوقت بفضل تطبيقه السريع والعملي فرصة جلسة مريحة ومستمرة بفضل التبريد الفائق المتقدم سهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح وشاشة اللمس الرقمية الذكية إمكانية إزالة الشعر لمدة 4 مواسم بتقنية الجيل الجديد مخاطر منخفضة للغاية من الآثار الجانبية مع قضيب مؤهل يسمح بإزالة الشعر بشكل مريح مع عتبة ألم منخفضة تكلفة الرماية مناسبة

الفوائد التي تعود على المستخدم

إجراءات فعالة وأقصر بفضل الرؤوس ذات الحجم المناسب لمناطق الجلد المختلفة فرصة إزالة شعر مريحة وغير مؤلمة إزالة الشعر بشكل آمن دون تلف الجلد أو ظهور عيوب على البشرة الداكنة مستوى عالٍ من الراحة أثناء عمليات إزالة شعر الجسم بالكامل عملية إزالة شعر فعالة في جميع الفصول فترات جلسات قصيرة مع عملية إزالة سريعة للشعر فرصة لمواصلة حياتك اليومية بعد العملية دون أي انقطاع

خصائص التقنية

الحجم	47 * 120 * 47 سم
قيم العمل الكهربائي	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
الشاشة	8 انج شاشة لمس
اللغات	تركي-انكليزي
طول الوجه	755 - 808 - 1064
نظام التبريد	تبريد إضافي
نظام عمل	ضربات منفرد
اللون	بني باقي اللواناختراري
الرؤوس المستخدمة	راس RED SHINE



REDShine fein

تكلفة قليلة وتصميم مريح تقنية Diode
جهاز صغير تقنيته كبيرة



REDSHINE FINE Diode طورت من قبل شركة MORMED GROU إنه جهاز محمول وسريع وفعال لإزالة الشعر بالليزر بطول موجة 808 نانومتر. بفضل طولها الموجة 808 نانومتر ، تقلل من خطر إتلاف الجلد وتوفر إزالة شعر أكثر راحة **مبدأ العمل** REDSHINE FINE Diode بفضل تقنية الطول الموجة 808 نانومتر وتقنية النبضات في الثانية عشر نبضة ، فإنها توفر الوقت في إزالة الشعر و إزالة فعالة وأمنة

محتوى التكنولوجيا

الطول الموجة 808 نانومتر لديه امتصاص معتدل للميلانين. لهذا السبب ، توفر إزالة شعر آمنة للبشرة الداكنة. إنه يقع في نطاق الطول الموجة الأكثر فعالية في تدمير بصيلات الشعر



مزايا الأعمال

سهل الاستخدام بتصميمه المريح والمحمول
الاستخدام العملي في المساحات الضيقة والكبيرة الحجم مع 3 أحجام مختلفة من الرؤوس القابلة للاستبدال. مع الطول الموجة 808 نانومتر ، فرصة إزالة الشعر أكثر أمانًا وأسرع من خلال تقليل مخاطر تلف الجلد

إنه يوفر الوقت بفضل تطبيقه السريع والعملي

الحد الأدنى من متطلبات الخدمة الفنية بفضل المواد الاستهلاكية طويلة الأمد والمتينة سهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح وشاشته الرقمية الذكية التي تعمل باللمس إمكانية إزالة الشعر لمدة 4 مواسم بتقنية الجيل الجديد مع قضيبه المؤهل ، فإنه يوفر مخاطر منخفضة للغاية من الآثار الجانبية نتائج ناجحة مع علاج فعال لجميع أنواع البشرة وبصيلات الشعر توفر إزالة شعر مريحة ومآلم منخفضة تكلفة الضربات مناسبة

فوائد للمستخدم النهائي

إجراءات فعالة وأقصر بفضل الرؤوس المتدرجة المناسبة لمناطق الجلد المختلفة. فرصة إزالة شعر مريحة وغير مؤلمة

إزالة شعر آمنة على البشرة الداكنة دون تلف الجلد أو البقع مستوى عالٍ من الراحة أثناء عمليات إزالة شعر الجسم بالكامل إمكانية إزالة الشعر بشكل فعال في جميع المواسم فترات جلسات قصيرة مع عملية إزالة سريعة للشعر فرصة لمواصلة حياتك الاجتماعية بعد العملية دون تأخير

خصائص التقنية

الحجم	46*38*62 سم
قيم العمل الكهربائي	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
الشاشة	10.4 انج شاشة لمس :
اللغات	تركي-انكليزي
طول الوجه	755 - 808 - 1064
نظام التبريد	ماء-بيبلتر
نظام عمل	ضربات ,مفرد
اللون	اسود باقي اللوان اختياري.
الرؤوس المستخدمة	راس RED SHINE

ALEX EIS

فريدة من نوعها تقنية جهاز إزالة الشعر ثلاثية الأبعاد SHR+
نظام إزالة الشعر في جهاز واحد



Alex Eis عبارة عن جهاز إزالة الشعر برأسين تم تطويره بواسطة Mormed Group بسنوات طويلة من الخبرة القطاعية ، حيث يقدم تقنية الإشعاع النبضي ورأس تبريد Eis ونظام النبض التسلسلي في جهاز واحد ، حيث يمكنك إجراء عمليات ثلاثية الأبعاد

مبدأ العمل

Alex Eis يتم تقليل مخاطر الاحتراق وتقليل الشعور بالألم ، بفضل تقنية الإشعاع النبضي والرأس المبرد للغاية ، والذي يتضمن أطوال موجية متغيرة في نطاق 610-1200 نانومتر ونظام إزالة الشعر ثلاثي الأبعاد. توفر تجربة إزالة شعر ممتازة من خلال زيادة سرعتها وراحتها من خلال ميزة الرمي التسلسلي

محتوى التكنولوجيا

يمكن إجراء عملية إزالة الشعر عن طريق اختيار النظام المثالي من بين تقنيتين مختلفتين تحتوي عليهما

نظام أليكس: في هذا النظام ، الذي يمكن تطبيقه بتقنية الإشعاع النبضي ونظام النبض المربع ، يمكن إجراء إزالة شعر فعالة وأمنة حتى على الشعر الرقيق والبيشرة الداكنة بالإضافة إلى ذلك ، يتم توفير فرصة علاج صحية بفضل رؤوس أغشية السيليكون المخصصة التي يمكن استخدامها مع الغطاء نظام Shr+: بينما يتم توفير تطبيق مريح عن طريق تقليل الشعور بالألم مع الغطاء المبرد ، في نفس الوقت ، يمكن إجراء عمليات إزالة الشعر بشكل أسرع وأكثر فاعلية باستخدام نظام الإخراج التسلسلي

المواصفات الفنية


50*120*60 CM	الحجم
70.55 KG	الوزن
220-240V/50-60HZ	قيم العمل الكهربائي
8 شاشة لمس	الشاشة
اللغة التركية او الانكليزي	اللغات
اختياري 610-1200 nm	طول الموجه
مبرد - هواء - ماء	نظام التبريد
10-50 J	معدل العمل
متسلسل-مفرد	نظام العمل
رمادي	اللون
راس alex راس Eis	الغتاوين المستخدمة

مزايا الأعمال

سهولة تلبية طلبات الناس ومتطلباتهم التكنولوجية بفضل تقنيتها يوفر الوقت بفضل تطبيقه السريع والعملي سهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح وشاشته الرقمية الذكية التي تعمل باللمس مع قضيبه المؤهل ، فإنه يوفر مخاطر منخفضة للغاية من الآثار الجانبية إمكانية إزالة الشعر لمدة 4 مواسم بتقنية الجيل الجديد تكلفة الرماية مناسبة فرصة تطبيق صحية مع رؤوس سيليكون قابلة للاستبدال تطبيق فعال ومريح مع الطول الموجي 610-1200 نانومتر وتقنية إزالة الشعر ثلاثية الأبعاد. توفير المساحة والتكلفة بفضل نظامين مختلفين توفر إزالة شعر مريحة و ألم منخفضة تحسن راحة إزالة الشعر من خلال تقليل مخاطر تلف الجلد بفضل نظام الهواء البارد المحسن ورأسها شديد البرودة

الفوائد التي تعود على المستخدم النهائي

مع نظام Alex System يمكنك الشعور براحة إزالة الشعر حتى بعد الجلسة الأولى التكنولوجيا الأكثر مثالية لمن لديهم شعيرات سميكة إمكانية إزالة الشعر بشكل فعال في جميع المواسم. إزالة سريعة للشعر ، فترات جلسات قصيرة. بعد العملية يمكنك متابعة حياتك اليومية دون انقطاع إزالة شعر مريحة وغير مؤلمة أثناء عمليات إزالة شعر الجسم بالكامل ميزة استخدام تقنية مختلفة لنفس المنطقة ولكن لأنواع مختلفة من شعر الجسم

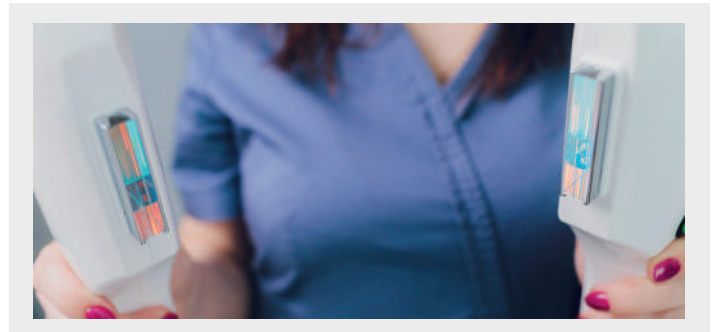

ALEX premium

يمكن استخدام تقنية إزالة الشعر ثلاثية الأبعاد المريحة في 4 مواسم وقابلة للتطبيق على أنواع البشرة المتعددة



مزايا الأعمال

إنه يوفر الوقت بفضل تطبيقه السريع والعملي
 أفضل نظام التبريد القوي ، فإنه يوفر فرصة جلوس مريحة ومستمرة. سهولة في الاستخدام
 أفضل تصميمه المريح وشاشته الرقمية الذكية التي تعمل باللمس. عملية إزالة الشعر مع
 مخاطر منخفضة للغاية من الآثار الجانبية مع قضيب مؤهل
 إمكانية إزالة الشعر لمدة 4 مواسم بتقنية الجيل الجديد
 تكلفة التصوير مناسبة
 فرصة تطبيق صحية مع رؤوس سيليكون قابلة للاستبدال. تطبيق فعال ومريح مع الطول
 الموجه 200-610nm وتقنية إزالة الشعر ثلاثية الأبعاد
 توفير المساحة والتكلفة بفضل نظامين مختلفين
 أفضل نظام الهواء البارد المتطور ورأس التبريد الإضافي ، تزيد من راحة إزالة الشعر من
 خلال تقليل مخاطر إلحاق الضرر بالجلد

الفوائد التي تعود على المستخدم النهائي

سهولة اختيار التكنولوجيا

جهاز واحد يستخدم لأنواع مختلفة من شعر الجسم

فرصة إزالة شعر مريحة وغير مؤلمة

التكنولوجيا المثالية لشعر الظهر الكثيف للرجال

فرصة فعالة لإزالة الشعر في جميع الفصول

إزالة سريعة للشعر ، جلسات قصيرة

مستوى عالٍ من الراحة أثناء عمليات إزالة شعر الجسم بالكامل

فرصة لمواصلة حياتك اليومية بعد العملية دون انقطاع. إزالة الشعر بدون جل

يجمع Alex Premium الذي طورته Mormed Group بأحدث التقنيات ، تقنية إشعاع التي تقسم طاقة اللقطة الواحدة إلى 2-3 أو 4 ، ورأس التبريد Eis ونظام النبض التسلسلي في جهاز واحد ، وإزالة الشعر بالصور ثنائية الرأس حيث يمكنك معالجة ثلاثية الأبعاد

مبدأ العمل

يملك Alex Premium الطول الموجه الأكثر فاعلية بين 610-1200 نانومتر لبصيلات ويتضمن نظام إزالة الشعر ثلاثي الأبعاد ، ويتم تقليل مخاطر الاحتراق وتقليل الشعور بالألم بفضل تقنية إشعاع النبض ورأس التبريد الإضافي. توفر تجربة إزالة شعر ممتازة من خلال زيادة سرعتها وراحتها من خلال ميزة الرمي التسلسلي

محتوى التكنولوجيا

يمكن إجراء عملية إزالة الشعر عن طريق اختيار النظام المثالي من بين تقنيتين مختلفتين تحتوي عليهما


نظام اليكس: في هذا النظام ، الذي يمكن تطبيقه بتقنية الإشعاع النبضي ونظام النبض التسلسلي عن طريق تقسيم طاقة واحدة إلى 2-3 أو 4 ، يمكن إجراء إزالة شعر فعالة وموثوقة حتى على الشعر الناعم والبشرة الداكنة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تقديم علاج صحي شخصي مع غطاء من

السيليكون ، بينما ينقل نظام نفخ الهواء البارد Air-Liquid-Tec مستوى الألم ويوفر راحة

نظام+Shr ، بينما يتم توفير تطبيق مريح عن طريق تقليل الشعور بالألم مع الرأس المبرد في نفس الوقت ، يمكن إجراء عمليات إزالة الشعر بشكل أسرع وأكثر فاعلية باستخدام نظام الحقن ، التسلسلي

المواصفات الفنية

60*83*115 CM	الحجم
90.55 KG	الوزن
220-240V/50-60HZ	قيم العمل الكهربائي
10.4 شاشة لمس	الشاشة
اللغة التركية او الانكليزي	اللغات
اختياري 610-1200 nm	طول الموجه
مبرد - هواء - ماء	نظام التبريد
10-50 J	معدل العمل
متسلسل-مفرد	نظام العمل
رمادي كاشف	اللون
راس alex راس Eis	العناوين المستخدمة

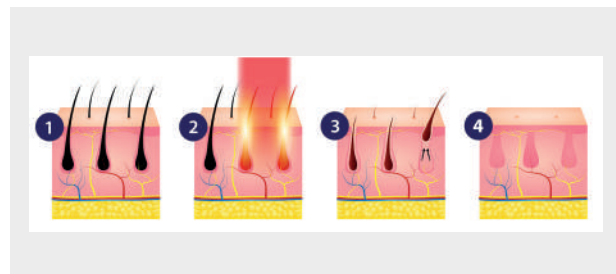

ALEX plus

جهاز إزالة الشعر الأكثر فعالية في العالم



Alex PLUS تطورت من قبل شركتنا التي توفر نقلًا قويًا للطاقة إلى بصليات الشعر من خلال تقنية إشعاع النبض القابلة للتقسيم (2-4) ، وتوفر نتائج ناجحة حتى على البشرة الداكنة وحتى الشعر الناعم ، كما تتيح أيضًا تطبيقات أكثر راحة لإزالة الشعر مع نظام الهواء البارد المتكامل ، وهو جيل جديد من أجهزة إزالة الشعر من خلال ضربات الأشعة

كيفية العمل

يحتوي **Alex Plus** على طول موجة أكثر فعالية في نطاق 610-1200 نانومتر المطلوبة لازالة الشعر بفضل نظام الهواء البارد المدمج مع تقنية الإشعاع النبضي ، فإنه يوفر تجربة إزالة شعر فعالة وصحية ، مع تقليل مخاطر الإصابة بحروق الجلد وتقليل الشعور بالألم

محتوى التكنولوجيا

نظام أليكس: في هذا النظام ، الذي يمكن تطبيقه بتقنية الإشعاع النبضي ، يمكن إجراء إزالة شعر فعالة وموثوقة حتى على الشعر الناعم والبشرة الداكنة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تقديم علاج صحي شخصي مع غطاء السيليكون ، بينما يقلل نظام نفخ الهواء البارد من مستوى الألم ويوفر راحة إضافية

مزايا التي تقدمها للعمل


إنه يوفر الوقت بفضل تطبيقه السريع والعملي بفضل المواد الاستهلاكية طويلة الأمد والمتينة ، فإنه يقلل من الحاجة إلى الخدمة الفنية إنه يوفر سهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح وشاشة اللمس الرقمية الذكية مع قضيبيه المؤهل ، فإنه يوفر مخاطر منخفضة للغاية من الآثار الجانبية توفر إزالة شعر مريحة مع عتبة ألم منخفضة تكلفة الضربات الإشعاعية مناسبة القدرة على المعالجة دون استخدام الجل فرصة تطبيق صحية مع رؤوس سيليكون قابلة للاستبدال تطبيق فعال ومريح مع الطول الموجه 610-1200 نانومتر تقنية إزالة الشعر ثلاثية الأبعاد مع نظام الهواء البارد المدمج ، يقلل من خطر إتلاف الجلد ويزيد من راحة إزالة الشعر

الفوائد التي تعود على المستخدم

توفر إزالة شعر صحية برؤوس سيليكون مخصصة إزالة شعر مريحة وغير مؤلمة مع نظام نفخ الهواء البارد إزالة شعر آمنة على البشرة الداكنة دون تلف الجلد أو اليبق مستوى عالٍ من الراحة أثناء عمليات إزالة شعر الجسم بالكامل التكنولوجيا المثالية لمن لديه شعر كثيف إمكانية إزالة الشعر بشكل فعال في جميع المواسم إزالة سريعة للشعر ، فترات جلسات قصيرة بعد العملية يمكنك متابعة حياتك اليومية

المواصفات الفنية

50*120*50 CM	الحجم
67 KG	الوزن
220-240V/50-60HZ	قيم العمل الكهربائي
8 شاشة لمس	الشاشة
اللغة التركيبية او الانكليزي	اللغات
610-1200 nm	طول الموجه
هواء - ماء	نظام التبريد
10-50 J	معدل العمل
متسلسل-مفرد	نظام العمل
ابيض باقي اللوان اختياري	اللون
راس alex	العناوين المستخدمة

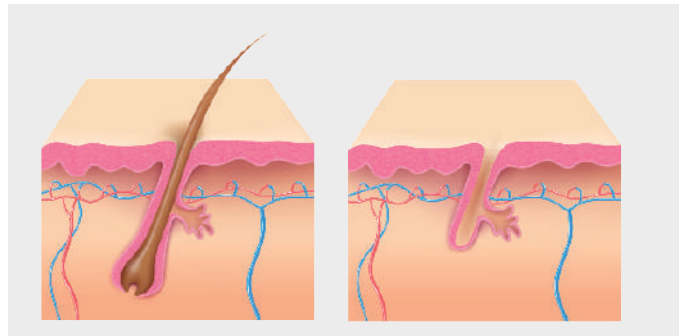



إرضاء العملاء بمستوى عالٍ مع الجيل الجديد
من IPL تقنية MAGIC PRO الإبداعي والقائم
على الابتكار



مزايا الأعمال

إنه يوفر الوقت بفضل تطبيقه السريع والعملي
بفضل نظام التبريد القوي ، توفر جلسات مريحة ومستمرة
سهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح وشاشته الرقمية الذكية التي تعمل باللمس
مع أداة التطبيق المؤهلة ، توفر مخاطر منخفضة للغاية من الآثار الجانبية لإزالة الشعر ، كما تقلل
من جلسات التحكم باستخدام تقنية SHR+
توفر إزالة شعر مريحة مع عتبة ألم منخفضة
إمكانية إزالة الشعر لمدة 4 مواسم بتقنية الجيل الجديد
تكلفة الضربات مناسبة
يزيد من راحة إزالة الشعر عن طريق تقليل مخاطر تلف الجلد بفضل رأسه المطور فائق البرودة

الفوائد التي تعود على المستخدم

فرصة إزالة شعر مريحة وغير مؤلمة
إزالة الشعر بشكل آمن على البشرة الداكنة
مستوى عالٍ من الراحة أثناء عمليات إزالة شعر الجسم بالكامل
إزالة شعر فعالة في جميع الفصول دون تأخير في حياتك الاجتماعية
إزالة سريعة للشعر ، فترات جلسات قصيرة بعد العملية يمكنك متابعة حياتك اليومية دون انقطاع

Magic Pro جهاز إزالة الشعر بطول موجه من 610-1200 نانومتر ويمكن إجراؤه بمعدل 10

نبضات في الثانية باستخدام تقنية النبض التسلسلي ، يمكنك معالجته بأمان لمدة 4 مواسم باستخدام رأس تم
التبريد Eis تم تطويرها من قبل MORMED GROUP وتوفر أيضًا استخدامًا وظيفيًا أكثر مع تصميم
الشاشة الكبيرة
مبدأ العمل

يمكن لـ **Magic Pro** بفضل تقنية الضربات المتسلسلة يمكن إجراء ضربات خلال ميلي ثانية تحت الجلد

يسمح لك بإعطاء الكمية المناسبة من الطاقة لجذر الشعر حسب الحاجة بفضل رأس **Eis** راس البارد يتم
تقليل خطر الاحتراق وتقليل الشعور بالألم ، توفر فرصة مثالية لإزالة الشعر من خلال زيادة سرعتها
وراحتها من خلال ميزة الرمي التسلسلي

محتوى التكنولوجيا

نظام Shr +: مع رأس **Eis** المبرد للغاية ، يتم توفير تطبيق مريح عن طريق تقليل الشعور بالألم ، بينما
في نفس الوقت ، يمكن إجراء عمليات إزالة الشعر بشكل أسرع وأكثر فاعلية باستخدام نظام الإخراج
التسلسلي

المواصفات الفنية

53* 100*87 CM	الحجم
55 KG	الوزن
220-240V/50-60HZ	قيم العمل الكهربائي
10.4	الشاشة لمس
اللغة التركية أو الانكليزي	اللغات
nm 610-1200	طول الموجه
بيلتيير - ماء	نظام التبريد
10-50 J	معدل العمل
متسلسل-مفرد	نظام العمل
اسود باقي اللون اختياري	اللون
راس Eis	العناوين المستخدمة





سرعة ، وأمنة ، و مضاف عليها رأس مبرد
بتقنيةFOTO لإزالة الشعر



مزايا الأعمال

إنه يوفر الوقت بفضل تطبيقه السريع والعملي
بفضل نظام التبريد القوي ، فإنه يوفر فرصة جلسة مريحة ومستمرة
سهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح وشاشته الرقمية الذكية التي تعمل باللمس
مع قضيبه المؤهل ، فإنه يوفر مخاطر منخفضة للغاية من الآثار الجانبية
توفر إزالة شعر مريحة مع عتية ألم منخفضة
إمكانية إزالة الشعر لمدة 4 مواسم بتقنية الجيل الجديد
تكلفة اللقطات مناسبة
يزيد من راحة إزالة الشعر عن طريق تقليل مخاطر تلف الجلد بفضل رأسه المطور فائق
البرودة

الفوائد التي تعود على المستخدم

فرصة إزالة شعر مريحة وغير مؤلمة
مستوى عالٍ من الراحة أثناء عمليات إزالة شعر الجسم بالكامل
إزالة شعر فعالة في جميع الفصول دون تأثير في حياتك الاجتماعية
إزالة سريعة للشعر ، جلسات قصيرة
بعد العملية يمكنك متابعة حياتك اليومية بشكل طبيعي

Magic Eis عبارة عن جهاز لإزالة الشعر بتقنية **FOTO** بطول موجه من 610-1200 نانومتر
يمكنه إجراء 10 لقطات في الثانية باستخدام تقنية **SHR +** ويتضمن أيضًا رأس تبريد **Eis**
ونظام نبض تسلسلي عالي المستوى.
طورت من قبل شركة **MORMED** يمكن إجراء إزالة الشعر بأمان في 4 مواسم

مبدأ العمل

بفضل تقنية **SHR +** يمكن لـ **Magic Eis** نقل الضوء تحت الجلد في أجزاء من الثانية مع كل لقطة
بفضل رأس **Eis** المبرد يتم تقليل خطر الاحتراق وتقليل الشعور بالألم. يوفر تطبيقًا مثاليًا لإزالة الشعر
من خلال زيادة سرعته وراحته من خلال ميزة الرمي التسلسلي

محتوى التكنولوجيا

نظام SHR+: مع رأس **Eis** المبرد للغاية ، يتم توفير تطبيق مريح عن طريق تقليل الشعور بالألم
بينما في نفس الوقت ، يمكن إجراء عمليات إزالة الشعر بشكل أسرع وأكثر فعالية باستخدام نظام
الحقن التسلسلي

المواصفات الفنية

50* 120* 50 CM	الحجم
48 KG	الوزن
220-240V/50-60HZ	قيم العمل الكهربائي
8 شاشة لمس	الشاشة
اللغة التركية او الانكليزي	اللغات
nm 610-1200	طول الموجه
بيبتير- ماء	نظام التبريد
10-50 J	معدل العمل
متسلسل-مفرد	نظام العمل
أزرق باقي اللون اختياري	اللون
EIS رأس	العناوين المستخدمة





MAGIC PULSE لا يأخذ استراحة اذا لم تأخذ استراحة تقنية سريعة وفعالة واقتصادية لازالة الشعر مع راس SHR+



محتوى التكنولوجيا

نظام SH+ ، مع توفير تطبيق مريح عن طريق تقليل الشعور بالألم ، في نفس الوقت يمكن إجراء عمليات إزالة شعر أسرع وأكثر فعالية باستخدام نظام النبض التسلسلي

مزايا الأعمال

يوفر الوقت بفضل التطبيق السريع والعملي
بفضل المواد الاستهلاكية طويلة الأمد والمتينة ، تقل الحاجة إلى الخدمة الفنية
بفضل نظام التبريد القوي ، توفر جلسات مريحة ومستمرة
سهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح وشاشته الرقمية الذكية التي تعمل باللمس
إمكانية إزالة الشعر باستخدام قضيب مؤهل مع مخاطر منخفضة للغاية من الآثار الجانبية
توفر إزالة شعر مريحة لمن يعانون من الألم منخفضة
إمكانية إزالة الشعر لمدة 4 مواسم مع تقنية الجيل الجديد **shr +**
تكلفة الضربات مناسبة

الفوائد التي تعود على المستخدم

إزالة شعر مريحة بأقل قدر من الألم
مستوى عالٍ من الراحة أثناء عمليات إزالة شعر الجسم بالكامل
إزالة شعر فعالة في جميع الفصول دون تأثير في حياتك الاجتماعية
إزالة سريعة للشعر ، جلسات قصيرة
فرصة لمواصلة حياتك اليومية بعد العملية دون انقطاع

هي تقنية **FOTO** لإزالة الشعر تهدف إلى إجراء أكثر راحة وأماناً لإزالة الشعر من خلال اوضاع التشغيل الفعالة المتزايدة.

يمكن إجراء تطبيق فعال ومريح على العديد من أنواع البشرة ، يتم تقليل وقت التطبيق من خلال إجراء 10 لقطات في الثانية باستخدام تقنية اللقطة التسلسلية
مع هذه التقنية التي طورتها **Mormed Group** تستطيع إزالة الشعر دون انقطاع لمدة 4 مواسم

مبدأ العمل

بينما يمكن لـ **Magic Pulse** توصيل كل نبضة تحت الجلد في أجزاء من الثانية باستخدام تقنية الضربات المتسلسلة ، فإنها تتيح لك إعطاء طاقة كافية لجذر الشعر. إنها تتيح عملية إزالة شعر مثالية مع زيادة السرعة والراحة

المواصفات الفنية

50* 120*50 CM	الحجم
48 KG	الوزن
220-240V/50-60HZ	قيم العمل الكهربائي
8شاشة لمس	الشاشة
اللغة التركية او الانكليزي	اللغات
اختياري 610-1200 nm	طول الموجه
بالتبريد - ماء	نظام التبريد
10-50 J	معدل العمل
متسلسل-مفرد	نظام العمل
زهري	اللون
راس EIS	العناوين المستخدمة



نظام إزالة الشعر بل ابره

إزالة فعالة عندما تكون جميع أنواع الليزر غير كافية



جهاز إزالة الشعر بالإبرة عبارة عن جهاز لإزالة الشعر بإبرة من نظامين يشتمل على أنظمة الفلاش والتحليل الحراري ، مما يسمح بالتطبيق بالطرق الكلاسيكية وغير المؤلمة

إنه أحد أنظمة إزالة الشعر الدائمة التي تعطي النتائج الأكثر فاعلية في إزالة الشعر الكلاسيكية ولكن التي لا تزال صالحة لكل زمان. يمكن استخدام إزالة الشعر بالإبرة في معظم مناطق الجسم ، بما في ذلك الحاجبين والوجه والبطن والفخذين والثديين والساقين

مبدأ العمل

من أجل تدمير جذر الشعر ، يتم تطبيق تيار كهربائي في بصيلات الشعر باستخدام قطب كهربائي رقيق للغاية على شكل إبرة أو مسبار معدني

يتبع مسبار رقيق جذع الشعرة باتجاه الحليمات الجلدية ، بينما في نفس الوقت تيار كهربائي خاص يدمر الحليمات. ثم يتم إزالة شعر الجسم الخفيف

محتوى التكنولوجيا

التحليل الكهربائي ، وهو طريقة لإزالة الشعر المتكسر من الوجه أو الجسم ، هو تقنية تم تطويرها لتدمير مركز نمو الشعر مباشرة باستخدام الطاقة الكيميائية أو الحرارية

مزايا الأعمال


توفر إزالة فعالة للشعر الرمادي والأبيض والأحمر والأصفر يوفر استخدامًا أكثر حساسية وكفاءة مع وعاء التيار القابل للتعديل يوفر فرصة فعالة لإزالة الشعر في الحالات التي تكون إزالة الشعر بالليزر و FOTO غير فعالة

الفوائد التي تعود على المستخدم

يوفر معدل تأثير أكثر ديمومة إنه نظام فعال للشعر الأبيض يزيد من معدل النجاح في الإجراءات التكميلية وتطبيقات إزالة الشعر لتقنية FOTO

المواصفات الفنية

26 * 34 CM	الحجم
25 W	القوة
220-240V/50-60HZ	قيم العمل الكهربائي
ضبط الوقت الرقمي 7 ثوانٍ العرض الرقمي	الشاشة
فلاش ثيرموز	تقنية العمل
انترسيبت	اللون
مسبار الإبرة	الرووس المستخدمة
MHZ 1.2	تردد الخروج

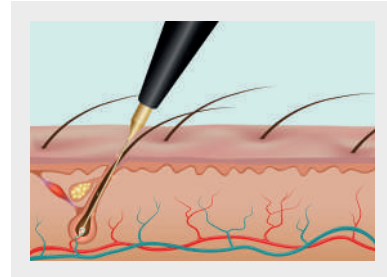

Tatouage

DEPIGMENTASYON & KARBON PEELING

مع TATOUAGE جودة عالية وأمنة تقشير الكربوني



هو جهاز احترافي لإزالة الوشم وتقشير الكربون تم تطويره بواسطة **Mormed Group** والذي يغطي العديد من الألوان ومجهز بتقنية ليزر **switched & Nd** القوية لإزالة الوشم بنجاح يمكن استخدامه بأمان على العديد من أنواع البشرة بأربعة أطوال موجة مختلفة .
يمكنك المساعدة في تقليل الصبغات الحمراء والبرتقالية والصفراء بطول موجة 532 نانومتر ، والأصبع السوداء والزرقة بطول موجة 1064 نانومتر. مع الطول الموجة 755 نانومتر يمكن تقليل الصبغات الخضراء. يمكن إجراء التقشير الكربوني بطول موجة يبلغ 1320 نانومتر. بينما يمكنك إجراء عمليات تجميل محيط الحاجب والشفاة باستخدام تاتواج ، يمكنك أيضًا المساعدة في تقليل ظهور الشوائب وتقليل المسام باستخدام رأس التقشير الكربوني

مبدأ العمل

يساهم في تصحيح مشاكل البشرة بأربعة رؤوس مختلفة. تنتج أشعة ليزر عالية الجودة بأطوال موجية مختلفة من 532 و 755 و 1064 و 1320 نانومتر ، وتستهدف جزيئات الصبغة وتحدد الطول الموجي المناسب للون الصبغ ويتم التطبيق. نظرًا لأن الأشعة تستهدف الصبغة فقط ، فيمكن استخدامها بأمان على العديد من أنواع البشرة ، بغض النظر عن لون البشرة

محتوى التكنولوجيا

تاتواج: إن إزالة التصبغ والتقشير الكربوني هي أيضًا تقنيات إضاءة فعالة مع نظام ضوئي يرسل الطاقة بشكل متساوٍ في إزالة الصباغ ومجموعة واسعة من خيارات الألوان

مزايا الأعمال

تسمح لك الأطوال الموجية المختلفة بإجراء عملية إزالة الوشم ناجحة وسهلة. إنه يوفر الوقت بفضل تطبيقه السريع والعملي الحد الأدنى من متطلبات الخدمة الفنية بفضل المواد الاستهلاكية طويلة الأمد والمتينة بفضل نظام التبريد القوي ، فإنه يوفر فرصة جلسة مريحة ومستمرة سهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح ورأسه خفيف الوزن وشاشته الرقمية الذكية التي تعمل باللمس عمليات ناجحة لكل لون باستخدام 4 تقنيات مختلفة للأطوال الموجية مخاطر منخفضة للغاية من الآثار الجانبية مع قضيب مؤهل إنه يوفر إجراء مريحًا مع عتبة ألم منخفضة تكلفة إجراء مناسبة يمكن استخدامه بأمان على العديد من أنواع البشرة

الفوائد التي تعود على المستخدم

عملية إزالة التصبغ بشكل مريح معالجة سريعة وفعالة عملية تقشير كربوني ناجحة بتقنياتها القوية ميزة الاستخدام في جميع الفصول إمكانية الاستمرار في الحياة الاجتماعية بعد الإجراء



الطول الموجي 532 نانومتر - للوشم ذات الألوان الفاتحة


الطول الموجي 755 نانومتر - للوشم باللون الأخضر

الطول الموجي 1064 nm للوشم الداكن

الطول الموجي 1320 نانومتر رأس التقشير الكربوني

الموصفات الفنية

56 * 110 * 54 CM	الحجم
220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
44 KG	الوزن
شاشة تعمل باللمس مقاس 10.4 بوصة	الشاشة
التركيبة او الانكليزية	اللغات المستخدمة
532 - 755 - 1064 - 1320 NM	طول الموجة
رمادي باقي اللون اختياري	اللون
TATOUAGE رؤوس	الرؤوس المستخدمة

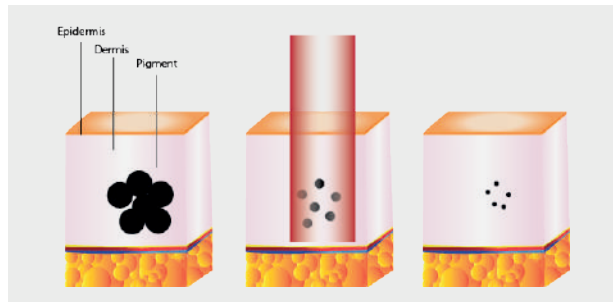

HQP

HydrOxyPeel

ابتكار مبتكر في أنظمة العناية بالبشرة
تطبيق ANTI AGING



هو جيل جديد من أجهزة العناية بالبشرة يستخدم (إي ان واحد من تقنيات التقشير المائي والتقشير الفائق النفاث ، مما يساعدك في الوصول إلى بشرة أكثر إشراقاً وجمالاً بشكل مريح. طريقة Hydroxy Peel هي نظام غير جراحي يجمع بين عمليات تنظيف البشرة وترطيبها والعناية بها

مبدأ العمل

العناية الشاملة بالبشرة يساعد على التخلص من مشكلة المسام الكبيرة أو المسدودة ، الرؤوس السوداء جفاف الجلد وفقدان مرونة الجلد تفاوت لون البشرة ، عدم توازن الدهون

محتوى التكنولوجيا

بشكل عام ، إنها تقنية متعددة الوظائف للعناية بالبشرة مع جميع المعادن الموجودة في محتواها

حلول

A - AHA Solution

بفضل ميزة التقشير ، يعمل حمض الجليكوليك (AHA) على تنعيم البشرة عن طريق إزالة الخلايا الميتة. في الوقت نفسه ، يوفر بشرة حيوية ومشرقة. يقلل من علامات الشيخوخة ويساعد على إزالة ندبات حب الشباب وحب الشباب. يتميز بكونه مرطب مقشر لما له من تأثير في الاحتفاظ بالمياه وترطيب للبشرة

B - BHA Salicylic Acid Cleansing Solution

يستخدم للبشرة الدهنية ومنطقة. بفضل ميزة التقشير ، ينقي حمض الساليسيليك (BHA) البشرة دون تهيجها. يساعد في تقليل مشكلة البشرة الدهنية عن طريق موازنة إفراز الدهون

C - Moisturize and Nourish Solution

يستخدم بعد العلاج بـ BHA و AHA أو لجميع أنواع البشرة التي تحتاج إلى ترطيب. بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه يععم البشرة ويلطفها ويرطبها بعمق

D - Cleanser

يساعد على تنظيف البقايا في أنابيب النظام وتنظيف النظام النشط بعد كل عملية

مزايا الأعمال

كفاءة عالية بتكلفة منخفضة

ميزة تصميم مريح

ممارسات فعالة مع عناوين قابلة للتطبيق لكل منطقة

إمكانية التوفير مع إمكانية إجراء العديد من العمليات المختلفة على جهاز واحد

سهل الاستخدام بفضل الرؤوس الصغيرة والخفيفة

الفوائد التي تعود على المستخدم

إمكانية الاستمرار في الحياة اليومية بعد العملية

العناية بالبشرة بعملية سريعة ومريحة

إنه يوفر تظهيراً عالي الجودة وفعالاً للبشرة

تطبيقات العناية بالبشرة التي توفر تأثيراً نظيفاً ونظيفاً وحيوياً وسلساً ومشرقاً مع الاستخدام الوظيفي

المواصفات الفنية

41*124*50 CM	الحجم
220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
55 KG	الوزن
10.4 شاشة لمس	الشاشة
التركيبة أو انكليزية	اللغات المستخدمة
ازرق باقي اللون اختياري	اللون
12	عدد الرؤوس
استتيك جلد	تقنية العمل

علاج الصمام

إيه نظام يحول الضوء إلى طاقة باستخدام خيارات الضوء بألوان مختلفة دون إحداث تأثير حراري في الخلايا ويساعد على تنشيط الخلايا

الضوء الأزرق: يساعد على موازنة إنتاج الزيت للبشرة المعرضة لحب الشباب

الضوء الأخضر: يساعد على توازن لون البشرة

الضوء الأحمر: يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين

الضوء الأصفر: يساعد على تنظيم الجلد والدورة الدموية واللمفاوية ويقلل من ظهور الاحمرار

رئيس التطبيق البارد

يساعد التطبيق البارد على تقليل حساسية الجلد

رداً

بعد الكشف عن الجلد ، يتم التأكد من أن المنشط أو المصل الذي يلبي احتياجات

الجلد ينتشر بسهولة على الجلد

VAKUM

يتم استخدامه في الحالات التي يحتاج فيها الجلد إلى VAKUM

RADYO FREKANS

تساعد الترددات الراديوية البشرة على الظهور بمظهر أكثر توتراً بفضل الحرارة التي تحدثها على الجلد

ULTRASONIC PEELING

هي طريقة تخلق سلسلة من الموجات الصوتية على سطح الجلد ، تساعد البشرة على التخلص من الخلايا الميتة دون تهيج ،

وتنظيف البقع السوداء والدهون

AQUA PEELING

يساعد في الوصول إلى بشرة أكثر إشراقاً وجمالاً بطريقة مريحة باستخدام طرق الماء VAKUM

ULTRA JET PEELING

يقوم ضغط الهواء الموجود بالجهاز بإرسال ضغط الهواء مع الماء في وقت التطبيق. بهذه الطريقة ، يتم إرسال الماء

والهواء إلى الجلد

LIFTING

يساعد الرفع على تمرين عضلات الوجه التي تظل ثابتة

BIPOLAR RADYO FREKANS

تساعد الترددات الراديوية البشرة على الظهور بمظهر أكثر توتراً بفضل الحرارة التي تحدثها على الجلد

ULTRASOUND

يساعد على امتصاص الجلد للمنتجات المناسبة والفعالة مع اهتزازات الموجات الصوتية



A - AHA Solution

لجميع أنواع البشرة

B - BHA Salicylic Acid

Cleansing Solution

لجلد قديم ومختلط

C - Moisturize and

Nourish Solution

الترطيب والتغذية

D - Cleanser

System Cleansing

Solution

dermarc

اصنع تأثيرًا جديدًا في العناية بالبشرة
النظام الذي يوفر التجديد
الجلد نفسه



ما هو Dermalc

الذي يمكن أن يعمل في أوضاع نبضية وغير نبضية ، للعمل دون اتصال من خلال شرارات تيار عالية التردد

في أي مناطق يتم استخدام Dermalc


العناية بالبشرة / مكافحة الشيخوخة / العناية بعلامات التمدد

كيف يقوم Dermalc بتجديد البشرة

يصلح الجلد بتأثيره الحراري على سطح الجلد بالتيار الذي يعطيه. يبدأ عملية التجديد عن طريق تحفيز ألياف

الكولاجين والإيلاستين

Dermalc هو نظام فعال لإصلاح الجلد حيث يمكنك الحصول على بشرة ناعمة مرغوبة في أنسجة الجلد التي
بها مشاكل

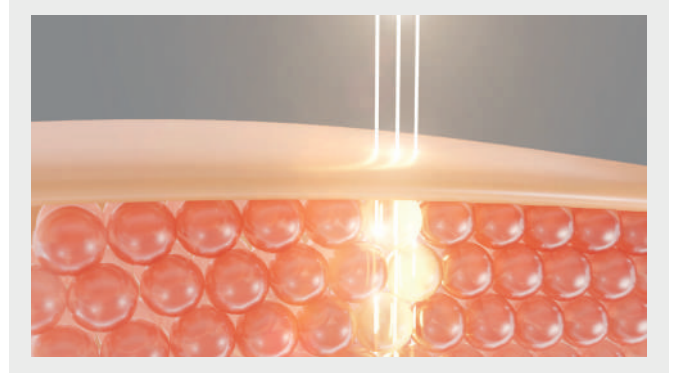

في العناية بالبشرة ARC TOUCH

سنتين الضمان

الميزات الفنية

27 * 30 * 15 CM	الحجم
220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
4 KG	وزن
0.25 A	تدفق
P MAX: 55 W	القوة
ARC SISTEMI	نظام العمل
ذهبي	اللون
DERMARC رامن	الروؤس المستخدمة



Striaoff

نظام إصلاح الجلد المتشقق ، بدء تجديد الجلد من خلال VAKUM



حلول

PROFESSIONAL USE

- رقم 1: يستخدم بيروكسيد الهيدروجين لتطهير الجلد قبل وضعه لتفتيته من الجراثيم والبكتيريا
- رقم 2: مع مزيج من المكونات النشطة فيه ، يسرع الدورة الدموية ويبدأ الكولاجين وتجديد خلايا الجلد الميت
- رقم 3: يتم زيادة كفاءة الإجراء باستخدام الزيوت النباتية الموجودة فيه لتحريك الرأس أثناء العملية
- رقم 4: يتم استخدامه لتسريع عملية تجديد الجلد من أجل إزالة السموم (السموم / الضرر الذي يظهر في الكائن الحي) في أجسامنا
- رقم 5: يتم استخدامه لمواصلة تجديد الخلايا التي قمنا بإعادة تشغيلها ، لشد الجلد وتوحيد مظهر السطور مع لون البشرة مع الأحماض المفيدة في محتواها

HOME USE

- إنها سلسلة عناية منزلية تستخدم للعناية بالتشققات الجلدية بعد تطبيق إعادة تأهيل تشققات الجلد المهنية
- رقم 1: من خلال إحداث تأثير حراري في الجسم ، يتخذ الجسم إجراءات عن طريق تسريع الدورة الدموية والتمثيل الغذائي ويساعد على زيادة إنتاج الكولاجين
 - رقم 2: يربط البشرة ويوازن درجة الحموضة فيها. يساعد الجلد على التنفس وتردد الجلد الميت من الجسم
 - رقم 3: ينظف البشرة من السموم ويساعد على موازنة لون البشرة وشد الجلد
 - رقم 4: يدعم إنتاج الكولاجين في الجلد ويساعد على استمرار تجديد الخلايا. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استهداف بشرة أكثر نعومة وحيوية
- الصفراء: هو غسول طارئ يستخدم لتحديد العملية وإرخاء الجسم في حالة حدوث أي تأثير غير متوقع

هو جهاز احترافي لإصلاح التشققات الجلد تم تطويره وإنتاجه خصيصاً بواسطة شركتنا بهدف القضاء على مشاكل الجلد باستخدام تقنية الشفط

هو نظام ديناميكي لإعادة تأهيل تشققات الجلد بمعدل نجاح يصل إلى 80% ، يتم إجراؤه من خلال الجمع بين الجيل الجديد من جهاز strivak وحلول الاستخدام المنزلي والاستخدام المحترف المنتجة بتركيبية خاصة وتطبيق تقنية الإجراء المناسبة مبدأ العمل

تبدأ عملية تجديد البشرة باستخدام حلول الاستخدام المنزلي والاستخدام الاحترافي أثناء وبعد التطبيق باستخدام نظام شفط قوي يمكن تعديله وفقاً لبنية جلد جهاز ستريفاك

محتوى التكنولوجيا

يستخدم جهاز Strivak تقنية شفط قوية يمكن تعديلها وفقاً لبنية الجلد

مزايا الأعمال


- يمكنك الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع حيث تناسب جميع الأجناس رجال ونساء
- يمكنك عمل تطبيق مريح مع نظام العناية بالبشرة هذا الذي لا يعاني من أي مضاعفات تقريباً
- إنها طريقة احترافية تعطي نتائج تصل إلى 80% حتى في الجلسة الأولى من خلال زيادة مجموعة خدماتك ، ستكون متقدماً على منافسك بخطوة واحدة
- يمكنك زيادة رضا العملاء من خلال توفير حل لهذه المشكلة الحساسة بشكل عام
- ميزة تصميم مريح ومحمول
- استخدام سهل وعملي بفضل رأسه الصغير والخفيف. إمكانية كفاءة عالية بتكلفة منخفضة

الفوائد التي تعود على المستخدم النهائي

- وقت معالجة قصير مع فرصة تطبيق سريعة وفعالة
- يزيد من تغذية البشرة بالمنتجات المستخدمة
- يوفر الراحة النفسية والجسدية
- إمكانية إجراء العملية دون الحاجة إلى أي تدخل جراحي
- فرصة لمواصلة الحياة اليومية بعد إجراء

المواصفات الفنية

41 * 124 * 50 CM	الحجم
220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
10 KG	الوزن
VAKUM	نظام العمل
ابيض	اللون
1	عدد الروؤس
راس STRIVAK	الروؤس المستخدمة

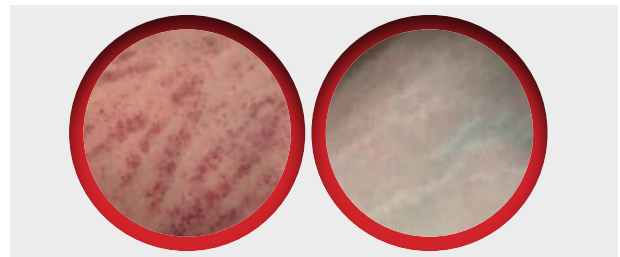



تكنولوجيا لمساعدتك على العلاج المناسب
جهاز تحليل الجلد



مزايا الأعمال

يمكن اكتساب رضا المريض وثقته من خلال إجراء التشخيص المسبق وتحليل ما بعد العلاج وقياس نجاح الإجراء

من خلال تحليل الجلد ، يمكن تقديم توصيات أكثر دقة للمنتج

يمكن تقديم النتائج الناجحة من خلال الكشف عن تحليل ما قبل التطبيق

تحديد العلاج المناسب قبل وبعد الإجراء

يمكن مقارنة صور وجه العميل قبل وبعد العناية بالبشرة. يمكن قياس نجاح العلاج بالصور التي تم

التقاطها قبل وبعد الإجراء. ميزة تصميم مريح ومحمول

كفاءة عالية بتكلفة منخفضة

الفوائد التي تعود على المستخدم

عملية سريعة ومريحة

زيادة معدل نجاح الإجراء المطلوب إجراؤه من خلال توفير التشخيص الصحيح

عبارة عن محلل جلدي يستخدم لعرض الأنسجة تحت الجلد ، بهدف المساهمة في تشخيص الرعاية الأولية وقياس معدل نجاح عملية ما بعد العلاج باستخدام نظام المرآة السحرية باستخدام ميزة الصورة الرقمية ، وذلك بفضل ما يصل - التقنيات الحديثة مثل RGB وUV

مبدأ العمل

تقوم VISO Care بإنشاء صورة رقمية مفصلة للوجه بمساعدة نظام المرآة السحرية ومعدات الإضاءة بالداخل والتشغيل المتزامن للعديد من الكاميرات عالية الدقة. بهذه الطريقة ، يتم إجراء العديد من التحليلات مثل البقع والتجاعيد ومعدل رطوبة الجلد والدهون والتصنيع

محتوى التكنولوجيا


نظام محلل الماسح الضوئي للجلد عبارة عن تقنية متقدمة لتحليل الصور تستخدم أنظمة الصور الرقمية من خلال طيف UV و RGB

جودة صورة عالية الدقة - نظام ANDROID تقنية الأشعة فوق البنفسجية - جودة صورة RGB



المواصفات الفنية

220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
: 42 * 36 * 56 CM	الحجم
8 KG	الوزن
10.1 ING	مساحة الشاشة
HD	جودة الصورة
RGB	جودة التلوين
تحليل الجلد	نظام العمل
20 SN	سرعة تحليل
التركيبة	اللغات المستخدمة
ابيض	اللون
عملك UV	تقنية العمل
%95	معدل الدقة
SOFTSILIKON	مسند الذقن ، مادة البرسيم

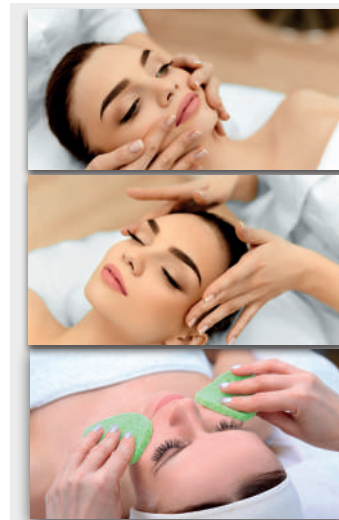

نتائج ناجحة مع كشف تحليل ما قبل التطبيق

توصيات المنتج مع تحليل الجلد

الكشف عن العناية المناسبة قبل وبعد الإجراء



شد الجلد بتقنية الموجات فوق الصوتية



HD Focus 4D هو جهاز للتحلية بالبشرة يمكنه إجراء شد الجلد بتقنية الموجات فوق الصوتية التي تصل إلى الأنسجة تحت الجلد دون أي إجراء جراحي ، مع تقنية الموجات فوق الصوتية المتقدمة ورووس مختلفة لكل منطقة

تقدم تقنية **HD Focus 4D** مزايًا تقنية شد الوجه والجلد ، وهي طريقة شائعة للتحلية بالبشرة مع تجربة مريحة وفعالة دون الحاجة إلى أي إجراء جراحي

مبدأ العمل

مع تقنية **HD Focus 4D New Generation** تصل إلى الأنسجة تحت الجلد وتركز الطاقة الحرارية مباشرة على المنطقة المطلوبة باستخدام نظام الموجات فوق الصوتية. وبهذه الطريقة ، فإنه يحفز الطبقة المنطقية من الجلد على تجديددها. ونتيجة لذلك ، فهو يحسن ملمس البشرة ويقلل من ترهلها ويمنحها مظهرًا ناعمًا وجماليًا

محتوى التكنولوجيا

يحتوي **HD Focus 4D** على جيل جديد من تقنية الموجات فوق الصوتية **4D** برووس مختلفة بمعدل تردد 4 ميجا هرتز مناسب لكل منطقة. غطاء 3.0 مم - الوجه بالكامل باستثناء محيط الشفة أسفل الذقن والذقن أربع ونصف ملم، 6 مم الرأس منطقة الصدر والانتصاب

ثلاثة عشر ملم رأس - تحت الإبط ، ربله الساق وخارجها

سنة عشر ملم رأس - تنلي الذراعين والوركين على الساقين والربلة الداخلية والخارجية

مزايا الأعمال

إنه يوفر كفاءة عالية بتكلفة منخفضة

ميزة تصميم مريح ومحمول

إنه يوفر الفرصة للتطبيق على منطقة واسعة برووسها المتغيرة. سهل الاستخدام بفضل رأسه الصغير والخفيف

يخلق تأثير شد حتى في تطبيق واحد

الوقت الذي تعود على المستخدم

شد الجلد بدون أي تدخل جراحي

إمكانية الاستمرار في الحياة اليومية بعد العملية

فرصة لإزالة الدهون والسيلوليت من خلال عملية سريعة ومريحة

المواصفات الفنية

220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
31 KG	الوزن
56 * 36 * 67 CM	الحجم
ULTRASON	نظام العمل
رמדי	اللون
رأس HD FOCUS	الرووس المستخدمة
0 - 55 °C	درجة حرارة التشغيل
LIFTING	الغرض من الاستخدام
1.5 / 3.0 / 4.5 / 6.0 / 13 / 16 MM	الخرائط المستخدمة
عشرين لف ضربة	الخرائط المستخدمة

ECO HIFU

شد الوجه والجلد بدون جراحة



إنه جهاز للتحلية بالبشرة يمكنه إجراء تطبيقات غير جراحية لشد الوجه والجلد باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية المركزة وعناوين خاصة لكل منطقة. تهدف إلى توسيع البشرة وجعلها تبرز أصغر سنًا وتقلل آثار الشيخوخة على الجلد ، والتي لا تتغير بأنها جاهزة لراحة شد الوجه ، ولكنها غير جراحية وتسمى إلى الراحة لكل هذه الرغبات. إنها خيار مثالي للأشخاص

مبدأ العمل

مع التكنولوجيا التي يحتوي عليها ، يقوم **Eco HIFU** بتركيز الطاقة الحرارية على الأنسجة تحت الجلد بموجات فوق صوتية على المنطقة المراد علاجها ، ويحفز ويحدد الطبقة المنطقية من الجلد بشكل مباشر. ونتيجة لذلك ، فهو يحسن ملمس البشرة ويقلل من ترهل الجلد ويمنح البشرة مظهرًا أكثر شبابًا وراحة. يوفر توتر الجلد عن طريق زيادة تخليق الكولاجين باستخدام **Eco HIFU** وبهذه الطريقة ، يتم توفير شد الوجه والجلد بشكل طبيعي دون فترة نقاهة

محتوى التكنولوجيا

تمتلك **Eco HIFU** جيلًا جديدًا من تقنية الموجات فوق الصوتية مع 5 رووس مختلفة مع نطاق تردد من 4 ميجا هرتز إلى 7 ميجا هرتز مناسبة لكل منطقة. تصل كل خرطوشة من آلة **Eco Hifu** إلى أكثر من 10000 نبضة

فرقة 1.5 مم - محيط العين والجبهة فرقة 3.0 مم -
الذقن وتحت الذقن فرقة 4.5 مم - فرقة 8.0 مم -
الذراع والسررة والساق فرقة 13 مم

مزايا الأعمال

كفاءة عالية بتكلفة منخفضة

ميزة تصميم مريح ومحمول

فرصة تطبيق واسعة مع رووس قابلة للتبديل. استخدام سهل وعلمي بفضل رأسه الصغير والخفيف

الوقت الذي تعود على المستخدم

لا تتطلب أي تدخل جراحي

شد الجلد

إمكانية الاستمرار في الحياة اليومية بعد الإجراء

يحسن نوعية الحياة من خلال ميزة شد الجلد

المواصفات الفنية

220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
31 KG	الوزن
56 * 36 * 67 CM	الحجم
ULTRASON	نظام العمل
رמדי	اللون
رأس HD FOCUS	الرووس المستخدمة
يخرج إلى 65 °C	درجة حرارة التشغيل
LIFTING	الغرض من الاستخدام
1.5MM, 3MM, 4.5MM	الخرائط المستخدمة
الموجات فوق الصوتية	تقنية العمل

FraxiHD

تطابق مذهل بين الإبر الدقيقة وتقنيات التردد RF



يعتبر **FRAXI HD** مزيجًا مثاليًا من تقنية **micro-Needling** و **RF** وهو جهاز مثالي يساعد على تجديد شباب البشرة من خلال تركيز طاقة **RF** بدقة مباشرة في منطقة معينة من الجلد باستخدام إبر دقيقة طيوة التردد. الميزة التي تتميز **FRAXI HD** عن التطبيقات القائمة على الليزر هي العملية ووقت النتيجة

وساعد على زيادة إشراق البشرة وخاصة منطقة الوجه وأيضاً على تقليل ندبات حب الشباب والعيوب. مع **FRAXI HD** يمكن الحصول على نتائج ناجحة في ندبات حب الشباب والتجاعيد والبقع الجلدية والتشققات

مبدأ العمل

يهدف إلى مساعدة الجلد على ترميمه وتجديده عن طريق فتح ثقب صغيرة في الجلد باستخدام إبر دقيقة. تعمل طاقة الترددات الراديوية المعقدة تحت الجلد على تنشيط الجلد وتبني الخلايا التالفة ، يتم تحسين ألياف الكولاجين واستعادة الجلد وتشدده بالإضافة إلى ذلك ، من خلال تحفيز تخليق الكولاجين بتأثير الحرارة ، يتم إصلاح الجلد وتجديده بمرور الوقت

محتوى التكنولوجيا

Fractional RF هو تقنية رفع حيث يمكن أن تعمل أنظمة الإبرة الدقيقة وترددات الراديو في وقت واحد وتوفر التحفيز عن طريق إعطاء حرارة تحت الجلد مع أغشية مناسبة لأصابع مختلفة من الجلد

مزايا الأعمال

كفاءة عالية بتكلفة منخفضة

ميزة تصميم مريح ومحمول

ميزة التطبيق الفعال مع العناوين القابلة للتطبيق لكل منطقة استخدام سهل وعلمي بفضل رأسه الصغير والخفيف

الوقت الذي تعود على المستخدم

شد السلام بدون أي تدخل جراحي

إمكانية الاستمرار في الحياة اليومية بعد العملية

يساعد على تجديد شباب الجلد بإجراء سريع ومرح

يحسن نوعية الحياة من خلال ميزة شد الجلد

المواصفات الفنية

43 * 35.4 * 26 CM	الحجم
220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
15 KG	الوزن
تجديد الجلد	نظام العمل
ابيض	اللون
رأس FRAXI HD	الرووس المستخدمة
إبرة 10/25/64	أنواع الخراطيش
8 ايج لمس	الثبات
RADYO FREKANS	تقنية العمل
يصل إلى 65 درجة	درجة حرارة التسخين

Aqua Peeling

H₂O₂

التجميل التي انت بل ماء هي صغير ولكن عملها كبير




عناية الجلد 4+1



عناية الجلد 8+1



عناية الجلد 12+1

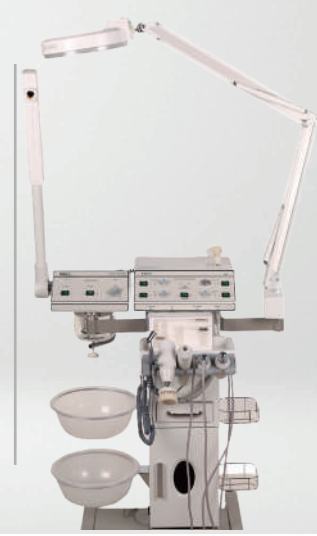

Aqua Peeling

عبارة عن جهاز كامل الوظائف للعناية بالبشرة ، كل منها مزود ببرؤوس تقنية مختلفة (التقشير المائي ، التقشير بالموجات فوق الصوتية ، الترددات الراديوية ، الرن ، السلس ، العلاج بالموجات فوق الصوتية) بهدف العناية بالبشرة وتنظيف البشرة بشكل عام

مبدأ العمل

يسمح H₂O Aqua Peeling بعلاجه العديدة المختلفة ، بإجراءات مثل تطهير المسام ، وإزالة الرؤوس السوداء ، وشد المسام ، وتقوية نسيج البشرة وبنيتها ، وتحقيق توازن لون البشرة وإزالة التجاعيد الدقيقة من أجل رعاية فعالة وموثوقة للبشرة

محتوى التكنولوجيا

Aqua Peeling : إنه تطبيق رعاية جيل جديد ينظف بعمق ويزيل خلايا الجلد الميتة والرؤوس السوداء ، مع توفير الرطوبة التي تحتاجها بشرتك بخوي التطبيق على تأثير مسدود للشيخوخة يجعل البشرة تلمع بشكل مشرق بعد عملية منشطة
Ultrasonik Peeling : إنها طريقة فعالة لتقشير الجلد تضمن إزالة الخلايا الميتة من الجلد عن طريق سلسلة من الموجات الصوتية. تسمح الموجات الصوتية الناتجة للجلد بالتحلل من المواد الغريبة والسوم ويقاها مستحضرات التجميل في أعمق جزء من المسام
Radvofrekans : يساعد على شد الطبقة السفلية من الجلد عن طريق تسخينه ، وفتح التجاعيد الدقيقة ، وتجميع الفك ، وتقليل التجاعيد والخطوط الألفية ، وزيادة إنتاج الكولاجين والحصول على بشرة مشدودة
Sprey : بفضل الأنيون الموجود في رأسه ، فإنه يضمن توزيع المنتجات مثل المنشط والمصل والفيتامينات التي تستخدمها للعناية بالبشرة بالتساوي على الجلد بطريقة مضغوطة

Smooth Terapi : بفضل محرك التبريد التوري ، يتم استخدامه لتخفيف احمرار الجلد في نهاية جميع التطبيقات وتخفيف التهاب الجلد عن طريق إرخاء الجلد
Ultrason : يتم استخدامه لنقل الأحماض والفيتامينات التي تحتاجها بشرتنا إلى الطبقة السفلية من الجلد بواسطة الموجات الصوتية فوق الصوتية

مزايا الأعمال

يزيد من تنوع الإجراءات في قسم العناية بالبشرة الخاص بك مع تكلفة شراءه

يوفر توفيرًا مع فرصة إجراء العديد من العمليات المختلفة على جهاز واحد

ميزة تصميم مريح ومحمول

سهل الاستخدام بفضل الرؤوس الصغيرة والخفيفة

الفوائد التي تعود على المستخدم

إمكانية الاستمرار في الحياة اليومية بعد العملية

يحسن نوعية الحياة من خلال ميزة شد الجلد

إنه يوفر تطهيرًا عالي الجودة وفعالًا للبشرة

تطبيقات العناية بالبشرة التي توفر تأثيرًا نظيفًا ونظيفًا وحيويًا وسلسًا ومشرقًا مع الاستخدام اليومي

المواصفات الفنية

220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
PMAX: 350 W	القدرة
10 KG	الوزن
46 * 30 * 43 CM	الحجم
استبيك جلد	تقنية العمل
ابيض	اللون
لمس 7 انج	الشاشة
رأس فراغ ، رأس بالموجات فوق الصوتية تنظيف : بارد وسخن-رأس رأس بخاخ رأس جهاز	الرؤوس المستخدمة

جهاز متعدد الوظائف للعناية بالبشرة

أجهزة العناية بالبشرة هي أجهزة تسمح بتطبيق العديد من التقنيات المختلفة المطلوبة للعناية بالبشرة ، ببرؤوس ذات وظائف مختلفة

وظيفة جهاز العناية بالبشرة 4 + 1

1.Buhar / 2. Ozon / 3. Loop / 4. Frimatör / 5.High Frekans

وظيفة جهاز العناية بالبشرة 8 + 1

1.Buhar / 2. Ozon / 3. Loop / 4. Frimatör / 5.High Frekans / 6.Vacuum / 7.Sprey / 8.Iyontoforez / 9.

Lifting

وظيفة جهاز العناية بالبشرة 12 + 1

1.Buhar / 2. Ozon / 3. Loop / 4. Frimatör / 5.High Frekans / 6.Vacuum / 7.Sprey / 8.Iyontoforez /

9.Lifting / 10. Hot Cabi / 11. Wood Lamp / 12.Steril Box / 13. Loop

مزايا الأعمال

إنها معدات موصى بها للاستخدام في صالونات التجميل بأقلها الرطوبة العديدة باستخدام هذا الجهاز حيث يمكنك إنشاء تطبيقات تكميلية وجانبية ،

يمكنك زيادة مجموعة الخدمات وكفاءة عملك

الخصائص التقنية للجهاز

Voltaj: 110-220V / Frekans: 50Hz/60Hz / POWER: 950 W / size: 150x 48x 43cm / weight : 25-35kg



BIG SHAPER

جدد مع التكنولوجيا المبتكرة
يعطي BIG SHAPER نتيجة واضحة
المناطق المستهدفة منطقة الذراع - منطقة البطن - السيلوليت



هو حيل جديد من أجهزة التخسيس الإقليمية التي تهدف إلى القضاء على مظهر السيلوليت أو البرتقالي من خلال 4 تقنيات مختلفة مثل طاقة الأشعة تحت الحمراء والفراغ وتردد الراديو ونظام التدليك الميكانيكي. إنه الخيار المثالي لتشكيل الجسم أو تنعيمه أو تنعيمه

مبدأ العمل

تعمل طاقة الأشعة تحت الحمراء على تسخين سطح الجلد وتنشط آلية التجديد الذاتي للبشرة بعد أن تصل الحرارة إلى عمق 3 مم يساعد التدليك الميكانيكي وتقنية التفريغ على تقليل الترابط بين الأنسجة المشدودة التي تخلق مظهر السيلوليت من خلال تنشيط الأنسجة تحت الجلد. من ناحية أخرى ، تزيد عملية التدليك الميكانيكي من فعالية تقنية التفريغ

محتوى التكنولوجيا

تدعم طاقة الأشعة تحت الحمراء ورأس التفريغ إنتاج الكولاجين عن طريق تسخين الأنسجة تحت الجلد والمساعدة في التخفيف عن طريق تحريك طبقة الدهون بتقنية راس VAKUM رأس الكبير يساعد في الشد والتخسيس من خلال القضاء على ظهور السيلوليت في منطقة الفخذ والساق والبطن بفضل بكراته الفراغية والميكانيكية رأس صغير: يساعد على الانتعاش والشد بفضل الفراغ والأسطوانة الميكانيكية في مناطق الذراع رأس املس: يساعد على شد الجلد واستعادته عن طريق إزالة التجاعيد مع تأثيره المضاد للشيوخوخة

مزايا الأعمال

يقدم خدمة العناية بالجسم المشتركة دون شغل مساحة كبيرة على منصة واحدة. إجراء غير مؤلم إنه يوفر سهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح ورؤوسه خفيفة الوزن وشاشة اللمس الرقمية الذكية

مع وجود قضيب مؤهل ، يكون له آثار جانبية قليلة جدًا لا يوجد لها آثار جانبية إذا استخدمت من قبل خبير يوفر الوقت مع المعالجة الفعالة في وقت قصير يمكن تطبيقه على كل من الرجال والنساء

الفوائد التي تعود على المستخدم

تطبيق غير مؤلم ومريح إمكانية الاستمرار في الحياة اليومية بعد الاجراء إمكانية التطبيق الفعال في جميع الفصول يقضي على الوقت الذي تقضيه في الصالات الرياضية بتأثير التدليك يوفر الراحة في الجسم ويخفف من التعب

المواصفات الفنية

50 * 122 * 55 CM	الحجم
220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
57.5 KG	الوزن
10.4 شاشة لمس	الشاشة
التركية او انكليزية	اللغات المستخدمة
لبلكي باقي اللون اختياري	اللون
4	عدد الرؤوس
تردد الراديو ، الفراغ ، الموجات فوق الصوتية ، الصمام	تقنية العمل
850 NM	نطاق الضوء
الوجه والجسم	المناطق المستخدمة





مع MAGIC SOUND في الجلسة الأولى من 2-10 سم
تستطيع ان تتحف اقليميا



مزايا الأعمال

هو جهاز تنحيف إقليمي يهدف إلى التدخل المباشر في الدهون الموضعية المستعصية مثل البطن والوركين والساقين والذراعين والخصر والظهر باستخدام الموجات فوق الصوتية ، ويوفر ترقق من خلال خلق تأثير التجزئة في الخلايا الدهنية مع الموجات فوق الصوتية

مبدأ العمل

يتم إرسال الموجات الصوتية إلى الأنسجة الدهنية باستخدام جيل مما يساعد على تكسيروها ، وفي نفس الوقت تقليل الخلايا الدهنية المتكسرة والسماح للجسم بالترقق والشد ، مما يساعد على القضاء على ظهور السيلوليت إلى حد كبير

محتوى التكنولوجيا

راس كبير 1.1 ميغا هرتز: يوفر ترقق والقضاء على الدهون في المناطق غير المرغوب راس صغير 04 كيلو هرتز: يوفر شداً دون إتلاف الأنسجة الدهنية في مناطق الترهل

بفضل الطول الموجه المستخدم ، لا يوجد خطر من الآثار الجانبية لأن الأنسجة الأخرى لا تتضرر أثناء التطبيق ينطبق على النساء والرجال

له تأثير إيجابي على مرضى من خلال توفير نتيجة واضحة خلال 15 يوماً يعطي نتائج دائمة عند دعمه بالرياضة والنظام الغذائي

من خلال اجراء مدة الزمنية قصيرة الامد تستطيع ان توفر من الوقت

انه يوفر سهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح ورأسه الخفيف الوزن وشاشة اللمس الرقمية الذكية

الفوائد التي تعود على المستخدم

تطبيق غير مؤلم ومريح

إمكانية الاستمرار في الحياة اليومية بعد الاجراء

سهولة الوصول إلى الشكل المطلوب في وقت قصير دون الحاجة إلى اجراء جراحي

ترقق من 2 إلى 10 سم من الجلسة الأولى

يوفر حلاً دائماً عند دعمه بالرياضة والنظام الغذائي

المواصفات الفنية

41 * 124 * 64 CM	الحجم
220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
29 KG	الوزن
10.4 شاشة لمس	الشاشة
اختياري التركيبة اونكليزية	اللغات المستخدمة
الموجات فوق الصوتية	نظام العمل
الأرجواني الداكن	اللون
2	عدد الرؤوس
40 KHZ - 1.1 MHZ	ترددات الراس
راس 40 كيلو هرتز-1.1 ميغا هرتز	الرؤوس المستخدمة



BIGFIT

وداعا للدهون الإقليمية مع BIG FIT



ما هو BIG FIT

تم تطويره وإنتاجه من قبل شركتنا تستخدم لتخفيف الموضعي وهو ينتج جيلاً جديداً من منطقة واسعة غير جراحية والتي تستهدف مناطق المشاكل التي لا يمكن للنظام الغذائي والتمارين الرياضية الوصول إليها عن طريق تطبيق الموجات الصوتية وفوق الصوتية في أوضاع منخفضة وعالية. هو جهاز يستخدم في مجال التجميل تستخدم في الوجه والجسم

مبدأ العمل؛

يتم تقسيم الأنسجة الدهنية إلى جزيئات صغيرة يمكن إزالتها بسهولة (التخلص منها) يسمح للمشغل بتحقيق طاقة ثابتة مع تأثير حراري منخفض (1-3 ميجا هرتز و 40 كيلو هرتز) العلاج (موجات الضغط عالي التردد) بفضل موجات الضغط التي تنشط رواسب الدهون الزائدة، يحفز التردد الكلي BIG FIT عملية التمثيل الغذائي الخلوي من خلال زيادة درجة حرارة الأنسجة

تناسب كبير قبل وبعد الإجراء

لكي تكون تطبيقاتك أكثر فعالية، يجب أن تشرب الكثير من الماء قبل وبعد التطبيق بعد العلاج، يوصى بإجراء تدليك لمفاوي أو أخذ علاج حراري لتحقيق أقصى قدر من النتائج وقت التمرين - التدرجات هي جلسات 30 دقيقة. يمكنك رؤية النتائج بعد جلسة واحدة ومع ذلك، فمن المستحسن أن تكون سلسلة من 6-12 جلسة

المزايا التي تميز Big Fit عن تقنيات النظراء الأخرى

يصل إلى أعماق الخلايا الدهنية بثلاثة نطاقات تردد مختلفة (40 كيلو هرتز، 1 ميجا هرتز، 3 ميجا هرتز) بفضل هذه الميزة، فإنها توفر الفرصة لجذب 100٪ من الزبائن

ما هي النتائج المستهدفة من تطبيق Big Fit

فقدان الوزن تسلسليا
تقليل ترسبات الدهون الموضعية
تقليل السيلوليت
أكسجين الأنسجة

المواصفات الفنية

41 * 123 * 70 CM	الحجم
220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
29 KG	وزن
لمس 10.4	الشاشة
التركية أو انكليزية	اللغات المستخدمة
الموجات فوق الصوتية	نظام العمل
أزرق كحلي	اللون
4	عدد الرؤوس
: 40 KHZ, 1.1 MHZ, 3 MHZ	ترددات الرأس
الموجات فوق الصوتية	تقنية العمل
الوجه والجسم	المناطق يمكن تطبيقها



SHAPE SCULPTURE

لنتائج مبهرة في المراجعة الإقليمية
نحت الشكل هو تقنية تحفيز إقليمية مشتركة
مفضلة للغاية من قبل المراكز المرخصة



هو جهاز تحفيز إقليمي مثالي برأسه المصممان خصيصًا ، الكبير والصغير ، بتقنيته التي يمكنها تبريد الخلايا الدهنية غير المرغوب فيها في مناطق الجسم وجعلها غير فعالة. في الأساس ، يبرد الدهون في الجسم ويضمن تدهور تغذية الدهون

مبدأ العمل

يبرد الخلايا الدهنية الزائدة غير المرغوب فيها المتكونة في أجزاء مختلفة من الجسم ويجعلها معطلة. تتحلل الخلايا الدهنية التي تتفقد وتطيقها وتفرز بالطرق المفاوية. يتم الانتهاء من هذه العملية بطريقة سريعة وصحية وخاضعة للرقابة ويتم تحقيق التخفيف الإقليمي

محتوى التكنولوجيا

راس الكبير: يجعل الدهون غير فعالة عن طريق التبريد غير الجراحي للمناطق التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون (الوركين والبطن والوركين والعجول)

راس الصغير: يبرد المناطق السفلية من الدهون (النراعين والظهر والخصر) بشكل غير جراحي ويجعلها غير فعالة

مزايا الأعمال


يمكن أن يوفر تأثيرًا مرئيًا حيث أن له تأثيرًا مخفضًا على الخلايا الدهنية إنه يوفر سهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح ورأسه الخفيف الوزن وشاشة اللمس الرقمية الذكية مع مستخدم خبير ليس له أي تأثير جانبي بفضل رأسه الكبير والصغير ، فإنه يوفر سهولة في التطبيق حسب المنطقة يفضل استخدامه في جميع الفصول ينطبق على الرجال والنساء

الفوائد التي تعود على المستخدم

إمكانية الاستمرار في الحياة اليومية بعد الاجراء يوفر راحة عالية مع اجراء غير مؤلم إمكانية تصغير الخلايا الدهنية في وقت قصير دون الحاجة إلى اجراء جراحي والوصول إلى الشكل المطلوب يوفر رقيقًا بمقدار 2-10 سم من الجلسة الأولى امكانية التطبيق في جميع الفصول لا يؤدي الأنسجة الأخرى أثناء التطبيق

المواصفات الفنية

54 * 120 * 64 CM	الحجم
220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
59 KG	الوزن
10.4 شاشة لمس	الشاشة
التركيبة أو الانكليزية	اللغات المستخدمة
VAKUM وحرارة تبريد	نظام العمل
اسود	اللون
راس VAKUM كبير وصغير	الروؤس المستخدمة

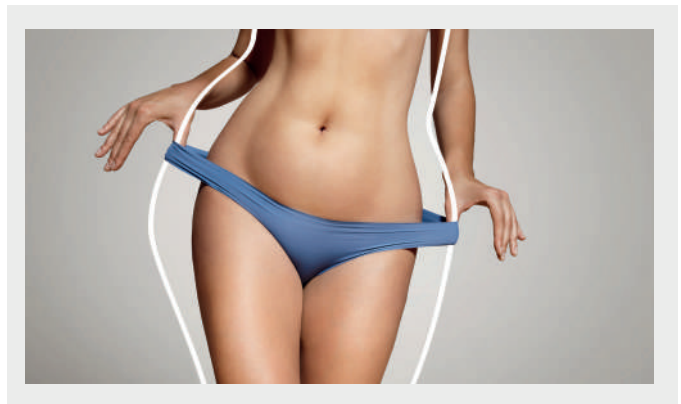

Hobraz

حل فعال في التنحيف الإقليمي
تقنية الترددات الراديوية تمنع الترهل ويحد من النحافة ويشد



هو جهاز تنحيف إقليمي تم تطويره بواسطة **Mormed Group** باستخدام تقنية RF في 3 عناوين

مختلفة. تساعد طاقة RF على إنتاج الكولاجين من خلال العمل تحت الجلد. وبهذه الطريقة يتم إعادة تشكيل أنسجة الجلد وتساعد على ترقيقها وشدها من خلال التأثير على الطبقة الدهنية

مبدأ العمل

بينما تساعد طاقة الترددات الراديوية على زيادة حرق الدهون وإنتاج الكولاجين ، فإنها تعمل أيضًا على تسريع الدورة الدموية ، مما يؤدي إلى فقدان مرونة الجلد ويشده في تطبيقات التردد الراديوي ، يتم تنشيط جزيئات الماء في الخلايا وتصل إلى الخلايا الدهنية بمستوى مرتفع من الماء وتساعد على إذابة الأنسجة الدهنية

محتوى التكنولوجيا

راس **Lifting**: يساعد في تقليل التجاعيد والترهلات في منطقة العنق والذقن والخد والجبين
راس **ثلاثي الأقطاب**: يخترق الجلد بشكل أعمق ويؤثر على طبقة الدهون ويساعد على ترقيقها
راس **متعدد الأقطاب**: يساهم في الشد من خلال المساعدة على إذابة الدهون في الجسم وتسريع إنتاج الكولاجين

الفوائد التجارية

إمكانية التطبيق غير الجراحي
يوفر إجراءً مريحًا وغير مؤلم
يعود الشخص إلى حياته اليومية الروتينية بسرعة
مساحة تطبيق واسعة بجهاز واحد
إنه يوفر سهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح ورأسه الخفيف وشاشة اللمس الرقمية الذكية
يقلل من احتمالية حدوث مضاعفات مع ممارس مؤهل

الفوائد التي تعود على المستخدم

إمكانية الاستمرار في الحياة اليومية بعد الإجراء
يوفر راحة عالية مع إمكانية إجراء غير مؤلمة
يتم تحقيق الشكل المطلوب في وقت قصير دون الحاجة إلى إجراء جراحي
أوقات جلسات قصيرة مع معالجة سريعة

RF تأثير في تنعيم البشرة

المواصفات الفنية

الحجم	60*112*55 CM
قيم العمل الكهربائي	220 - 240 v / 50 - 60 HZ
الوزن	38 KG
الشاشة	10.4 شاشة لمس
اللغات المستخدمة	التركية او الانكليزية
نظام العمل	RADYO FREKANS
اللون	رمادي
الروؤس المستخدمة	LIFTING
عدد الروؤس	3



Hobraz_{plus}

دع HOBRAZ PLUS تشكل جسمك



وهو مزيج فريد من تقنيات أنظمة الطاقة RF ونظام Vakum ، هو جيل جديد من أجهزة التخسيس الإقليمية التي تهدف إلى تقليل الدهون البينية وتنعيم البشرة

مبدأ العمل

تهدف طاقة الترددات RF إلى تقليل الدهون البينية وتسريع الدورة الدموية باستخدام تقنية نظام Vakum وبهذه الطريقة ، يساعد الجلد على استعادة مرونته المفقودة عن طريق تقليل ظهور السيلوليت ، وتنعيم البشرة


محتوى التكنولوجيا

هي تقنية تم تطويرها من خلال الجمع بين طاقة التردد RF ونظام Vakum ، بهدف تمكين أعلى مستوى من كفاءة التشغيل

مزايا الأعمال


إمكانية التطبيق غير جراحي
يوفر إجراءً مريحًا وغير مؤلم
يعود الشخص إلى حياته اليومية الروتينية بسرعة
مساحة تطبيق واسعة بجهاز واحد
إنه يوفر سهولة في الاستخدام بفضل تصميمه المريح ورأسه الخفيف الوزن وشاشة اللمس الرقمية الذكية مع ممارس مؤهل ، تقل احتمالية حدوث مضاعفات

الفوائد التي تعود على المستخدم
إمكانية الاستمرار في الحياة اليومية بعد العملية دون انقطاع
يوفر راحة عالية مع إمكانية إجراء عملية غير مؤلمة
فرصة الوصول إلى الشكل المطلوب في وقت قصير دون الحاجة إلى إجراء جراحي
يمكن أن توفر فحص 2-10 سم من الجلسة الأولى
أوقات جلسات قصيرة مع معالجة سريعة

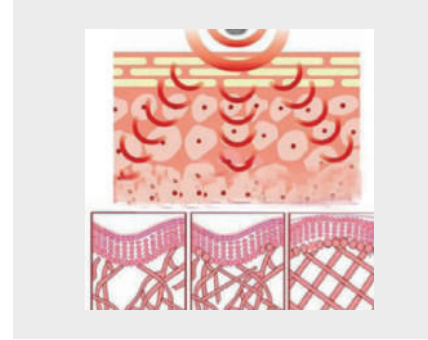


المواصفات الفنية

53 * 108 * 60 CM	الحجم
220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
40KG	الوزن
10.4 شاشة لمس	الشاشة
التركية او الانكليزية	اللغات المستخدمة
VAKUM و RADYO FREKANS	نظام العمل
ذهب	اللون
رأس SMALL, MEDIUM, LARGE	الروؤس المستخدمة
3	عدد الروؤس

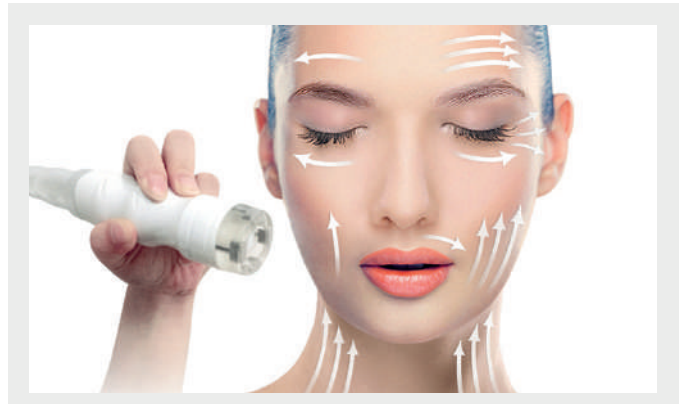

MORENO

تقنية جديدة في التنحيف الإقليمية

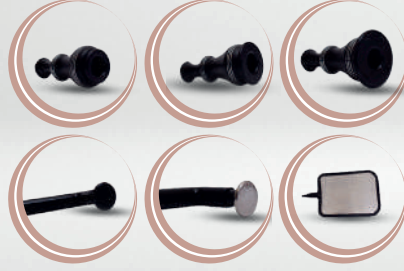

ما هو MORENO هو جهاز تم إنتاجه من قبل شركتنا باستخدام طاقة التردد اللاسلكي RF الوضعين السعويين CET والمقاومة RET ونظام VAKUM الذي يستخدم في التطبيقات الجمالية التي تجذب مساحة واسعة من الجيل الجديد تستخدم في الوجه والجسم بدون تدخل جراحي

رعاية عميقة مع MORENO

الترددات الراديوية (CET، RET) أكثر فاعلية في الأنسجة العميقة من أنظمة الترددات الراديوية متعددة الأقطاب البديلة ، فهي تمر بأمان في جميع أنحاء الجسم ، بالإضافة إلى أن ترددها المحدد يزيد من التحفيز الحيوي ويحترم بشكل كامل فسيولوجيا الخلايا الطبيعية ونتيجة لذلك ، فإن النتائج ليست مرئية ظاهرياً فحسب ، بل يتم إنتاجها بعمق مع تأثيرات طويلة الأمد

علاج العناية العميقة مع MORENO

فهو يرفع درجة الحرارة تدريجياً وبشكل متجانس في أجزاء مختارة من الجسم دون الإخلال بفسولوجيا الخلية ، وبالتالي فهو يوفر تطبيقاً مريحاً وغير جراحي

فترة جلسة MORENO العناية العميقة

يوصى بالعادات الغذائية الجيدة ، وتناول السوائل الكافية والنشاط البدني الخفيف للحصول على أفضل النتائج عادة ما تستغرق عملية الوجه والرقبة 45 دقيقة ، بينما تستغرق معالجة الصدر حوالي 30 دقيقة و 45 إلى 59 دقيقة حسب منطقة الجسم والشخص دواعي الاستعمال واعتماداً على مجالات التطبيق ، قد يتطلب الأمر 5-6 أو 8-10 جلسات يتم تعديل عدد الجلسات حسب احتياجات العميل

استخدام MORENO في مجال استئيك

مكافحة الشيخوخة
يقلل التجاعيد وخطوط التعبير
يحسن مظهر منطقة العين
يقلل من ظهور الانتفاخات تحت العينين
يحسن مظهر الفك -
يقوم بتشكيل وشد ملامح الوجه
العنق والصدر
تجديد شباب الجسم ، والتعافي منه ، وتقليل ظهور السيلوليت

المواصفات الفنية

20*120*85	الحجم
220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
44KG	الوزن
10.4 شاشة لمس	الشاشة
التركية او الانكليزية	اللغات المستخدمة
(CET,RET) RADYO FREKANS	نظام العمل
ذهب	اللون
3	عدد الرؤوس

مراحل نتيجة MORENO للعناية العميقة

يتم الشعور بنتائج علاج للوجه من الجلسة الأولى وتصبح ملحوظة بعد التطبيق الثالث أو الرابع . قد تستغرق علاجات الجسم وقتاً أطول لإظهار التحسن من مؤشر كتلة الجسم (لا يتم تطبيق أي تطبيق على المناطق التي يتم فيها استخدام مواد حشو محقونة) العادات الغذائية الجيدة ، وتناول السوائل الكافية والنشاط البدني الخفيف مفيدة لتحقيق أفضل النتائج

رعاية عميقة مع MORENO

يتم تطبيق تردد الراديو من خلال وضعين للتشغيل: الوضع السعوي يركز بشكل أساسي على الأنسجة الرخوة فوق الجلد ، وهو مناسب للأنسجة السطحية والأوعية الدموية. وضع المقاومة أكثر ملاءمة للقوام السميك والدهون والزيروتيك

هل هناك أي قيود مع Moreno

يمكنك متابعة حياة الاجتماعية دون الحاجة إلى اتخاذ أي احتياطات خاصة بعد الاجراء طاقة التردد الراديوي المعطاة من قبل Moreno غير ضارة لجسم الإنسان والأنسجة البيولوجية ، فليس لها أي آثار جانبية. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد تعاني البشرة الحساسة للغاية من بعض الاحمرار والوخز



مبدأ العمل لجهاز Moreno الجيل الجديد

تستخدم علاجات الوجه والجسم نبضات كهربائية وحرارة لتحفيز إنتاج الكولاجين تخترق الحرارة الطبقات العميقة من الجلد ، والتي يمكن أن تشعر وكأنها إحساس عميق بالحرارة ، بينما يتم تثبيت الطبقة الخارجية من الجلد أثناء العناية لمنع أي ضرر تُستخدم ترددات راديو كولاجين جديدة في الجسم لتفتيت الجيوب العنيدة من الدهون تحت الجلد ، والتي يتم التخلص منها تدريجياً بواسطة نظام التمثيل الغذائي الطبيعي في الجسم يتم تطبيق عناية على الوجه والجسم لشد الجلد عن طريق تحفيز تكوين الكولاجين الجديد يساعد على تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، ويقوي البشرة ويجعلها تبدو أكثر حزماً وثباتاً وصحة من خلال توصيل الحرارة المتحكم بها مباشرة إلى الأنسجة التي تسبب تقلص الكولاجين وتكوين كولاجين جديد



استنبتك الثدي و المؤخرة غير الجراحي
تطبيقات مناسبة ومريحة ب 6 رؤوس مختلفة



هو جبل جديد من أجهزة العناية بالبشرة طورته MORMED Group والذي يهدف إلى حل مشاكل مثل الترهل وفقدان المرونة ، ويسمح بالتطبيق غير المؤلم و غير الجراحي على الصدر والمؤخرة الذي يتضمن علاج بنظام VAKUM وعلاج الضوء وعلاج كهربائي (Ems)

مبدأ العمل

Royal Lift: مع طريقة تطبيق VAKUM ، فإنه يوفر امتصاصاً فعالاً للثدي ، ويوسع الأوعية الدموية ويسرع الدورة الدموية وبهذه الطريقة ، يزيد من معدل إفراز هرمون الثدي في الجسم ويساعد على إضافة الامتلاء والمرونة إلى الثدي يقوي عضلات الصدر من خلال نظام العلاج الكهربائي (EMS) في مشاكل مثل الترهل والتراخي ويساعد على شد الجلد ونفخه عن طريق منع الأنسجة الدهنية باستخدام Ems بينما يوفر مظهرًا أكثر حيوية وامتلاءً فإنه يرتاح أيضًا مع علاج ضوء ، بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة للثدي الصغير ، فإنه يطبق ضغطًا سلبيًا ويجعله أكثر بروزًا بتقنية قوة الشد ثلاثية الأبعاد

محتوى التكنولوجيا

هي تقنية للعناية بالبشرة تستهدف عمليات مثل الرفع ، والنفخ ، والشد ، والتكبير باستخدام تقنيات العلاج بالشفط والعلاج بالكهرباء مع الرؤوس في محتوياتها وخيارات الإعدادات المختلفة
نظام الرفع: يساعد في القضاء على التشنجات مثل الترهل والتخفيف والليونة المفرطة في الثديين تعمل تقنية الشفط على سحب أنسجة الثدي وتمديدتها برفق وفعالية بحيث تضيق الخلايا الممتدة مرونة وثباتًا إلى أنسجة الثدي

نظام التعبئة والشد: الشيخوخة بمرور الوقت ، زيادة الوزن بشكل متكرر ، الولادة ، الرضاعة الطبيعية الاستخدام الخاطئ لحمالة الصدر. يقوم بشد الثديين اللذين فقدتا مظهرهما القديم لأسباب التي ذكرت
نظام التكبير: مع تقنية الشفط المثبتة علميًا للثديين المتخلفين والصغير والمسطحين ، فإنه يعمل على تكبير حجم الثدي بنتائج سريعة وفعالة

مزايا الأعمال

نتائج ناجحة ورضا العملاء العالي مع نظام VAKUM فعال وقوي يمكنك تحقيق كسب كبير من العملاء بسبب حالات عدم الرضا المتعلقة بالثدي ، والتي تعتبر حساسة ومهمة للنساء

عملية أكثر حساسية مع قوة شفط يمكن تعديلها تدريجياً مناسبة لجميع هياكل الصدر بستة رؤوس تفريغ مختلفة الأحجام إنه يوفر فرصة للمعالجة بدون أنسجة ندبة وعلامات تمدد وتشوهات في الصدر ميزة تصميم مريح ومحمول كفاءة عالية بتكلفة منخفضة


من خلال إضافة هذه التكنولوجيا الفائقة ، غير المتوفرة في كل الأعمال ، إلى محفظتك ، يمكنك تمييز نفسك عن منافسيك

الفوائد التي تعود على المستخدم

يساهم في تحسين جودة الحياة من خلال القضاء على عدم الرضا عن الصدر إنه فعال في شد ورفع المؤخرة إنه يوفر الوقت مع ميزة التطبيق السريع ونتائج العملية الفعالة فرصة تطبيق مريحة وغير مؤلمة فرصة لمواصلة التدفق اليومي لحياثك بعد الإجراء يمنح الثقة بالنفس مع المظهر الجمالي الذي يوفره تأثير مرني بعد الجلسة الأولى

المواصفات الفنية


46*38*68 CM	الحجم
220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
24KG	الوزن
10.4 شاشة لمس	الشاشة
التركية او الانكليزية	اللغات المستخدمة
التقنيات الكهربائي VAKUM	نظام العمل
اسود	اللون
6	عدد الرؤوس
رأس ROYAL LIFT	الرؤوس المستخدمة

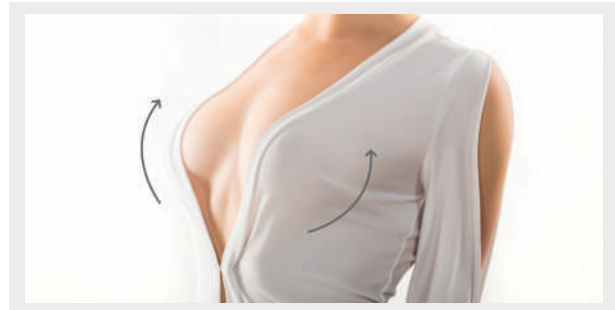

BIG MAG

مفهوم جديد في حرق الدهون والتخفيف

زيادة كتلة العضلات
لا توجد أشكال غير جراحية لتشكيل الجسم
التقليل من الدهون حول البطن مناسبة للرجال والنساء تنتج
تدوم طويلاً

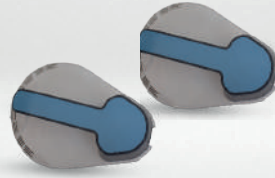

نتائج BIG MAG

يتم الحفاظ على التأثيرات المرئية للعلاج HI-EMT / HIFEM جيداً طالما يتم الحفاظ على نظام غذائي جيد والحفاظ على الوزن
أظهرت الدراسات التي أجريت على العملاء الذين يتلقون علاج HIFEM أن العضلات تحتفظ بحجمها وقوتها المتزايدة حتى
بعد عام واحد. هذا هو عكس نظام الإدارة البينية ، حيث تكون التأثيرات مؤقتة

استهداف العضلات باستخدام BIG MAG

عضلات البطن

عضلات الألية في الورك
عضلات الفخذ والكف

الخلاصة: HIEMT / HIFEM جيداً في تقوية قلب العضلات. الدراسات أيضاً كاملة
أظهر زيادة في نمو عضلات البطن لدى العملاء بعد العلاج. مستويات الرضا العامة جيدة جداً لعلاج جميع مجموعات العضلات ،
خاصة في منطقة الورك النتيجة قصير جدا

توجد قيود مرتبطة بإجراء BIGMAG ويمكن للمرضى متابعة جميع أنشطتهم اليومية العادية

مع BIGMAG

أظهرت الأبحاث التي أجريت على تدريب العضلات عالي الكثافة أن تفاعل تدمير الدهون (تحلل الدهون) يحدث في الدهون الموجودة
بجوار العضلات المتقلصة. تم العثور على علاج HIFEM يؤثر في وقت واحد على الدهون والعضلات تحت الجلد عن طريق
زيادة التمثيل الغذائي للدهون بطريقة مماثلة. أظهرت فحوصات العملاء بعد علاج HIFEM انخفاضاً في الدهون وزيادة في
حجم العضلات. هذه التغييرات في تقليل الدهون تدوم طويلاً طالما يحافظ العميل على وزنه من خلال نظام غذائي جيد وممارسة
التمارين الرياضية بانتظام. أظهرت الدراسات انخفاضاً في الدهون وزيادة في العضلات حول البطن

HI-EMT/HIFEM

HI-EMT/HIFEM (High Intensity Focused Electromagnetic) إنها طاقة كهرومغناطيسية عالية التركيز

اسم آخر هو التحفيز المغناطيسي للعضلات

HI HIFEM

التمارين البدنية هي الطريقة الوحيدة لتقوية مجموعات العضلات الأساسية. يمكن لتقنية HIFEM إحداث ما يقرب من 50000 نبضة في
جلسة واحدة مدتها 30 دقيقة. هذا أكثر من 10000 ميكروك! تحفز هذه النبضات الأعصاب مما يؤدي إلى تقلصات عضلية فوق قسوى
(تقلص عضلي بنسبة 100٪) لا يمكن تحقيقها بالتمرين. تضغط العضلات للتكيف مع سماكة العضلات الناتجة. تصبح العضلات أقوى
وأكثر متانة ويزداد حجمها

ما هو Big Mag

تم تطويره وإنتاجه بواسطة MORMED GROUP باستخدام تقنية HI-EMT / HIFEM

إنه الجيل الجديد من جهاز تشكيل الجسم وبناء العضلات

تقنية Big mag هي لاعب كمال أجسام جديد غير جراحي يستهدف العضلات بدلاً من الدهون فقط

إنه تطبيق تشكيل الجسم. في المتوسط ، تشكل الدهون 25٪ من إجمالي وزن الجسم ومع ذلك ، تشكل العضلات جزءاً أكبر من جسم الإنسان
العضلات 42٪ عند الرجال و 36٪ عند النساء

تحاكي هذه التقنية جيد الفعل للأعصاب التي تسبب تقلصات العضلات بقوة وشدة لا يمكنك إدراكها جسدياً من خلال التمرين الرياضية

لماء HI-EMT

يبلغ عمق الاختراق 8 سم ، وهو يغطي شبكة الأعصاب بالكامل ويسمح بتقلص طبقة العضلات بأكملها
تأثير موت الخلايا المبرمج للدهون و GG إن تمرين العضلات لا يمكن أن يتحقق أبداً من خلال التمارين البدنية

أظهرت الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة أن التأثير الذي يعطيه هو الأفضل

تجربة العلاج ونتائجه جيدة

مزايا BIG MAG

حرق الدهون في وقت واحد مع نمو وتقوية العضلات

تطبيق غير جراحي

لا شعور بالألم

لا توجد عملية شفاء

لا توجد تكاليف استهلاكية

يمكن تطبيقه على أجزاء مختلفة من الجسم

(البطن والورك والساق والذراع والكف والظهر)

وفر الوقت بجلسة قصيرة مدتها 30 دقيقة

عملية لا تتطلب قوة جسدية

الموصفات الفنية

الحجم	41 * 115 * 68 CM
قيم العمل الكهربائي	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
الوزن	48 KG
الشاشة	10.4 شاشة لمس
اللغات المستخدمة	تركي انكليزي الماني
اللون	احم باقي اللون اختياري
عدد الرووس	2
كثافة الإخراج	0 - 7 TESLA
تقنية العمل	HI - EMT / HIFEM
المناطق الذي يمكن استخدامها	الجسم

إجراء مع BIGMAG


HI-EMT/HIFEM مناسب لكل من الرجال والنساء. إنه ممتاز لبناء العضلات وتقليل الدهون في الأشخاص الذين يتراوح مؤشر
كتلة الجسم لديهم من 19 إلى 30. أظهرت الدراسات أن مستويات الرضا أعلى لدى المرضى الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أكبر ، على
الرغم من أن التأثيرات تكون أكثر وضوحاً في العملاء النحيفين

تؤدي جلسة BIGMEG الفردية إلى تحريض 50000 نبضة ، مما يؤدي إلى 50000 تقلص عضلي "فوق الحد الأقصى"
تقلصات العضلات "فوق الحد الأقصى" هي تقلصات للعضلة بأكملها مقابل 20٪ إلى 30٪ فقط كما هو الحال في جلسة
التمرينات البدنية. والنتيجة هي تضخم (زيادة في حجم الألياف العضلات الفردية) وتضخم (زيادة في عدد الألياف العضلات ككل).
أظهرت الدراسات زيادة في كتلة العضلات بعد 4 جلسات. يظهر هذا في عضلات البطن ، بما في ذلك عضلات البطن المستقيمة
وكذلك المائل الجانبية. من الفوائد الأخرى لعضلات البطن هو تقليل المسافة بين عقد المستقيم الأيمن والأيسر. يُعرف هذا باسم
انفراق المستقيم وهو شائع جداً بعد الحمل. من الصعب للغاية تظليل هذه الفجوة بالتمارين البدنية. يتم أيضاً تحقيق تحسن شامل في
محيط الخصر ، بفضل تقليل الدهون المصاحب. تظهر مكاسب مماثلة في عضلات الألية في الوركين والكتفين والذراعين ، وفي
عضلات الفخذ الرباعية وعوارض الركبة



ESTCULTOR

تمدد مع تأثير رياضي مكثف دون تعب

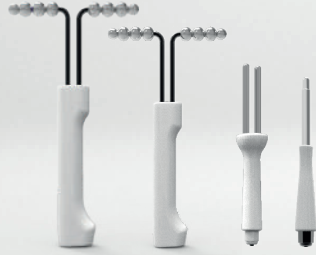

وصف الجهاز

إنه جهاز علاج كهربائي (ems) تم تطويره من قبل شركتنا حيث يهدف أعلى مستوى من الكفاءة إلى الانسجام الرائع بين الطاقات الحالية الدقيقة والجلفانية

مبدأ العمل

يتم استخدام طاقات التيار الصغرى والجلفانية ESTCULTOR مع 5 أجهزة رأس مختلفة إنه أكثر فعالية عندما تكون هناك مشاكل في الوزن والمرونة الإقليمية. يساعد على إزالة السيلوليت وتجديد وإصلاح الأنسجة الضامة (البيبتيد) للألياف الضعيفة. مع زيادة البيبتيدات ، فإنه يسرع من إنتاج الكولاجين والإيلاستين. يجدد بنية الجلد عن طريق زيادة الدورة الدموية وتسريع عملية التمثيل الغذائي للخلية مع الضغط المعطى أثناء العملية. وبالتالي ، فإن العلاج والتنشيط المقدم في الخلية ينظم التدهور في مظهر قشر البرتقال ، وهو تأثير السيلوليت ، وعندما تستعيد الأنسجة في منطقة السيلوليت نسيج الجلد الطبيعي ، نقل التشوهات بشكل واضح

نطاق التطبيق

تنشيط الوجه
إن تجديد شباب الوجه باستخدام ESTCULTOR له تأثيرات مرئية تمكن من استعادة الوجه وزيادة المرونة وتنشيط بنية الجلد. يساعد الجلد على اكتساب المرونة والانتعاش بنسبة 10-15 بالمائة الفاصل الزمني الموصى به للجلسة هو 2 في الأسبوع ليصبح المجموع 8 أسابيع. على الرغم من الشعور بتأثير الإجراء اعتباراً من الجلسة الأولى ، إلا أن التأثيرات المرئية تظهر اعتباراً من 6 أسابيع

الرقبة والفك

جنباً إلى جنب مع انخفاض كمية الكولاجين والإيلاستين مع ظهور علامات الشيخوخة ، فإنه يسبب انخفاض في الأنسجة الدهنية تحت الجلد وترهل في الأنسجة مع ESTCULTOR فإنه يساعد على القضاء على هذه المشاكل من خلال خلق تأثير رياضي مكثف في العضلات

انتعاش البطن والعضلات

ESTCULTOR سم في الجلسة الأولى 2-12 يقوي عضلات البطن ويزيد من مرونتها. يوفر الفحص ما بين أسابيع 8 في الأسبوع ليصبح المجموع 2 الفاصل الزمني الموصى به للجلسة هو

رفع الثدي

تنتقل طاقات التيار الجزئي والكفائي إلى الجسم بأطوال موجية مختلفة ، مما يؤدي إلى تحفيز وتقليص العضلات ، بحيث تتم عملية شد ورفع الصدر. بالإضافة إلى ذلك ، تتسارع الدورة الدموية مع الضغط المعطى أثناء العملية. وهكذا ، اعتباراً من الجلسة الأولى جلسات 6 لوحظ الانتعاش والتجديد. الفاصل الزمني الموصى به للجلسة هو جلستان في الأسبوع ، ليصبح المجموع

استعادة منطقة الظهر وشدها

مع طاقات التيار الصغرى والكفائية تنقبض الأعصاب في العضلات في نفس الوقت وتحدث عملية استعادة الظهر. يحدث تأثير سم. الفاصل الزمني 12-2 رياضي مكثف في الجسم. يؤدي الضغط المعطى أثناء الإجراء إلى تسريع الدورة الدموية. لوحظ فحص أسابيع 8 في الأسبوع ليصبح المجموع 2 الموصى به للجلسة هو

الرفع والنصب

يتم إعطاء طاقات التيار الجزئي والكفائي للمنطقة المرغوبة بأطوال موجية مختلفة ، مما يتسبب في تقلص العضلات ، مما يخلق أسابيع 8 في الأسبوع ليصبح المجموع 2 تأثيراً رياضياً مكثفاً. الفاصل الزمني الموصى به للجلسة هو

شد الساق والفخذ الداخلي والانتعاش

يتم إعطاء طاقات التيار الدقيقة والجلفانية بأطوال موجية مختلفة ، مما يؤدي إلى تقلص العضلات ، وبالتالي خلق تأثير رياضي مكثف. مع الضغط المعطى أثناء العملية ، فإنه يزيد الدورة الدموية ويحفز تخليق ATP في الجسم ، مما يؤدي إلى إنتاج كولاجين جديد. بالإضافة إلى ذلك ، مع الطاقة المتولدة خلال هذا الوقت ، تستخدم العضلات الجليكوجين والدهون في أنسجتها. وبالتالي ، يتم أسابيع 8 في الأسبوع ليصبح المجموع 2 تقليل الأنسجة الدهنية الإقليمية ويتم توفير الضغط. الفاصل الزمني الموصى به للجلسة هو

مظهر السيلوليت وقشر البرتقال

يعمل ESTCULTOR على إزالة منطقة السيلوليت وتجديد وإصلاح الأنسجة الضامة (الخلايا الليفية) للألياف المتعبة. يسرع إنتاج الكولاجين والإيلاستين. يساعد على إعادة بناء الأنسجة في منطقة السيلوليت وتنعيمها. مع الضغط المعطى أثناء العملية ، يتم تسريع الدورة الدموية ، ويتم تحفيز عملية التمثيل الغذائي للخلايا وتسريعها ، ويتم تجديد بنية الجلد

مزايا الاعمال

مجال تطبيق واسع

لا توجد تكاليف استهلاكية

نسبة رضا عالية

إنها تتلائم قاعدة العملاء العامة

يوفر للعملاء فرصة تطبيق مرحة

الفوائد التي تعود على المستخدم

إنه غير مؤلم

يحل لها مع نتائج واضحة

إلى جانب الفحص والشد ، يتم تجديد الجلد أيضاً

تعمل عضلاتك دون تعب ، مع تأثير الرياضات الشديدة. أيضاً ادم صحتك

الموصفات الفنية

AC110V-220V 50-60HZ	مدخل
350W	القوة
1Hz-200Hz	تردد الخرج
1-100	طاقة
التركيبية او انكليزية	اللغات المستخدمة
نموذج العمل	7 نماذج مختلفة
ابيض	اللون

BINDEX

العلاج الصحيح ورايور مع تقرير تحليل الجسم جهاز تحليل الجسم



هو محلل للجسم مع وظائف تحليل تكوين الجسم ، واختبار مقاومة العناصر وتكوينها في جميع أجزاء جسم الإنسان ، وتوفير البيانات العلمية حول التحكم في الوزن ، والنظام الغذائي ،

والتخسيس ، وتنمية العضلات ، والتوازن الغذائي
مبدأ العمل

إنه يطبق مبدأ اختبار المعاوقة الكهربائية الحيوية عالية التردد مع نظام 8 نقاط يلامس طريقة القطب ، بحيث الوزن ، والبروتين ، والدهون ، والماء ، ونسبة الخصر إلى الورك ، إلخ. يساعد في إعداد بروتوكول علاج دقيق وشخصي من خلال إجراء القياسات
محتوى التكنولوجيا

- (نسبة سوائل الجسم) TVS
- (نسبة الدهون في الجسم) PBF
- الأملح المعدنية
- تحليل العضلات
- المعاوقة الكهربائية الحيوية
- مؤشر كتلة الجسم
- الهدف حساب الوزن
- تحليل البروتين
- (نسبة الخصر إلى الورك) WHR
- تحليل دهون الجسم
- وزن العظام
- تشخيص السمنة
- التمثيل الغذائي الأساسي
- مؤشر الوزن من دون دهون
- تقييم التغذية
- تقييم الوزن

مزايا الأعمال

مع تقرير تحليل الجسم ، يتم توفير العلاجات الصحيحة
توصية العلاج المثالي للقيم الفردية
زيادة كفاءة العلاج المطبق بتحليل قيم الجسم
ميزة العمل لتلبية احتياجات الجسم مع تحديد العلاج المناسب للإجراء المسبق
الفوائد التي تعود على المستخدم
الحصول على معلومات دقيقة عن الجسد
اكتساب الدافع من خلال تأثير العلاج
فقدان الوزن الصحيح
نتيجة التحليل ، الشعور بالثقة في اسم صحة العلاج
يوفر التشخيص الصحيح ويوفر العلاج الصحيح

المواصفات الفنية

118 * 50 * 49 CM	الحجم
220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
28 KG	الوزن
10 - 200 KG	نطاق الاختبار
تحليل الجسم	نظام العمل
ابيض	اللون
راس قطب كهربائي - جهاز تحمل باليد	العناوين المستخدمة
مقاومة عالية التردد الحيوي	تقنية العمل

تحليل قيم الجسم



توصيات العلاج المثالي



تحديد العلاج المناسب لعملية ما قبل الاجراء



نتيجة اختبار مختلفة 25



شاشة العمل



تقرير تحليل الجسم



ELEKTROSTİMİLASYON

متساوي القياس
تأثير التمرين المكثف في جلسة واحدة



جهاز G5

التجميل التي انت مع مساج



جهاز PRESSOTERAPI

LENFATİK DRENAJ
نظام المساج بالضغط



Jimmastik السلي هي تقنية تعتمد على طريقة التمرين السلي التي تهدف إلى تكسير الدهون والشح والي تمكن العضلات التي لا تستطيع العمل في الجسم من التحرك بمساعدة الكهرباء ذات الجهد المنخفض بمساعدة القوط وموجات الراديو. نظرًا لأن الجيماستيك يمنح الجسم تأثير التمرين ويستهلك الطاقة، يتم حرق السعرات الحرارية بسبب الإرهاق في عملية التمثيل الغذائي. في الوقت نفسه، تعمل موجات الراديو التي يتم إرسالها إلى الجسم على تحفيز الأنسجة الدهنية وتساعد على إزالة الدهون من الجسم

مبدأ العمل

من خلال توصيل منطقة المشكلة بمساعدة القوط، يتم إعطاء كهرباء منخفضة الجهد وتعمل العضلات. بفضل وجود أكثر من وسادة، يمكن أن تعمل في نفس الوقت على العضلات في مناطق مختلفة من خلال وضعها على أكثر من جزء من الجسم في نفس الوقت. من خلال خيارات المستوى المختلفة، يمكن إجراء التطبيق في أنسب الإعداد وفقًا للشخص

محتوى التكنولوجيا

لديها 8 مخارج و 16 وسادة. يمكن تشغيله يدويًا وكذلك برمجته تلقائيًا. إنه سهل الاستخدام ويوفر امتثالًا ممتازًا للمعلماء

المزايا المقدمة للأعمال

مع مجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمها، يمكنك الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع بكثير. تطبيقات أكثر حساسية مع ضبط مستوى العملية القابل للتعديل. سهل الاستخدام مع التركيب العملي. الاستخدام الوظيفي في الأطراف العلوية والسفلية

مع 4 أوضاع مختلفة وأطول موجة كهربائية، فإنه يساعد على استهلاك الطاقة الشخصية

الفوائد التي تعود على المستخدم

يوفر تأثير التمرين المكثف في جلسة واحدة يحسن الدورة الدموية العامة لدى الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة

G5 جهاز عبارة عن جهاز تليك بالاهتزاز احترافي يستخدم لشد وإزالة السيلوليت بنظام الاهتزاز

مبدأ العمل

هو توفير تطبيق التليك مع اهتزاز العلاج بامساج بمساعدة ميكانيكي. ينشط العضلات والجهاز العصبي. ويغني الدورة الدموية والجهاز اللمفاوي. يخفف الدهون، ويجعل أنسجة السيلوليت، ويريح العضلات ويساعد على التعافي

محتوى التكنولوجيا

هي تقنية للمساج يمكن تطبيقها برووس مختلفة لجميع أجزاء الجسم وتحتوي على نظام اهتزاز فعال وقوي

مزايا الأعمال

إمكانية تحقيق تأثير أكبر من خلال دمج مع جهاز صوتي عالي التردد وآلة تردد لاسلكي أخرى. تطبيقات أكثر حساسية مع مستوى شدة قابل للتعديل. استخدام أكثر وظيفية مع أجزاء مختلفة الشكل مثل البطن والكفوف والذراعين والساقين

يمكنك زيادة مجموعة خدماتك بفضل ميزتها التي تدعم العلاج الطبيعي

مع مجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمها، يمكنك الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع بكثير

الفوائد التي تعود على المستخدم

يساعد على تنعيم الدهون لتشكل الجسم يساعد على فصل جزيئات الدهون والقضاء على قوام العمل. يساعد بشكل فعال على تخفيف تورم العضلات وإرهاقها من أجل الاسترخاء. يساهم في تخفيف الآلام العضلات عن طريق التخلص من السموم والتعب. يساعد على منع إجهاد العضلات وتيبسها وأيضًا زيادة حركة المفاصل. يساعد على تقليل نقص تمرين العضلات لتقليل وتمة المفاصل. يساعد في تقليل السيلوليت عن طريق تعزيز الدورة الدموية

هي تقنية تهدف إلى تحسين جودة الجلد، وترقيق المحيط، وشد الجلد وتحت الجلد عن طريق الضغط بالمساج على الجسم

تستراح الدورة اللمفاوية والوريدية في الجسم بالضغط، مما يساعد على تصريف السوائل المتراكمة بين الأوردة. وهي طريقة تستخدم في القضاء على الورمة في الجسم بسبب الأمراض المختلفة وفي التخلص من السيلوليت، فضلًا عن زيادة فعالية برامج التخسيس وشد الجسم

مبدأ العمل

يرتدي الشخص المعدات اللمفاوية ويتم لف القدمين والساقين واليدين ثم يتم تشغيل جهاز التصريف اللمفاوي. يوفر الجهاز تصريفًا لمغناطيسيًا عن طريق الضغط من أطراف الأصابع إلى أعلى على فترات منتظمة

محتوى التكنولوجيا

الجهاز الذي يمكنه إجراء مساج بالضغط على الجسم به 10 برامج مختلفة في كل برنامج قوة ضغط تتراوح بين 30 و 120 مم / دقيق مبرمجة حسب المريض

مزايا الأعمال

يوفر تطبيق مريح غير مؤلم

مع مجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمها، يمكنك الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع بكثير

تطبيقات أكثر حساسية مع مستوى ضغط قابل للتعديل

سهل الاستخدام مع التركيب العملي

يساعد على تخفيف السيلوليت وتطبيقات التخفيف الموضعي بالموجات فوق الصوتية والترددات الراديوية

الفوائد التي تعود على المستخدم

يساعد على تقليل الشعور بالورمة والتقلبات والآلام خاصة في الساقين

يدعم فقدان الوزن ويقلل الدهون وتقليلها

يساعد على تحسين التمثيل الغذائي من خلال تعزيز الدورة الدموية

يساعد على التخلص من الوزن الزائد والسيلوليت

يساهم في تنظيم التنفث اللمفاوي

يساعد على استعادة الأنسجة العضلية المترهلة وترهل الجسم

المواصفات الفنية

220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائية
تطبيق مساج	نظام العمل
ابيض	اللون
الإخراج ، 16 وسادة 8	ميزات الرأس
الخصر والبطن والوركين	المناطق تستطيع استخدامها
اجراء LIFTING في صدر	مزايا اضافية

المواصفات الفنية

220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
تطبيق مساج هزاز	نظام العمل
ابيض	اللون
راس مساج	العاثون المستخدمة
الساق ، الزراع ، الكتف ، البطن	المناطق تستطيع استخدامها
مساج بالاهتزاز بمساعدة ميكانيكية	تقنية العمل

المواصفات الفنية

220 - 240 V / 50 - 60 HZ	قيم العمل الكهربائي
العلاج بالتدليك	نظام العمل
اسود	اللون
LCD	الشاشة
كاتم	ميزة الصوت

