

The logo for 'MY WORLD' features a stylized 'M' on the left, composed of three overlapping, curved, purple-to-blue gradient shapes. To the right of the 'M', the letters 'Y WORLD' are written in a bold, dark blue, sans-serif typeface.


# MY WORLD

---

UNE PRODUCTION AXÉE SUR LA CRÉATIVITÉ ET L'INNOVATION



**Mormed n'est pas seulement un fabricant d'équipements,**  
est un partenaire qui vous aide à croître et à développer votre entreprise.

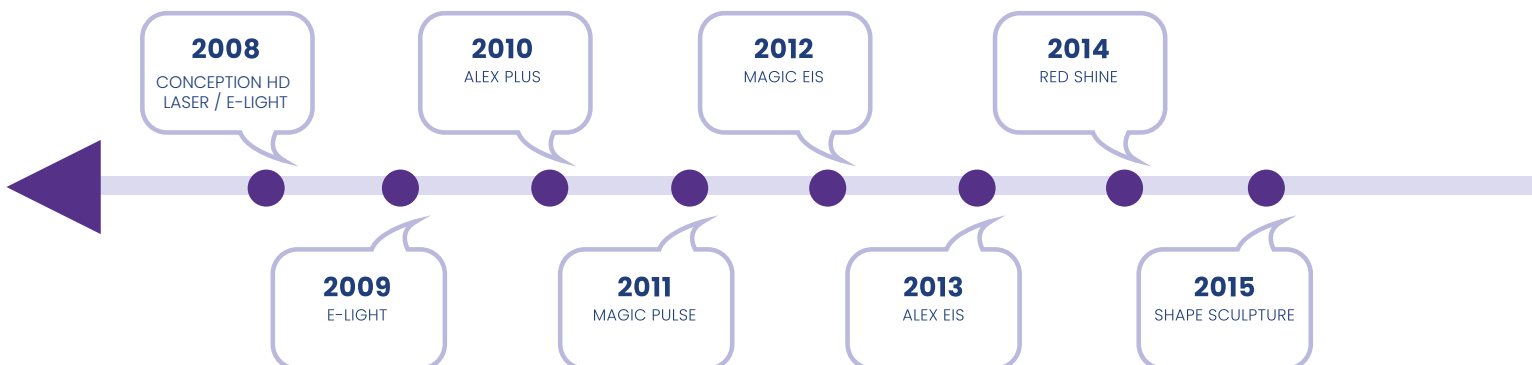

## À PROPOS DE NOUS

Notre histoire a commencé en 2004 lorsque le Dr Hüseyin Dağar s'est lancé dans le domaine de la médecine esthétique. En 2005, elle a porté ses premiers fruits avec la clinique de beauté et en 2007, elle a porté ses seconds fruits avec l'académie de beauté d'Özlem Dağar. En 2008, nous sommes fiers d'avoir réalisé une première en Turquie dans la production d'équipements en produisant un appareil IPL national.

En 2011, tout en représentant les produits cosmétiques et de mésothérapie espagnols en Turquie, elle a ajouté les appareils d'amincissement et de soins de la peau à sa gamme d'appareils. Dans ce contexte, elle vise à répondre pleinement au besoin d'équipement et d'expérience des salons.

Le groupe Mormed n'a pas hésité à faire profiter ses partenaires de son expérience tout en poursuivant ses activités dans les domaines de l'esthétique, de la gestion de cliniques, de l'éducation, de la production et de l'importation.

Le principe de base de Mormed est de continuer à croître en se concentrant sur la conquête de ses clients. Elle considère ses clients comme ses propres partenaires. En étant avec eux à chaque étape, elle a une compréhension du service qui voit leurs problèmes comme leurs propres problèmes et sait que leurs gains sont leurs propres gains. C'est la seule source de publicité et d'élixir de croissance depuis sa création.

Notre objectif est d'apporter une contribution économique sérieuse à notre patrie, où nous vivons et produisons, et de figurer parmi les organisations réputées de notre pays. En transférant l'accumulation et l'expérience des années que nous avons laissées derrière nous à la technologie que nous produisons, nous avons poursuivi notre travail avec beaucoup de sérieux pour le développement de notre pays et nous continuons à le faire avec toute notre motivation.

Aujourd'hui, nous sommes fiers et heureux d'être le leader du secteur de l'esthétique médicale dans notre pays. Mormed s'acquitte de sa dette morale envers ce pays en vendant ses produits et ses marques dans le monde entier par l'intermédiaire de ses bureaux de représentation.

Mormed brand Alex, Magic Eis, Red Shine, HydrOxyPeel, Shape Sculpture, Hobraz, Tatouage, Diode Cardinale, Striaoff, Magic Sound, Big Shaper s'est fait une place dans le monde de la globalisation et avance en ligne avec les objectifs qu'elle s'est fixés sans ralentir. Elle continue d'apporter de la valeur ajoutée et de l'emploi au secteur grâce aux différentes technologies qu'elle produit, en accélérant jour après jour ses études de recherche et développement. Nous continuerons à produire des systèmes différents, innovants et à valeur ajoutée grâce à notre travail qui se poursuit avec dévouement depuis de nombreuses années.

Conscients de la responsabilité que nous confère le leadership du secteur, nous attachons une grande importance à la satisfaction de nos clients, tant au niveau des formations dispensées par nos formateurs professionnels qu'au niveau de l'assistance technique ininterrompue après la vente. En outre, nous garantissons une application plus efficace et moins consommatrice grâce à nos appareils adaptés aux entreprises.

Nous fournissons un service local à toute la Turquie grâce à nos succursales de Konya, Ankara et Istanbul.

Nous serons heureux de vous compter parmi les membres de cette merveilleuse famille.



**Dr. Hüseyin Dağar**  
**Özlem Dağar**



# MORMED

Beauty Factory



## SOMMAIRE

Notre société / À propos de nous .....	<b>02-03</b>
Contenu .....	<b>04</b>
<b>DISPOSITIFS D'ÉPILATION</b>	
Ilex .....	<b>06</b>
Diode Cardinale .....	<b>07</b>
Red Shine Hybrid .....	<b>08</b>
Red Shine RF+ .....	<b>09</b>
Red Shine .....	<b>10</b>
Red Shine Fein .....	<b>11</b>
Alex Eis .....	<b>12</b>
Alex Premium .....	<b>13</b>
Alex Plus .....	<b>14</b>
Magic Pro .....	<b>15</b>
Magic Eis .....	<b>16</b>
Magic Pulse .....	<b>17</b>
Épilation à l'huile d'olive .....	<b>18</b>
<b>L'ESTHÉTIQUE DE LA PEAU</b>	
Tatouage .....	<b>19</b>
Hydroxypeel .....	<b>20</b>
Dermarc .....	<b>21</b>
Strivak - Striaoff .....	<b>22</b>
Visco Care .....	<b>23</b>
HD Focus / Eco Hifu / Fraxi HD .....	<b>24</b>
Aqua Peeling/4+1/8+1/12+1/Traitements de la peau .....	<b>25</b>
<b>ÉCLAIRCIE RÉGIONALE</b>	
Big Shaper .....	<b>26</b>
Son magique .....	<b>27</b>
Big Fit .....	<b>28</b>
Sculpture de forme .....	<b>29</b>
Hobraz .....	<b>30</b>
Hobraz Plus .....	<b>31</b>
Moreno .....	<b>32</b>
Royal Lift .....	<b>33</b>
Big Mag .....	<b>34</b>
Estcultor .....	<b>35</b>
Bindex .....	<b>36</b>
Gymnastique passive / G5 /Drainage lymphatique .....	<b>37</b>

# ILEX

## NOUVELLE GÉNÉRATION ALEXANDRITE



Ilex est un appareil d'épilation laser utilisant les technologies laser Alexandrite et Nd:Yag avec une longueur d'onde de 755+1064 nm, produit par le Groupe Mormed. Grâce à ses performances élevées et à son utilisation sûre et efficace, il constitue un choix idéal pour l'épilation et permet d'obtenir les meilleurs résultats possibles en termes de coût et d'application. Ilex, avec ses longueurs d'onde de 755 et 1064 nm, offre une possibilité d'épilation efficace et confortable en se concentrant sur la racine du poil et en le détruisant de façon permanente. Comme il crée lui-même l'air froid, il n'y a pas de coût supplémentaire pour le gaz de refroidissement.

### Principe de fonctionnement

La longueur d'onde de 755 + 1064 nm est absorbée par le pigment de la racine du cheveu et la destruction de la racine du cheveu se produit. Ilex atteint une température suffisante dans le follicule pileux en très peu de temps et vous permet d'effectuer une épilation permanente.

### Contenu technologique

Ilex dispose d'une technologie d'épilation laser équipée d'une tête de longueur d'onde de 755 et 1064 nm et d'un système d'air froid intégré. Ilex permet d'effectuer la procédure en un temps très court grâce à sa capacité à aller jusqu'à 3 Hz.

### Avantages pour les entreprises


- Avec sa vitesse accrue jusqu'à 3 Hz, il offre la possibilité d'appliquer à plus de personnes dans un temps plus court et plus rapide.
- Utilisation pratique grâce à la conception ergonomique de la tête.
- Gain de temps grâce à une application rapide et pratique.
- Permet des séances confortables et continues grâce à son puissant système de refroidissement.
- Offre une facilité d'utilisation grâce à son design ergonomique et à son écran tactile numérique intelligent.
- Il offre un risque extrêmement faible d'effets secondaires avec un praticien qualifié.
- Des résultats ciblés et réussis avec un traitement efficace sur tous les types de peau et de follicules pileux.
- Épilation confortable avec un seuil de douleur bas.
- Il offre une épilation en 4 saisons grâce à sa technologie de nouvelle génération.
- Le coût de l'appareil est raisonnable. ◦ Pas besoin de gaz grâce au système d'air froid intégré.

### Avantages pour l'utilisateur final

Même après la première séance, l'effet se fait sentir : possibilité d'épilation indolore et confortable, confort élevé pendant l'épilation de tout le corps, épilation efficace en toute saison, processus d'épilation rapide et durée de séance courte, possibilité de poursuivre la vie quotidienne sans interruption après l'intervention.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	59 * 120 * 83 CM
POIDS	91 KG
VALEURS DE FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
ÉCRAN	10.4" ECRAN TOUCH
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
NOMBRE DE TITRES	1
TECHNOLOGIE DE TRAVAIL	LASER ALEXANDRITE - ND : LASER YAG
COULEUR	GRIS (EN OPTION)
TITRES UTILISÉS	CAPUCHON ILEX

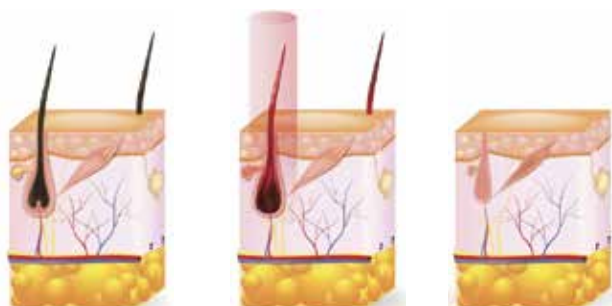



## LÉGER, RAPIDE, INDOLORE ET DÉSORMAIS PLUS ÉCONOMIQUE EFFET FORT AVEC LA TÊTE LÉGÈRE



DIODE CARDINALE 808 est un appareil d'épilation de nouvelle génération développé par le Groupe Mormed, qui offre la possibilité d'épilation en délivrant l'énergie générée dans l'appareil et cette énergie à la tête à travers la fibre optique au lieu de la lumière générée dans la tête à diode classique.

### Principe de fonctionnement

La CARDINALE 808 est un système qui permet à la lumière de 808 nm à l'intérieur de l'appareil d'atteindre la peau à l'aide d'une fibre. Alors que la température de travail était de 25-35 degrés dans les anciens systèmes, cette technologie permet de travailler confortablement à une température plus élevée (40-45 degrés). L'énergie étant diffusée de manière uniforme, la sensation de douleur est réduite au minimum, ce qui accroît l'efficacité de la procédure.

### Avantages pour les entreprises

- Le coût du tir est plus économique que celui des autres têtes à diodes.
- Gain de temps grâce à une application rapide et pratique.
- Moins de besoin de service technique grâce à des consommables durables et résistants.
- Permet des séances confortables grâce à son système de refroidissement avancé.
- Possibilité d'épilation en 4 saisons.
- Facilité d'utilisation grâce à son design ergonomique, sa tête légère et son écran tactile numérique intelligent.
- Il offre un risque extrêmement faible d'effets secondaires avec un praticien qualifié.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	60 * 118 * 73 CM
POIDS	60 KG
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
ÉCRAN	10,4" ECRAN TOUCH
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
TAILLE DES ONDES	755 - 808 NM (EN OPTION)
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	REFROIDISSEUR - AIR - EAU
SYSTÈME DE TRAVAIL	SÉRIE, SIMPLE
COULEUR	OR (OPTION)
TITRES UTILISÉS	TÊTE DE LIT CARDINALE

### Avantages de la tête à fibres par rapport à la tête à diodes normale

La tête ultra-légère (350 g) permet une épilation sans perte de confort lors de procédures prolongées.

La valeur énergétique étant plus élevée que celle des autres technologies à diodes, la destruction des poils est de haut niveau.

L'énergie étant administrée à travers l'appareil, la durée de vie de la tête est plus longue.

L'énergie étant fournie de manière uniforme, le niveau de douleur est minimisé et permet une épilation agréable et confortable.

Le coût de l'appareil est moindre.

L'énergie atteint uniformément la racine du poil.

### Avantages pour l'utilisateur final

Épilation indolore et confortable.

Épilation en toute sécurité avec un praticien qualifié.

Grand confort pendant l'épilation de tout le corps.

La technologie la plus idéale pour les poils épais du dos de l'homme.

Épilation efficace en toute saison sans nuire à votre vie sociale.

Processus d'épilation rapide avec des intervalles de séances courts.



# REDShine Hybrid

**AVEC 3 LONGUEURS D'ONDE DIFFÉRENTES**  
EFFICACE, RAPIDE, CONFORTABLE ET  
MAINTENANT PLUS PUISSANT 3  
EXPÉRIENCES DIFFÉRENTES EN UN  
SEUL APPAREIL



REDSHINE HYBRID DIODE est un appareil d'épilation laser à diode développé par Mormed Group, qui combine les 3 longueurs d'onde les plus efficaces et les plus sûres (808nm, 755 nm et 1064 nm) pour le follicule pileux lors de l'épilation, permettant une application simultanée.

## Principe de fonctionnement

La technologie REDSHINE HYBRD permet une épilation pratique et efficace en envoyant 2 (808nm-1064nm) ou 3 (755+808+1064nm) longueurs d'onde différentes dans le même faisceau sur la peau en une seule fois et en l'ajustant en fonction du type de poil. Chacune des trois longueurs d'onde laser cible une structure anatomique différente et différents profondeurs de tissu dans la structure du poil.

## Contenu technologique

Diode 808 nm : cette longueur d'onde a une absorption modérée de la mélanine. C'est pourquoi elle permet une épilation sûre sur les peaux de couleur foncée. 755 nm Alexandrite : Cette longueur d'onde est celle qui donne sa couleur au cheveu et qui est la plus absorbée par la mélanine. Elle est très efficace sur les peaux claires et les poils foncés. 1064 nm NdYAG : Cette longueur d'onde est idéale pour les peaux très foncées et les peaux bronzées avec une faible absorption de la mélanine. La longueur d'onde de 1064 nm est celle qui peut pénétrer le plus profondément dans le follicule pileux. Cela permet d'obtenir des résultats satisfaisants pour l'épilation des poils situés en profondeur, par exemple dans le dos et la région de l'aîne.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


DIMENSIONS	60 * 120 * 53 CM
POIDS	63 KG
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
ÉCRAN	10.4" TOUCHSCREEN DISPLAY
LANGUES UTILISÉES	TÜRKÇE, İNGİLİZCE (OPSİYONEL)
TAILLE DES ONDES	755 - 808 - 1064 NM (OPSİYONEL)
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	CHILLER - SU
SYSTÈME DE TRAVAIL	SERİ, TEK
COULEUR	SİYAH (OPSİYONEL)
TITRES UTILISÉS	RED SHINE HYBRID BAŞLIK

## Avantages pour les entreprises

- Il permet d'éliminer la différence de nombre de séances entre les types de cheveux car il donne différentes longueurs d'onde en même temps et en une seule fois.
- Gain de temps grâce à une application rapide et pratique.
- Grâce à ses consommables durables et pérennes, le besoin en service technique est faible.
- Le système de refroidissement Ultra permet des séances confortables et continues.
- Il offre une facilité d'utilisation grâce à son design ergonomique, sa tête légère et son écran tactile numérique intelligent.
- Possibilité d'épilation en 4 saisons avec trois technologies de longueur d'onde différentes.
- Il offre un risque extrêmement faible d'effets secondaires avec un praticien qualifié.
- Minimise les séances de contrôle grâce à la technologie des injections en série.
- Il offre un processus d'épilation confortable avec un seuil de douleur bas. ◦ Le coût de l'épilation est abordable.

## Avantages pour l'utilisateur final

L'épilation est moins douloureuse et plus confortable. Il est pratiquement impossible de causer des lésions cutanées et des taches sur les peaux foncées.  
Grand confort pendant l'épilation de tout le corps.  
La technologie la plus idéale pour les poils épais du dos de l'homme.  
Épilation efficace en 4 saisons.  
Processus d'épilation rapide avec des séances courtes.  
Possibilité de poursuivre la vie quotidienne sans interruption après la procédure.

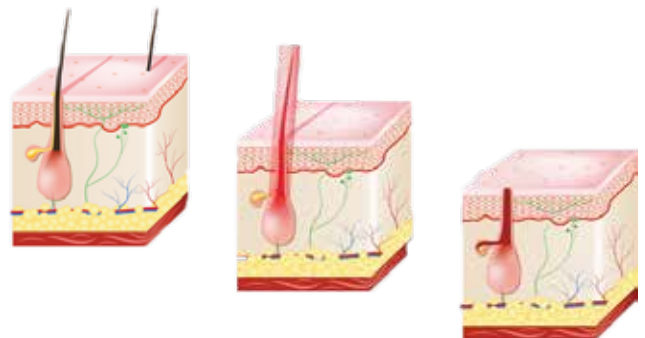



# RED Shine +RF

## CHEVEUX FINS ET CLAIRS

## LE SYSTÈME D'ÉPILATION AU LASER

## LE PLUS EFFICACE



REDSHINE DIODE+RF est une nouvelle génération de technologie d'épilation au laser à radiofréquence développée par Mormed Group, visant à détruire rapidement les follicules pileux en chauffant la peau et les follicules pileux au plus haut niveau grâce à la fonction Diode+RF.

### Principe de fonctionnement

Grâce à la technologie RF, la température est d'abord augmentée jusqu'à 45°, ce qui permet une épilation plus efficace avec une énergie plus faible pour le laser. De cette manière, il est possible d'obtenir une plus grande efficacité sur les poils plus clairs et plus fins.

### Contenu technologique

L'appareil d'épilation laser RED SHINE DIODE+RF avec système d'impulsions en série est doté de la technologie +RF, contrairement aux autres appareils laser à diode à impulsions en série. Grâce à la technologie de la radiofréquence, le degré de chaleur dans la peau est accru au cours du processus et permet d'obtenir des résultats d'épilation beaucoup plus efficaces et rapides. La longueur d'onde de la diode de 808 nm a une absorption moyenne de la mélanine. Elle permet donc une épilation sûre sur les peaux foncées. Elle se situe dans la plage de longueurs d'onde efficace pour la destruction des follicules pileux.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	60 * 120 * 84 CM
POIDS	63 KG
VALEURS DE FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
ÉCRAN	ÉCRAN TACTILE 10,4"
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (OPTIONNEL)
TAILLE DES ONDES	755 - 808 - 1064 NM (OPTIONNEL)
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	CHILLER - EAU - AIR
INTERVALLE DE TRAVAIL	0 - 25 J
SYSTÈME DE TRAVAIL	PULSÉ, UNIQUE
COULEUR	VIOLET FONCÉ (OPTIONNEL)
TITRES UTILISÉS	RED SHINE - TÊTE RF

### Avantages pour les entreprises

- C'est la méthode la plus efficace en cas de structure de cheveux fine et de couleur de cheveux claire.
- Avec sa longueur d'onde de 808 nm, il offre une épilation plus sûre et plus rapide en réduisant le risque d'endommager la peau.
- Il permet de gagner du temps grâce à son application rapide et pratique.
- Exigences minimales en matière d'entretien technique grâce à des consommables durables et résistants.
- Possibilité de séance confortable et continue grâce à son système d'ultra refroidissement.
- Conception ergonomique et facilité d'utilisation grâce à son écran tactile numérique intelligent.
- Possibilité d'épilation 4 saisons avec une technologie nouvelle génération.
- Processus d'épilation avec un risque d'effets secondaires extrêmement faible avec un praticien qualifié.
- Épilation confortable avec un seuil de douleur bas.
- Le coût de l'injection est avantageux.
- Niveau élevé de destruction des follicules pileux par rapport aux autres technologies à diodes.
- Moins de destruction de la tête grâce à la fonction de chauffage supplémentaire.
- Résultats plus réussis et plus efficaces avec la technologie de la radiofréquence.

### Avantages pour l'utilisateur final

Une épilation plus efficace grâce à la technologie de la radiofréquence, une épilation indolore et confortable, une épilation sûre sur les peaux foncées, un niveau élevé de confort pendant le processus d'épilation du corps entier, une épilation efficace en toute saison sans retarder votre vie sociale, des séances courtes avec un processus d'épilation rapide, la possibilité de poursuivre votre vie quotidienne sans interruption après l'intervention.



# RED Shine

## MAINTENANT PLUS PRATIQUE AVEC 3 TÊTES INTERCHANGEABLES ÉPILATION ADAPTABLE À CHAQUE ZONE



RED SHINE 808 DIODE est un appareil d'épilation rapide et efficace d'une longueur d'onde de 808 nm produit par Mormed Group. Il permet une épilation plus confortable en réduisant le risque d'endommager la peau grâce à sa longueur d'onde de 808 nm, qui est plus longue que celle des autres systèmes d'épilation.

### Principe de fonctionnement

La technologie REDSHINE offre une possibilité d'épilation efficace et sûre à la fois en économisant du temps dans le processus d'épilation grâce à la technique des 10 impulsions utilisant la longueur d'onde de 808nm.

### Contenu technologique

La longueur d'onde de 808 nm a une absorption modérée de la mélanine. C'est pourquoi elle permet une épilation en toute sécurité des peaux de couleur foncée. C'est la longueur d'onde la plus efficace pour la destruction des follicules pileux.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	47 * 120 * 47 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
ÉCRAN	8" ECRAN TOUCH
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS
TAILLE DES ONDES	755 - 808 - 1064 NM (EN OPTION)
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	ÉCRAN REFROIDI
SYSTÈME DE TRAVAIL	DARBED, SINGLE
COULEUR	GRIS(EN OPTION)
TITRES UTILISÉS	TÊTE DE LIT RED SHINE

### Avantages pour les entreprises

- Utilisation pratique dans les zones étroites et larges avec 3 têtes interchangeables de tailles différentes.
- Permet une épilation plus sûre et plus rapide en réduisant le risque de lésions cutanées avec la longueur d'onde de 808 nm.
- Exigences minimales en matière d'entretien technique grâce à des consommables durables et résistants.
- Gain de temps grâce à une application rapide et pratique.
- Séances confortables et continues grâce à l'ultra-refroidissement avancé.
- Facilité d'utilisation grâce au design ergonomique et à l'écran tactile numérique intelligent.
- Possibilité d'épilation sur 4 saisons avec une technologie de nouvelle génération.
- Risque extrêmement faible d'effets secondaires avec un praticien qualifié.
- Permet une épilation confortable avec un seuil de douleur bas.
- Le coût des tirs est avantageux.

### Avantages pour l'utilisateur final

Des procédures efficaces et plus courtes grâce à des têtes graduées adaptées aux différentes zones de la peau. Possibilité d'épilation indolore et confortable. Épilation sûre sans dommages pour la peau et sans taches sur les peaux foncées. Haut niveau de confort pendant les procédures d'épilation du corps entier. Processus d'épilation efficace en toute saison. Temps de séance courts avec un processus d'épilation rapide. Possibilité de continuer votre vie quotidienne sans interruption après la procédure.



# RED Shine *fein*

COÛT AVANTAGEUX ET  
CONCEPTION ERGONOMIQUE  
TECHNOLOGIE DES DIODES  
DE NOUVELLE  
GÉNÉRATION



REDSHINE FINE Diode est un appareil d'épilation laser portable, rapide et efficace, d'une longueur d'onde de 808 nm, produit par MORMED GROUP. Avec sa longueur d'onde de 808 nm, il offre une épilation plus confortable en réduisant le risque de lésions cutanées.

## Principe de fonctionnement

La diode REDSHINE FINE, avec sa technologie de longueur d'onde de 808nm et sa technique de 10 impulsions, permet de gagner du temps dans le processus d'épilation et offre en même temps une possibilité d'épilation efficace et sûre.

## Contenu technologique

La longueur d'onde de 808 nm a une absorption modérée de la mélanine. C'est pourquoi elle permet une épilation en toute sécurité des peaux de couleur foncée. C'est la longueur d'onde la plus efficace pour la destruction des follicules pileux.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	DIMENSIONS 46 * 38 * 62 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
ÉCRAN	ÉCRAN TACTILE 10.4"
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
TAILLE DES ONDES	755 - 808 - 1064 NM (EN OPTION)
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	REFROIDISSEMENT À L'EAU - PELTIER
SYSTÈME DE TRAVAIL	IMPACT, UNIQUE
COULEUR	NOIR (EN OPTION)
TITRES UTILISÉS	TÊTE BRILLANTE ROUGE

## Avantages pour les entreprises

- Facile à utiliser grâce à son design ergonomique et portable. Utilisation pratique dans les zones étroites et à grande échelle avec 3 tailles différentes de têtes interchangeables.
- Épilation plus sûre et plus rapide en réduisant le risque de lésions cutanées grâce à la longueur d'onde de 808 nm.
- Gain de temps grâce à une application rapide et pratique.
- Exigences minimales en matière d'entretien technique grâce à des consommables durables.
- Facilité d'utilisation grâce à un design ergonomique et à un écran tactile numérique intelligent.
- Possibilité d'épilation en 4 saisons grâce à la technologie de nouvelle génération.
- Il offre un risque extrêmement faible d'effets secondaires avec un praticien qualifié.
- Résultats ciblés et réussis avec un traitement efficace sur tous les types de peau et de follicules pileux.
- Épilation confortable avec un seuil de douleur bas.
- Le coût des séances est avantageux.

## Avantages pour l'utilisateur final

Des procédures efficaces et plus courtes grâce à des têtes graduées adaptées aux différentes zones de la peau. Une épilation sans douleur et confortable. Une épilation sûre sans dommage pour la peau et sans taches sur les peaux foncées. Un grand confort pendant les procédures d'épilation du corps entier. Une épilation efficace en toute saison. Des séances courtes avec un processus d'épilation rapide. La possibilité de continuer votre vie sociale après la procédure sans la reporter.



# ALEX<sup>EIS</sup>

## TECHNOLOGIE UNIQUE D'ÉPILATION EN 3D +SHR

### 2 SYSTÈMES D'ÉPILATION DIFFÉRENTS RÉUNIS EN UN SEUL APPAREIL



Alex EIS est un appareil de photo-épilation à double tête développé par le Groupe Mormed avec ses longues années d'expérience dans le secteur, qui offre la technologie du rayonnement pulsé, la tête de refroidissement Eis et le système d'impulsion en série dans un seul appareil.

#### Principe de fonctionnement

Alex EIS 610-1200 nm aralığındaki değişebilen dalga boyu ve 3 boyutlu epilasyon sistemini içerisinde barındıran, Pulse'lı ışımaya teknolojisi ve ekstra soğutmalı başlığı sayesinde yanma riski minimuma indirilmiş ve acı hissi azaltılmıştır. Seri atım özelliği ile de hızı ve konforu artırılarak mükemmel bir epilasyon deneyimi sunmaktadır.

#### Contenu technologique

L'épilation peut être réalisée en choisissant le système idéal parmi les deux technologies différentes qu'il contient : Ce système, qui peut être utilisé avec la technologie de radiation pulsée et le système d'impulsion carrée, permet de réaliser une épilation efficace et sûre, même sur les poils fins et les peaux foncées. En outre, un processus hygiénique est également assuré grâce aux embouts en silicone personnalisés qui peuvent être utilisés avec la tête.+Shr System : La tête refroidie permet une application confortable en minimisant la sensation de douleur, tandis que le système d'impulsions en série permet une épilation beaucoup plus rapide et efficace.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	DIMENSIONS 50 * 120 * 64 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
POIDS	70.55 KG
ÉCRAN	ÉCRAN TACTILE 8"
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
TAILLE DES ONDES	610 - 1200 NM
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	REFROIDISSEMENT PELTIER - EAU - AIR
INTERVALLE DE TRAVAIL	10-50 J
SYSTÈME DE TRAVAIL	IMPACT, UNIQUE
COULEUR	GRIS (EN OPTION)
TITRES UTILISÉS	TÊTE ALEX, TÊTE EIS

#### Avantages pour les entreprises

- Facilité à répondre aux demandes technologiques et aux exigences des personnes grâce aux 2 technologies qu'il héberge.
- Gain de temps grâce à une application rapide et pratique.
- Facilité d'utilisation grâce au design ergonomique et à l'écran tactile numérique intelligent.
- Offre un risque extrêmement faible d'effets secondaires avec un praticien qualifié.
- Possibilité d'épilation en 4 saisons grâce à une technologie de nouvelle génération. Le coût de la prise de vue est approprié.
- Possibilité d'application hygiénique avec des têtes personnalisées en silicone remplaçables.
- Application efficace et confortable grâce à la longueur d'onde 610-1200nm et à la technologie de photo-épilation 3D.
- Économie d'espace et de coûts grâce à ses deux systèmes différents.
- Épilation confortable avec un seuil de douleur bas.
- Le système d'air froid amélioré et la tête extra refroidie augmentent le confort de l'épilation en réduisant le risque de lésions cutanées.

#### Avantages pour l'utilisateur final

Confort d'épilation possible même après la première séance avec le système Alex.  
La technologie idéale pour les personnes ayant une structure capillaire épaisse  
Épilation efficace en toute saison.  
Processus d'épilation rapide avec des intervalles de séances courts.  
Après la procédure, vous pouvez continuer votre vie quotidienne sans interruption.  
Pendant le processus d'épilation du corps entier  
Possibilité d'une épilation indolore et confortable.  
Avantage de l'utilisation d'une technologie différente pour la même zone mais pour des types de poils différents.





## TECHNOLOGIE D'ÉPILATION EN 3D PEUT ÊTRE UTILISÉ PENDANT LES 4 SAISONS ET PEUT ÊTRE APPLIQUÉ À DE NOMBREUX TYPES DE PEAU



Alex Premium est un appareil de photo-épilation à double tête développé par le Groupe Mormed et équipé de la technologie la plus récente, qui offre la technologie de radiation Pulse qui divise l'énergie d'un seul coup en 2-3 ou 4 et le système d'impulsion en série avec la tête de refroidissement Eis dans un seul appareil.

### Principe de fonctionnement

Alex Premium, qui contient la longueur d'onde 610-1200 nm la plus efficace et le système d'épilation 3D requis pour le follicule pileux, la technologie de radiation pulsée et la tête extra refroidie minimisent le risque de brûlure et réduisent la sensation de douleur. Il offre une expérience d'épilation parfaite en augmentant la vitesse et le confort grâce à sa fonction d'impulsion en série.

### Contenu technologique

L'épilation peut être réalisée en choisissant le système idéal parmi les deux technologies différentes qu'il contient : Ce système, qui peut être appliqué avec la technologie des radiations pulsées et le système d'impulsions en série en divisant une seule impulsion en 2-3 ou 4, permet de réaliser une épilation efficace et fiable même sur les poils fins et les peaux foncées. En outre, alors qu'une procédure hygiénique personnalisée est offerte avec une tête en silicone, un confort supplémentaire est fourni en réduisant le niveau de douleur avec le système de soufflage d'air froid Air-Liquid-Tec.+Shr System : Une application confortable est offerte en minimisant la sensation de douleur grâce à la tête refroidie, mais en même temps, des procédures d'épilation beaucoup plus rapides et efficaces peuvent être effectuées avec le système d'impulsion en série.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


DIMENSIONS	60 * 83 * 115 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
POIDS	90.55 KG
ÉCRAN	ÉCRAN TACTILE DE 10,4 POUCES
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (OPTIONNEL)
TAILLE DES ONDES	610 - 1200 NM
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	PELTIER - EAU - AIR
INTERVALLE DE TRAVAIL	10-50 J
SYSTÈME DE TRAVAIL	IMPACT, UNIQUE
COULEUR	VIOLET FONCÉ (OPTIONNEL)
TITRES UTILISÉS	TÊTE ALEX, TÊTE EIS

### Avantages pour les entreprises

- Gain de temps grâce à une application rapide et pratique.
- Permet des séances confortables et continues grâce à son puissant système de refroidissement.
- Conception ergonomique et facilité d'utilisation grâce à l'écran tactile numérique intelligent.
- Risque extrêmement faible d'effets secondaires avec un praticien qualifié.
- Possibilité d'épilation en 4 saisons avec une technologie de nouvelle génération.
- Le coût de l'épilation est approprié.
- Possibilité d'application hygiénique avec des têtes personnalisées en silicone remplaçables.
- Application efficace et confortable grâce à la longueur d'onde 610-1200nm et à la technologie de photo-épilation 3D.
- Économie d'espace et de coûts grâce à ses deux systèmes différents.
- Le système d'air froid amélioré et la tête extra refroidie augmentent le confort de l'épilation en réduisant le risque de lésions cutanées.


### Avantages pour l'utilisateur final

Facilité de choix de la technologie. Utilisation d'un seul appareil pour différents types de poils sur le corps.  
Épilation indolore et confortable.  
Technologie idéale pour les poils épais du dos de l'homme.  
Épilation efficace en toute saison.  
Processus d'épilation rapide, durée des séances courte.  
Haut niveau de confort pendant les procédures d'épilation du corps entier.  
Possibilité de poursuivre votre vie quotidienne après la procédure sans interruption.  
Possibilité de s'épiler sans gel.

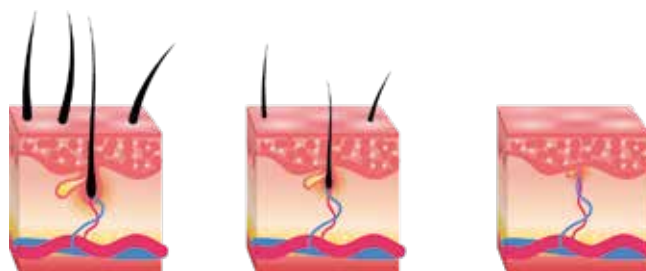



# LES PLUS EFFICACES AU MONDE EN MATIÈRE DE 3D ET LA TECHNOLOGIE DE L'ÉPILATION PULSÉE

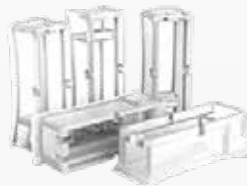

Alex PLUS est un appareil de photo-épilation de nouvelle génération développé par le Groupe Mormed, qui assure une forte transmission d'énergie aux follicules pileux grâce à la technologie des impulsions divisibles (2-4), offre des résultats probants même sur les peaux foncées et les poils fins, et permet en même temps des applications d'épilation beaucoup plus confortables grâce à son système d'air froid intégré.

### Principe de fonctionnement

Alex Plus contient les longueurs d'onde les plus efficaces et les plus performantes dans la gamme des 610-1200 nm nécessaires au follicule pileux. Grâce à la technologie du rayonnement pulsé et au système d'air froid intégré, le risque de brûlure de la peau est minimisé et la sensation de douleur est réduite, offrant une expérience d'épilation efficace et saine.

### Contenu technologique

Système Alex : Ce système, qui peut être utilisé avec la technologie des rayons pulsés, permet une épilation efficace et fiable, même sur les poils fins et les peaux foncées. En outre, alors qu'une procédure hygiénique personnalisée est assurée par une tête en silicone, un confort supplémentaire est apporté en réduisant le niveau de douleur grâce au système de soufflage d'air froid.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


DIMENSIONS	50 * 120 * 50 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
POIDS	67 KG
ÉCRAN	8" ECRAN TOUCH
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
TAILLE DES ONDES	610 - 1200 NM
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	EAU - AIR
INTERVALLE DE TRAVAIL	10-50 J
SYSTÈME DE TRAVAIL	DARBED, SIMPLE
COULEUR	BLANC (OPTIONNEL)
TITRES UTILISÉS	CAPUCHON ALEX

### Avantages pour les entreprises

- Il permet de gagner du temps grâce à une application rapide et pratique.
- Minimise le besoin de service technique grâce à ses consommables durables et résistants.
- Il offre une facilité d'utilisation grâce à sa conception ergonomique et à son écran tactile numérique intelligent.
- Il permet une épilation par un praticien qualifié avec un risque extrêmement faible d'effets secondaires.
- Il permet une épilation confortable avec un seuil de douleur bas.
- La possibilité de traiter sans utiliser de gel.
- Possibilité d'application hygiénique avec des têtes personnalisées en silicone remplaçables.
- Application efficace et confortable grâce à la longueur d'onde 610-1200nm et à la technologie de photo-épilation 3D.
- Le système d'air froid intégré réduit le risque de lésions cutanées et augmente le confort de l'épilation.

### Avantages pour l'utilisateur final

Il permet une épilation hygiénique grâce à des têtes en silicone personnalisées.  
Épilation indolore et confortable grâce au système de soufflage d'air froid.  
Épilation sûre sans dommages pour la peau et sans taches sur les peaux foncées.  
Confort élevé pendant l'épilation de tout le corps.  
Technologie idéale pour les personnes ayant des cheveux épais.  
Épilation efficace en toute saison.  
Processus d'épilation rapide, à intervalles courts.  
Après la procédure, vous pouvez continuer votre vie quotidienne sans interruption.

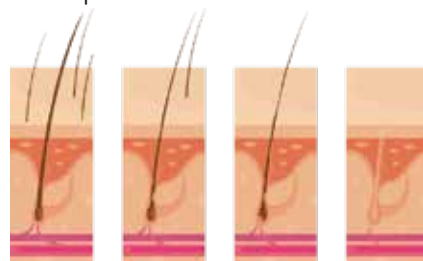



**TECHNOLOGIE IPL DE NOUVELLE GÉNÉRATION BASÉE SUR LA CRÉATIVITÉ ET L'INNOVATION**  
HAUT NIVEAU DE SATISFACTION DES CLIENTS AVEC MAGIC PRO



Magic Pro est un appareil de photo épilation avec une longueur d'onde de 610-1200nm, qui peut être déclenché 10 fois par seconde grâce à la technologie des impulsions en série et peut être traité en toute sécurité pendant 4 saisons grâce à sa tête de refroidissement Eis. Cette technologie développée par le groupe Mormed offre également une utilisation plus fonctionnelle grâce à son grand écran.

### Principe de fonctionnement

Magic Pro, avec sa technologie de tir rapide, peut délivrer chaque tir sous la peau en quelques millisecondes ; cela vous permet de délivrer la bonne énergie à la racine du poil autant que nécessaire. Grâce à la tête Eis extra refroidie, le risque de brûlure est minimisé et la sensation de douleur est réduite. Avec sa fonction d'impulsion rapide, il offre une possibilité d'épilation idéale en augmentant la vitesse et le confort.

### Contenu technologique

Système +Shr : Grâce à la tête Eis extra-refroidie, la sensation de douleur est minimisée et l'application est confortable. En même temps, le système Serial pulse permet une épilation beaucoup plus rapide et efficace.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	60 * 100 * 87 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
POIDS	55 KG
ÉCRAN	10.4" ECRAN TOUCH
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
TAILLE DES ONDES	610 - 1200 NM
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	PELTIER - EAU - AIR
INTERVALLE DE TRAVAIL	10-50 J
SYSTÈME DE TRAVAIL	DARBED, SIMPLE
COULEUR	NOIR (OPTIONNEL)
TITRES UTILISÉS	EN-TÊTE EIS

### Avantages pour les entreprises

- Gain de temps grâce à une application rapide et pratique.
- Permet des séances confortables et continues grâce à son puissant système de refroidissement.
- Facilité d'utilisation grâce au design ergonomique et à l'écran tactile numérique intelligent.
- Permet une épilation avec un praticien qualifié avec un risque extrêmement faible d'effets secondaires.
- Minimise les séances de contrôle grâce à la technologie +SHR.
- Épilation confortable avec un seuil de douleur bas.
- Possibilité d'épilation en 4 saisons grâce à la technologie de nouvelle génération.
- Le coût de l'appareil est raisonnable.
- La tête refroidie améliore le confort de l'épilation en réduisant le risque de lésions cutanées.

### Avantages pour l'utilisateur final

Épilation indolore et confortable. Épilation sûre sur les peaux foncées. Confort élevé pendant les procédures d'épilation du corps entier. Épilation efficace en toute saison sans retarder votre vie sociale. Processus d'épilation rapide avec des intervalles de séances courts. Vous pouvez continuer votre vie quotidienne sans interruption après la procédure.





## TECHNOLOGIE DE PHOTO-ÉPILATION RAPIDE, SÛRE ET EXTRA-FRAÎCHE ÉPILATION CONFORTABLE



Magic Eis est un appareil de photo épilation avec une longueur d'onde de 610-1200nm, qui peut être tiré 10 fois par seconde avec la technologie +SHR et comprend également une tête de refroidissement Eis et un système d'impulsion en série de haut niveau. Grâce à cette technologie développée par Mormed Group, il peut être traité en toute sécurité pendant 4 saisons.

### Principe de fonctionnement

Magic Eis peut transmettre la lumière sous la peau en quelques millisecondes à chaque tir grâce à la technologie +SHR. Grâce à la tête Eis extra refroidie, le risque de brûlure est minimisé et la sensation de douleur est réduite. Avec sa fonction d'impulsion rapide, sa vitesse et son confort sont accrus, ce qui permet une application idéale de l'épilation.

### Contenu technologique

Système +Shr : Grâce à la tête Eis extra refroidie, la sensation de douleur est minimisée et l'application est confortable. En même temps, le système d'impulsion en série permet une épilation beaucoup plus rapide et plus efficace.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	50 * 120 * 50 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
POIDS	48 K
ÉCRAN	G8" ECRAN TOUCH
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
TAILLE DES ONDES	610 - 1200 NM
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	SU - PELTIER
INTERVALLE DE TRAVAIL	10-50 J
SYSTÈME DE TRAVAIL	DARBED, SINGLE
COULEUR	BLEU (OPTIONNEL)
TITRES UTILISÉS	EN-TÊTE DE SIE

### Avantages pour les entreprises

- Gain de temps grâce à une application rapide et pratique.
- Permet des séances confortables et continues grâce à son puissant système de refroidissement.
- Facilité d'utilisation grâce au design ergonomique et à l'écran tactile numérique intelligent.
- Le praticien qualifié assure une épilation avec un risque extrêmement faible d'effets secondaires.
- Épilation confortable avec un seuil de douleur bas.
- Possibilité d'épilation en 4 saisons grâce à une technologie de nouvelle génération.
- Le coût de l'appareil est raisonnable.
- La tête refroidie améliore le confort de l'épilation en réduisant le risque de lésions cutanées.

### Avantages pour l'utilisateur final

Épilation indolore et confortable.

Confort élevé pendant les procédures d'épilation du corps entier.

Sans retarder votre vie sociale

Une épilation efficace en toute saison.

Processus d'épilation rapide, durée des séances courte.

Après l'intervention, vous pouvez continuer votre vie quotidienne sans interruption.







MAGICpulse

L'IMPULSION MAGIQUE NE PREND JAMAIS DE PAUSE SANS QUE VOUS NE PRENIEZ DE PAUSE  
TECHNOLOGIE D'ÉPILATION RAPIDE, EFFICACE ET ÉCONOMIQUE + TÊTE D'ÉPILATION



Magic Pulse est une technologie de photo-épilation qui vise à fournir une application d'épilation plus confortable et plus sûre avec des modes de processus plus efficaces. Alors qu'une application efficace et confortable peut être effectuée sur de nombreux types de peau, le temps d'application est minimisé en tirant 10 coups par seconde avec la technologie de tir en série. Grâce à cette technologie développée par le groupe Mormed, il est possible d'effectuer une épilation ininterrompue pendant 4 saisons.

### Principe de fonctionnement

Magic Pulse, avec sa technologie d'impulsion en série, vous permet de délivrer chaque impulsion sous la peau en quelques millisecondes, tout en fournissant suffisamment d'énergie à la racine du poil. Grâce à sa fonction d'impulsion en série, il permet un processus d'épilation idéal avec une vitesse et un confort accrus.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	50 * 120 * 50 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
POIDS	48 KG
ÉCRAN	8" ECRAN TOUCH
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (OPTIONNEL)
TAILLE DES ONDES	610 - 1200 NM
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	PELTIER - EAU
INTERVALLE DE TRAVAIL	10-50 J
SYSTÈME DE TRAVAIL	DARBED, SIMPLE
COULEUR	ROSE (OPTIONNEL)
TITRES UTILISÉS	EN-TÊTE DU SIE

### Contenu technologique

Système +Shr : Le système de pulsation en série permet une application confortable en minimisant la sensation de douleur, tout en offrant des procédures d'épilation beaucoup plus rapides et efficaces.

Avantages pour les entreprises

Gain de temps grâce à une application rapide et pratique. Grâce à ses consommables durables, la nécessité d'un service technique est faible.

Grâce à son puissant système de refroidissement, il offre des séances confortables et continues.

Facilité d'utilisation grâce à son design ergonomique et à son écran tactile numérique intelligent.

Praticien qualifié avec un risque extrêmement faible d'effets secondaires du processus d'épilation.

Épilation confortable pour les personnes dont le seuil de douleur est bas.

Possibilité d'épilation en 4 saisons grâce à la nouvelle génération de technologie +shr.

Le coût de l'épilation est adapté.

### Avantages pour l'utilisateur final

Une épilation confortable avec un minimum de douleur. Un grand confort pendant les procédures d'épilation du corps entier. Une épilation efficace en toute saison sans retarder votre vie sociale. Un processus d'épilation rapide, des séances courtes. La possibilité de continuer votre vie quotidienne sans interruption après la procédure.



# DISPOSITIF D'ÉPILATION À L'AIGUILLE

TOUS LES TYPES D'ÉPILATION AU  
LASER ET DE PHOTO-ÉPILATION  
L'ÉPILATION LA PLUS EFFICACE  
LORSQU'ELLE EST INSUFFISANTE



L'épilateur à aiguille est un appareil d'épilation à aiguille à deux systèmes qui comprend le système Flash et le système Thermolyse, ce qui permet une application avec des méthodes classiques et indolores. C'est l'un des systèmes d'épilation permanente qui donne les résultats les plus efficaces en matière d'épilation permanente, qui est classique mais pas démodée. L'épilation à aiguille peut être utilisée sur la plupart des parties du corps, y compris les sourcils, le visage, l'abdomen, les cuisses, les seins et les jambes.

## Principe de fonctionnement

Pour détruire le follicule pileux, un courant électrique est appliqué dans le follicule pileux à l'aide d'une électrode très fine en forme d'aiguille ou d'une sonde métallique. Une sonde fine suit la tige du cheveu vers les papilles dermiques et, en même temps, un courant électrique spécial détruit les papilles. La tige du poil détachée est ensuite retirée.

## Contenu technologique

Contenu technologique. L'électrolyse, qui est une méthode d'épilation du visage ou du corps, est une technologie développée pour détruire directement le centre de croissance du poil à l'aide d'une énergie chimique ou thermique.

## Avantages pour les entreprises


- Permet une épilation efficace des poils gris, blancs, rouges et jaunes.
- Permet une utilisation plus précise et plus efficace grâce à une puissance de courant réglable.
- Permet une épilation efficace lorsque l'épilation au laser et la photo-épilation sont inefficaces.

## Avantages pour l'utilisateur final

Il offre un taux d'effet plus permanent. C'est un système efficace pour les poils blancs. Il augmente le taux de réussite des procédures de type complémentaire et des applications de photo-épilation.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	26 * 34 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
PUISSANCE	25 W
TECHNOLOGIE DE TRAVAIL	FLASH TERMOLYZE
ÉCRAN	RÉGLAGE NUMÉRIQUE DU TEMPS ÉCRAN NUMÉRIQUE À 7 SEGMENTS
COULEUR	TEINTE FUMÉE
RUBRIQUES UTILISÉES	SONDE À AIGUILLE
FRÉQUENCE DE SORTIE	1,2 MHZ

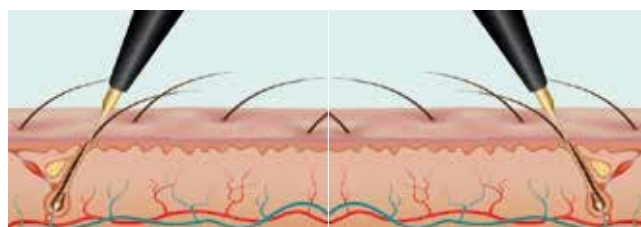

# Tatouage

## SEGMENTATION & CARBON PEELING

### SAFE, HIGH-QUALITY CARBON PEEL WITH TATTOOING



Tatouage est un appareil professionnel d'élimination des pigments et de peeling au charbon développé par Mormed Group, équipé de la technologie laser Q-switched et Nd:yag avec une énergie puissante qui couvre de nombreuses couleurs pour une élimination réussie des pigments. Avec 4 longueurs d'onde différentes, il peut être utilisé en toute sécurité sur de nombreux types de peau. Avec la longueur d'onde de 532 nm, vous pouvez aider à réduire les pigments rouges, orange et jaunes, avec la longueur d'onde de 1064 nm, vous pouvez aider à réduire les pigments noirs et bleus. Les pigments verts peuvent être réduits avec une longueur d'onde de 755 nm. Le peeling au charbon peut être effectué avec une longueur d'onde de 1320nm. Avec Tatouage, vous pouvez effectuer des procédures d'embellissement du contour des sourcils et des lèvres, et avec la tête Carbon Peeling, vous pouvez aider à réduire l'apparence des imperfections et à rétrécir les pores.



Longueur d'onde de 532nm - Pour les tatouages de couleur claire



Longueur d'onde de 755nm - Pour les tatouages de couleur verte



Longueur d'onde 1064nm - Pour les tatouages de couleur foncée



Longueur d'onde 1320nm - Tête de pelage en carbone

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	56 * 110 * 54 CM
VALEURS DE FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
POIDS	44 KG
ÉCRAN	10.4" ECRAN TOUCH
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
TAILLE DES ONDES	532 - 755 - 1064 - 1320 NM
COULEUR	GRIS (OPTIONNEL)
TITRES UTILISÉS	TATOUGE TITLE

### Principe de fonctionnement

Avec ses 4 têtes différentes, il contribue à la correction des problèmes de peau. Il produit des faisceaux laser de haute qualité avec différentes longueurs d'onde à 532, 755, 1064 et 1320nm, qui ciblent les particules de pigment et l'application est faite en déterminant la longueur d'onde appropriée pour la couleur du pigment. Comme les faisceaux ne ciblent que le colorant, il peut être utilisé en toute sécurité sur de nombreux types de peau, quelle que soit leur couleur. Contenu de la technologie

**TATOUAGE :** Il s'agit d'une technologie de lumière efficace pour la dépigmentation et le peeling au charbon grâce à son système de lumière qui envoie de l'énergie de manière uniforme dans l'élimination des pigments et aux options de tête avec une large gamme de couleurs.

### Avantages pour les entreprises

- Dépigmentation réussie et facile de différentes longueurs d'onde. Il permet d'effectuer ◦ opérations.
- Gain de temps grâce à une application rapide et pratique.
- Exigences minimales en matière de service technique grâce à des consommables durables et résistants.
- Permet des séances confortables et continues grâce à son puissant système de refroidissement.
- Facilité d'utilisation grâce à sa conception ergonomique, sa tête légère et son écran tactile numérique intelligent.
- Traitements réussis pour chaque couleur grâce à 4 technologies de longueur d'onde différentes.
- Risque extrêmement faible d'effets secondaires avec un applicateur qualifié.
- Procédure confortable avec un seuil de douleur bas.
- Le coût de la prise de vue est approprié.
- Peut être utilisé en toute sécurité sur de nombreux types de peau.

### Avantages pour l'utilisateur final

Processus de dépigmentation confortable, possibilité de processus rapide et efficace, processus de peeling au carbone réussi grâce à une technologie puissante, avantage d'une utilisation en toute saison, possibilité de poursuivre la vie sociale sans interruption après la procédure.



# HQP

HydrOxyPeel

## L'INNOVATION DANS LES SYSTÈMES DE SOINS DE LA PEAU APPLICATIONS ANTI-VIEILLISSEMENT



Hydroxy Peel est un appareil de soin de la peau de nouvelle génération qui utilise les technologies 10 en 1 de l'aqua peeling et de l'ultra jet peeling pour vous aider à obtenir une peau plus lumineuse et plus belle de manière confortable. La méthode Hydroxy Peel est un système non invasif qui combine des procédures de nettoyage, d'hydratation et de soin de la peau.

### Principe de fonctionnement

Soins holistiques de la peau à l'hydroxy peel ; il aide à se débarrasser des pores larges ou obstrués, des points noirs, du teint inégal, du déséquilibre du sébum, de la sécheresse de la peau et de la perte d'élasticité de la peau.

### Contenu technologique

Hydroxy Peel est une technologie de soins de la peau multifonctionnelle avec tous les équipements qu'elle contient dans les soins généraux de la peau.

### SOLUTIONS

#### A - Solution AHA

L'acide glycolique (AHA) lisse la peau en éliminant les cellules mortes grâce à son pouvoir peeling. En même temps, il donne une peau éclatante et lumineuse. Il réduit les signes de vieillissement et aide à éliminer l'acné et les cicatrices d'acné. Il est décrit comme un hydratant peeling grâce à son effet de rétention d'eau et d'hydratation de la peau.

#### B - Solution nettoyante à base d'acide salicylique BHA

Utilisé pour les peaux grasses et la zone T. L'acide salicylique (BHA) purifie la peau sans l'irriter grâce à son pouvoir peeling. Il aide à réduire le problème des peaux grasses en équilibrant la sécrétion de sébum.

#### C - Hydrater et nourrir la peau

C - Moisturise and Nourish Solution est utilisé pour tous les types de peau qui ont besoin d'hydratation ou après des traitements avec AHA et BHA. Grâce à sa formule spéciale, il adoucit, apaise et hydrate la peau en profondeur.

#### D - Nettoyant

Il permet de nettoyer les résidus dans les tubes du système et de procéder à un nettoyage actif du système après chaque opération.

### Avantages pour les entreprises

Haute efficacité et faible coût. Avantage d'une conception ergonomique. Applications efficaces grâce à des têtes adaptées à chaque région. Économie d'opportunité grâce à la possibilité d'effectuer de nombreuses opérations différentes sur un seul appareil. Facilité d'utilisation grâce à des têtes légères et de petite taille.

### Avantages pour l'utilisateur final

Soins de la peau avec un processus rapide et confortable. Il offre un nettoyage de la peau efficace et de qualité. Applications de soins de la peau qui offrent un effet impeccable, propre, vibrant, lisse et brillant grâce à son utilisation fonctionnelle.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	41 * 124 * 50 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
POIDS	55 KG
ÉCRAN	10.4" ECRAN TOUCH
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
NOMBRE DE TITRES	12
TECHNOLOGIE DE TRAVAIL	ESTHÉTIQUE DE LA PEAU
COULEUR	BLEU FONCÉ (EN OPTION)

### LED TERAPI



Il s'agit d'un système qui convertit la lumière en énergie et aide à revitaliser les cellules sans créer d'effet de chaleur sur les cellules en utilisant des options de lumière de différentes couleurs. Lumière bleue : aide à équilibrer la production de sébum de la peau en cas de peau sujette à l'acné. Lumière verte : aide à équilibrer le teint de la peau. Lumière rouge : aide à équilibrer le teint de la peau : La lumière verte aide à équilibrer le teint de la peau : La lumière rouge stimule la synthèse du collagène : Elle aide à réguler la circulation de la peau, du sang et de la lymphe et à réduire la rougeur de la peau.



### TÊTE D'APPLICATION À FROID

L'application de froid permet de réduire la sensibilité de la peau.



### SPRAY

Après la détection de la peau, il veille à ce que le tonique ou le sérum qui répondra aux besoins de la peau soit facilement diffusé sur la peau.



### AQUA PEELING

Aqua Peeling ; Il permet d'obtenir une peau plus lumineuse et plus belle de manière confortable en utilisant de l'eau et des méthodes d'aspiration.



### ASPIRATEUR

Il est utilisé dans les cas où la peau a besoin d'être aspirée.



### RADIOFRÉQUENCE

La radiofréquence permet à la peau d'être plus tendue grâce à la chaleur qu'elle crée sur la peau.



### PELAGE PAR ULTRASONS

En créant une série d'ondes sonores à la surface de la peau, c'est une méthode qui permet de nettoyer l'épiderme des cellules mortes, des points noirs et du sébum sans irritation.



### PEELING ULTRA JET

Le compresseur d'air de l'appareil envoie une pression d'air en même temps que de l'eau au moment de l'application. De cette manière, l'eau et l'air sont envoyés sur la peau.



### LEVAGE

Le lifting permet d'entraîner les muscles faciaux immobilisés.



### RADIOFRÉQUENCE BIPOLAIRE

La radiofréquence permet à la peau d'être plus tendue grâce à la chaleur qu'elle crée sur la peau.



### ULTRASOUND

Il permet d'assurer l'absorption de produits appropriés et efficaces par la peau grâce aux vibrations des ondes sonores.



**A - AHA Solution**  
Pour tous les types de peau

**B - BHA Acide salicylique**  
Solution purifiante  
Pour les peaux grasses et Peau mixte

**C - Humidifier et Nourish Solution**  
Humidifier et Nourrir

**D - Produits de nettoyage**  
Nettoyage du système  
Reconnaissance

# dermarc

CRÉER UN NOUVEL EFFET  
DANS LES SOINS DE LA  
PEAU, L'AUTO-SOIN DE  
LA PEAU  
LE SYSTÈME QUI ASSURE SON  
RENOUVELLEMENT



## Qu'est-ce que Dermalc ?

Le dermarc, qui peut fonctionner en mode pulsé ou non pulsé, est conçu pour opérer sans contact grâce à des étincelles de courant à haute fréquence.

## Dans quels domaines le Dermalc est-il utilisé ?

Traitements de la peau / Traitements anti-âge / Traitements des vergetures

## Comment Dermalc régénère-t-il la peau ?

Il répare la peau grâce à l'effet thermique formé à la surface de la peau par le courant qu'il produit. Il déclenche les fibres de collagène et d'élastine et lance le processus de régénération. Dermalc est un système efficace de réparation de la peau qui permet d'obtenir la peau lisse souhaitée sur les tissus cutanés problématiques.



## ARC TOUCH IN SKIN CARE 2 ANS DE GARANTIE

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	27 * 30 * 15 CM
VALEURS DE FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
POIDS	4 KG
COURANT	0.25 A
PUISSANCE	PMAX : 5
SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT	5 WARC SYSTEM
COULEUR	OR (OPTION)
TITRES UTILISÉS	DERMARC TITLE





# INITIE LE PROCESSUS DE RÉGÉNÉRATION DE LA PEAU PAR LE VIDE

## SYSTÈME DE RÉPARATION DES FISSURES DE LA PEAU



Striaoff est un système dynamique de réhabilitation des fissures de la peau avec un taux de réussite allant jusqu'à 80%, qui est réalisé en combinant la nouvelle génération d'appareil Strivak avec des solutions à usage domestique et professionnel produites avec une formulation spéciale et en appliquant la technique de traitement appropriée.

### Principe de fonctionnement

Pendant et après l'application, le processus de régénération de la peau est initié à l'aide de solutions à usage domestique et professionnel, en utilisant un système d'aspiration puissant qui peut être ajusté en fonction de la structure de la peau contenue dans le dispositif strivak.

### Contenu technologique

L'appareil Strivak utilise une puissante technologie de vide qui peut être ajustée en fonction de la structure de la peau.

### Avantages pour les entreprises

- Comme il s'adresse à tous les genres (hommes et femmes), vous pouvez toucher une clientèle plus large.
- Vous pouvez faire une application confortable avec ce système de soins de la peau qui n'a presque pas de complications.
- Il s'agit d'une méthode professionnelle qui donne jusqu'à 80 % de résultats dès la première séance.
- Vous aurez une longueur d'avance sur vos concurrents en augmentant votre portefeuille de services.
- Vous pouvez augmenter la satisfaction de vos clients en apportant une solution à ce problème généralement sensible.
- Avantage d'une conception ergonomique et portable.
- Utilisation facile et pratique grâce à sa tête petite et légère. possibilité
- Haute efficacité à faible coût.

### Avantages pour l'utilisateur final

Durée d'intervention courte avec possibilité d'application rapide et efficace. Amélioration de la nutrition de la peau grâce aux produits utilisés. Soulagement psychologique et physique. Possibilité de poursuivre la vie quotidienne après l'intervention sans aucune intervention chirurgicale (non invasif).

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	41 * 124 * 50 CM
VALEURS DE FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
POIDS	10 KG
SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT	ASPIRATEUR
COULEUR	BLANC (EN OPTION)
NOMBRE DE TITRES	1
TITRES UTILISÉS	STRIVAK TITRE

## SOLUTIONS

### UTILISATION PROFESSIONNELLE

NUMÉRO 1 : Le peroxyde d'hydrogène est utilisé pour désinfecter la peau avant l'application afin d'éliminer les germes et les bactéries.

NUMÉRO 2 : La combinaison des ingrédients actifs accélère la circulation sanguine et déclenche le renouvellement du collagène et des cellules de la peau morte.

NUMÉRO 3 : Grâce aux huiles végétales bénéfiques pour le corps, l'efficacité du processus est accrue par l'utilisation d'un glissement de la tête pendant le processus.

NUMÉRO 4 : Il est utilisé pour accélérer le processus de reformation de la peau afin d'éliminer les toxines présentes dans notre corps (poison / mal visible dans l'organisme).

NUMÉRO 5 : Il est utilisé pour poursuivre la régénération cellulaire que nous avons relancée, pour resserrer la peau et pour égaliser l'apparence des stries avec le teint de la peau grâce aux acides bénéfiques qu'il contient.

ZERO : Il s'agit d'une lotion d'urgence utilisée pour neutraliser le processus et détendre le corps en cas d'effets inattendus.

### USAGE DOMESTIQUE

Il s'agit d'une série de soins à domicile utilisés pour soigner les vergetures après un traitement professionnel de rééducation des vergetures.

NUMÉRO 1 : En créant un effet thermique sur le corps, celui-ci est activé en accélérant la circulation sanguine et le métabolisme et aide à augmenter la production de collagène.

NUMÉRO 2 : Hydrate la peau et équilibre son PH. NUMÉRO 3 : Il nettoie la peau des toxines et aide à égaliser le teint et à resserrer la peau.

NUMÉRO 4 : Il favorise la production de collagène dans la peau et aide à maintenir le renouvellement cellulaire. L'objectif est d'obtenir une peau plus lisse et plus vivante.

ZERO : Il s'agit d'une lotion d'urgence utilisée pour neutraliser le processus et détendre le corps en cas d'effets inattendus.





## LA TECHNOLOGIE POUR VOUS AIDER À OBTENIR UN TRAITEMENT APPROPRIÉ

### ANALYSEUR DE PEAU



Viso Care est un appareil d'analyse de la peau utilisé pour l'imagerie de la peau sous-cutanée dans le but de contribuer au diagnostic avant les soins et de mesurer le taux de réussite de la procédure après le traitement avec le système du miroir magique en utilisant l'image numérique grâce à ses technologies actuelles telles que le RVB et l'UV.

#### Principe de fonctionnement

Viso Care crée une image numérique détaillée du visage grâce au système de miroir magique et à l'équipement d'éclairage à l'intérieur, ainsi qu'au fonctionnement simultané de plusieurs caméras à haute résolution. De cette manière, de nombreuses analyses telles que les taches, les rides, l'humidité de la peau, le sébum et la pigmentation sont effectuées.

#### Contenu technologique

Le système d'analyse du scanner de la peau est une technologie d'analyse d'image avancée qui utilise des systèmes d'image numérique à travers le spectre RVB et UV. Qualité d'image HD - Système ANDROID - Technologie de lumière UV - Qualité d'image RVB

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VALEURS DE FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE	220 - 240 V / 50-60 HZ
DIMENSION	42 * 36 * 56 CM
POIDS	8 KG
TAILLE DE L'ÉCRAN	10.1 INCH
QUALITÉ DE L'IMAGE	HD
QUALITÉ DE LA COLORATION	RGB
SYSTÈME DE TRAVAIL	ANALYSE DE LA PEAU
VITESSE D'ANALYSE	20 SN
LANGUES UTILISÉES	TURQUE
COULEUR	BLANC
TECHNOLOGIE DE TRAVAIL	RAYON UV
RAPPORT DE CORRECTION	%95
MÂCHOIRES, MATÉRIAU DU FRONTON	SOFTSILICON

#### Avantages pour les entreprises

- La satisfaction et la confiance du patient peuvent être gagnées par l'analyse avant le diagnostic et après le traitement et la mesure du succès de la procédure.
- Une recommandation de produit plus précise peut être faite avec l'analyse de la peau.
- Des résultats réussis peuvent être présentés avec la détection de l'analyse avant l'application.
- Détermination du traitement approprié avant et après la procédure.
- Les images du visage du client peuvent être comparées avant et après les soins de la peau.
- Le succès du traitement peut être mesuré avec des photos prises avant et après les procédures.
- Avantage de la conception ergonomique et portable.
- Haute efficacité à faible coût.

#### Avantages pour l'utilisateur final

Procédure rapide et confortable. Augmentation du taux de réussite de la procédure à effectuer grâce à un diagnostic correct.



DES RÉSULTATS FRUCTUEUX GRÂCE À LA DÉTECTION DE L'ANALYSE PRÉALABLE À L'APPLICATION



RECOMMANDATION DE PRODUITS IDÉAUX AVEC ANALYSE DE LA PEAU



LA DÉTERMINATION DES SOINS APPROPRIÉS AVANT ET APRÈS LA PROCÉDURE



AVEC TECHNOLOGIE  
ULTRASONIQUE  
POCHE DE SERRAGE



## ECO HIFU

PAS DE CHIRURGIE  
LIFTING DU VISAGE ET DE LA PEAU



## FraxiHD

MICRO AIGUILLE ET RF  
UNE INCROYABLE  
HARMONIE DE  
TECHNOLOGIES



HD Focus 4D est un appareil de soins de la peau qui permet de resserrer la peau à l'aide d'ondes ultrasonores atteignant le tissu sous-cutané sans aucune procédure chirurgicale grâce à sa technologie ultrasonore avancée et à ses différentes têtes pour chaque région. HD Focus 4D offre les avantages de la technique de lifting du visage et de la peau, une méthode de soins de la peau populaire, avec une expérience confortable et efficace sans avoir recours à une procédure chirurgicale (non invasif).

### Principe de fonctionnement

Grâce à la technologie HD Focus 4D Nouvelle Génération, il atteint le tissu sous-cutané et concentre l'énergie thermique directement sur la zone concernée à l'aide du système à ultrasons. Il stimule ainsi la couche inférieure de la peau et lui permet de se renouveler. En conséquence, il améliore la texture de la peau, réduit le relâchement cutané et donne un aspect lisse et esthétique.

### Contenu technologique

HD Focus 4D est une nouvelle génération de technologie à ultrasons en 4 dimensions avec différentes têtes avec un rapport de fréquence de 4 MHz adapté à chaque région.

Tête de 3,0 mm - Tout le visage sauf autour des lèvres.

Tête de 4,5 mm - Joue inférieure et double menton.

Tête de 6,0 mm - Poitrine et lifting.

Tête de 13 mm - Sous le bras, le mollet et la partie externe du mollet.

16 mm başlık - Kol sarkması ve bacaklarda basen iç ve dış baldır.

### Avantages pour les entreprises

◦ Offre une grande efficacité à faible coût. ◦ Avantage d'une conception ergonomique et portable. ◦ Application sur une large zone grâce aux têtes interchangeables. ◦ Facile à utiliser grâce à sa tête petite et légère. ◦ Crée un effet liftant même en une seule application. ◦ Avantage d'une application efficace grâce aux têtes applicables à chaque zone.

### Avantages pour l'utilisateur final

Raffermissment de la peau sans intervention chirurgicale (non invasif). - Possibilité de poursuivre la vie quotidienne après l'intervention. - Élimination de la graisse et de la cellulite grâce à une procédure rapide et confortable. - Resserrement des pores sans intervention chirurgicale. - Aide au rajeunissement de la peau grâce à une procédure rapide et confortable. - Amélioration de la qualité de vie grâce à la fonction de resserrement de la peau.

Eco HIFU est un appareil de soins de la peau qui permet d'effectuer un lifting non chirurgical du visage et de la peau grâce à la technologie des ultrasons focalisés et à des têtes spéciales pour chaque zone. C'est un choix idéal pour les personnes qui souhaitent rajeunir leur peau, paraître plus jeunes et réduire les effets du vieillissement sur la peau, qui ne se sentent pas prêtes à subir un lifting mais qui recherchent une solution non invasive et non contraignante pour répondre à ce type de demande.

### Principe de fonctionnement

La technologie contenue dans Eco HIFU concentre l'énergie thermique sur le tissu sous-cutané avec des ondes ultrasoniques sur la zone à traiter et stimule et régénère directement la couche inférieure de la peau. En conséquence, il améliore la texture de la peau, réduit le relâchement cutané et donne à la peau un aspect plus jeune et plus reposé. Eco HIFU assure la tension de la peau en augmentant la synthèse du collagène. De cette manière, le lifting naturel du visage et de la peau est assuré sans temps de récupération.

### Contenu technologique

Eco HIFU dispose d'une technologie à ultrasons de nouvelle génération avec 5 têtes différentes avec une gamme de fréquences de 4 Mhz - 7 Mhz convenant à chaque région. Chaque cartouche de l'appareil Eco HIFU émet plus de 10000 impulsions.

Tête de 1,5 mm - Contour des yeux et front

Tête de 3,0 mm - Joues et dessous du menton

Tête de 4,5 mm - Sous la joue et le menton

Tête de 8,0 mm - Bras, ventre et jambe

Tête de 13 mm - Bras, ventre et jambe

FRAXI HD, une combinaison idéale de micro-aiguilles et de technologie RF, est un appareil idéal qui aide à rajeunir la peau en concentrant l'énergie RF directement dans une zone spécifique de la peau avec des micro-aiguilles peu invasives. La caractéristique qui distingue FRAXI HD des applications basées sur le laser est la durée de la procédure et le résultat. En particulier pour la zone du visage, FRAXI HD permet d'augmenter l'éclat de la peau et de réduire les cicatrices d'acné et les taches. FRAXI HD permet également d'obtenir des résultats satisfaisants pour les cicatrices d'acné, les rides, les taches cutanées et les vergetures.

### Principe de fonctionnement

La méthode de travail du FRAXI HD vise à ouvrir de petits trous dans la peau à l'aide de micro-aiguilles et à aider la peau à les réparer et à les régénérer. L'énergie de radiofréquence administrée sous la peau chauffe la peau et, sous l'effet du chauffage, les fibres de collagène se raccourcissent et la peau se rétablit et se resserre. En outre, la synthèse du collagène est stimulée par l'effet de la chaleur et la peau se répare et se régénère au fil du temps.

### Contenu technologique

Le système RF fractionné est une technologie de lifting dans laquelle les systèmes de micro-aiguilles et de radiofréquence peuvent fonctionner simultanément et stimuler en donnant de la chaleur sous la peau avec ses têtes adaptées à différentes profondeurs de peau.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PUISSANCE	150 W
CARTRIDES	1,5 MM, 3,0 MM, 4,5 MM (FACE) (EN OPTION) 6,0 MM, 8,0 MM, 10,0 MM, 13,0 MM, 16,0 MM (CORPS) (EN OPTION)
COULEUR	GRIS
DURÉE DE VIE DE LA CARTOUCHE	20000 COUPS
FRÉQUENCE	4MHZ
PUISSANCE ÉNERGÉTIQUE	0,1-2J RÉGLABLE
TENSION	220/110V;50/60 HZ
TAILLE DE L'EMBALLAGE	59*40*25CM
POIDS	12 KG

VALEURS DE FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
POIDS	31 KG
DIMENSIONS	56 * 36 * 67 CM
SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT	ULTRASON
COULEUR	GRIS
RUBRIQUES UTILISÉES	TÊTE DE FOCALISATION HD
TEMPÉRATURE DE CHAUFFAGE	JUSQU'À 65 °C
BUT DE L'UTILISATION	LEVAGE
CARTOUCHES UTILISÉES	1,5 MM, 3 MM, 4,5 MM
TECHNOLOGIE DE TRAVAIL	FOCUSED ULTRASOUND

DIMENSION	43 * 35,4 * 26 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50-60 HZ
POIDS	15 KG
SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT	RENOUVELLEMENT DE LA PEAU
COULEUR	BLANC
TITRES UTILISÉS	FRAXI HD HEADBOARD
TYPES DE CARTOUCHES	10/25*64 AIGUILLE
ÉCRAN	8" ÉCRAN TACTILE
TECHNOLOGIE DE TRAVAIL	FRÉQUENCE RADIO
TEMPÉRATURE DE CHAUFFAGE	JUSQU'À 65 °C





LA BEAUTÉ PAR L'EAU

## 4+1 SOINS DE LA PEAU

## 8+1 SOINS DE LA PEAU

## 14+1 SOINS DE LA PEAU



### Aqua Peeling

L'appareil H2O Aqua Peeling est un appareil de soins de la peau entièrement fonctionnel qui vise le soin et le nettoyage de la peau en général, chacun étant équipé de différentes têtes technologiques (Aqua Peeling, Ultrasonic Peeling, Radiofrequency, Spray, Smooth, Ultrasound Therapy).

### Principe de fonctionnement

H2O Aqua Peeling permet de nettoyer les pores, d'éliminer les points noirs, de resserrer les pores, de renforcer la texture et la structure de la peau, d'égaliser le teint et d'éliminer les rides fines. Il s'agit d'un soin de la peau efficace et fiable, dont le contenu comporte de nombreux titres différents.

### Contenu technologique

Aqua Peeling ; Il s'agit d'une application de soin de nouvelle génération qui nettoie votre peau en profondeur et la débarrasse des cellules mortes et des points noirs, tout en lui apportant l'hydratation dont elle a besoin. L'application contient un effet anti-âge qui rend la peau éclatante après un soin rafraîchissant. Peeling ultrasonique ; Il s'agit d'une méthode de peeling efficace qui permet de purifier la peau des cellules mortes grâce à une série d'ondes sonores. Radiofréquence ; En chauffant la couche inférieure de la peau, elle permet de resserrer et d'ouvrir les rides fines, de redresser la bajoue, de réduire les pattes d'oie et les rides nasogéniennes, d'augmenter la production de collagène et d'avoir une peau plus ferme. Spray ; Grâce au tube dans la tête, il assure que les produits tels que le tonique, le sérum, les vitamines que nous utilisons pendant les soins de la peau sont distribués uniformément sur la peau de manière pressurisée. Smooth Therapy ; Grâce à son puissant moteur de refroidissement, il est utilisé pour éliminer les rougeurs sur la peau à la fin de toutes les applications que vous faites et pour soulager l'inflammation sur la peau en relaxant la peau. Ultrasons ; Les ondes sonores ultrasoniques sont utilisées pour transmettre les sérum et les vitamines dont notre peau a besoin à la couche inférieure de la peau.

### Avantages pour les entreprises

Augmente la diversité des procédures dans votre service de soins cutanés grâce à son coût d'achat. Permet de réaliser des économies grâce à la possibilité d'effectuer de nombreuses procédures différentes sur un seul appareil. Avantage de la conception ergonomique et portable. Facile à utiliser grâce à des têtes petites et légères.

### Avantages pour l'utilisateur final

Il améliore la qualité de vie grâce à sa fonction de resserrement de la peau. Il offre un nettoyage de la peau efficace et de qualité. Les applications de soins de la peau qui offrent un effet impeccable, propre, vibrant, lisse et brillant grâce à son utilisation fonctionnelle.

### DISPOSITIF MULTIFONCTIONNEL DE SOIN DE LA PEAU

Les appareils de soins de la peau sont des appareils qui permettent l'application de nombreuses techniques différentes nécessaires aux soins de la peau avec leurs têtes dotées de différentes fonctions.

### Appareil de soin de la peau 4+1 fonctions

1.vapeur / 2.ozone / 3.boucle / 4.frimator / 5.haute fréquence

### Appareil de soin de la peau 8+1 fonctions

1.vapeur / 2.ozone / 3.boucle / 4.frimator / 5.haute fréquence / 6.vide / 7.spray / 8.iontophorèse / 9.levage

### Appareil de soin de la peau 12+1 fonctions

1. ozone / 2. vapeur / 3. loupe lumineuse / 4. haute fréquence / 5. galvanique / 6. vide / 7. pulvérisation / 8. pulvérisation / 9. analyse de la peau / 10. frimator / 11. lifting / 12. métabolique LPG / 13. peeling au diamant / 14. iontophorèse / 15. marteau à chaud / 16. marteau à froid.

### Avantages pour les entreprises

◦ Il s'agit d'un équipement recommandé pour une utilisation dans les salons de beauté et d'esthétique avec de nombreux titres fonctionnels. Vous pouvez augmenter le portefeuille de services et l'efficacité de votre entreprise avec cet appareil où vous pouvez effectuer des applications complémentaires et auxiliaires.

### Spécifications techniques de l'appareil

Voltage : 110-220V / Fréquence : 50Hz/60Hz / Puissance : 950 W / Taille : 150x 48x 43cm / Poids : 25-35kg

### PETITE PAR LA TAILLE, GRANDE PAR LA FONCTION



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VALEURS DE FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
PUISSANCE	PMAX : 350 W
POIDS	10 KG
DIMENSIONS	46 * 30 * 43 CM
TECHNOLOGIE DE TRAVAIL	ESTHÉTIQUE DE LA PEAU
COULEUR	BLANC
ÉCRAN	7" TOUCH SCREEN
RUBRIQUES UTILISÉES	BUSE D'ASPIRATION, BUSE À ULTRASONS, BUSE DE LAVAGE, BUSE FROID-CHAUD, BUSE DE PULVÉRISATION, BUSE DE LEVAGE, RFOPSYCHOLOGIQUE : MASQUE LED

# BIG SHAPER

## REFRESH AVEC UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE BIG SHAPER DONNE DES RÉSULTATS CLAIRS

Zones cibles > Zone des bras > Zone abdominale  
> Zone de la cellulite > Zone des fesses > Zone du visage



Big Shaper est un appareil régional d'amincissement de nouvelle génération qui vise à éliminer la cellulite ou l'aspect orange grâce à 4 technologies différentes telles que l'énergie infrarouge, le vide, la radiofréquence et le système de massage mécanique. C'est un choix idéal pour modeler, lisser ou tonifier le corps.

### Principe de fonctionnement

L'énergie infrarouge chauffe la surface de la peau et active le mécanisme d'autorenouvellement de la peau lorsque la chaleur atteint une profondeur de 3 mm. Le massage mécanique et la technologie du vide contribuent à réduire les liens entre les tissus tendus qui forment l'apparence de la cellulite en mobilisant les tissus sous-cutanés. Le processus de massage mécanique augmente l'efficacité de la technologie du vide.

### Contenu technologique

L'énergie infrarouge et la tête à dépression favorisent la production de collagène en chauffant la peau sous-cutanée et aident à l'amincissement en permettant à la couche de graisse de se déplacer grâce à la dépression. Grande tête ; elle aide à resserrer et à amincir en éliminant l'apparence de la cellulite grâce à la dépression et aux rouleaux mécaniques dans la zone abdominale des jambes et des hanches. Petite tête ; elle aide à la récupération et au resserrement grâce à la dépression et aux rouleaux mécaniques dans la zone des bras. Tête du visage ; elle aide à resserrer et à récupérer la peau en éliminant les rides avec un effet anti-âge.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	50 * 122 * 55 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
POIDS	57.5 KG
LANGUES UTILISÉES	10.4" ECRAN TOUCH
COULEUR	TURC, ANGLAIS, ALLEMAND (EN OPTION)
NOMBRE DE TITRES	4
TECHNOLOGIE DE TRAVAIL	RADIOFRÉQUENCE, VIDE, ULTRASONS, LED
SPECTRUM DE LUMIERE	850 NM
RÉGION CONCERNÉE	VISAGE, CORPS

### Avantages pour les entreprises

- Il offre un service de soins corporels combinés sans prendre beaucoup de place sur une plateforme.
- Possibilité de procédure sans douleur.
- Conception ergonomique, têtes légères et écran tactile numérique intelligent offrent une facilité d'utilisation.
- Avec un praticien qualifié, il n'y a presque pas d'effets secondaires.
- Il permet de gagner du temps avec la possibilité d'un traitement efficace dans un court laps de temps.
- Il peut être appliqué chez les femmes et les hommes.

### Avantages pour l'utilisateur final

Possibilité d'application indolore et confortable. Possibilité de poursuivre la vie quotidienne sans interruption après la procédure. Application efficace en toute saison. Élimine le temps passé dans les salles de sport. Procure du repos au corps grâce à l'effet de massage et soulage la fatigue.





## 2-10 CM LORS DE LA PREMIÈRE SÉANCE AVEC LE SON MAGIQUE POSSIBILITÉ D'EXAMEN



Magic Sound est un appareil d'amincissement régional qui vise à intervenir directement sur les graisses régionales tenaces telles que l'abdomen, les hanches, les jambes, les bras, la taille et le dos en utilisant des ondes sonores ultrasoniques, créant un effet de désintégration dans les cellules graisseuses avec des ondes sonores ultrasoniques.

### Principe de fonctionnement

Des ondes sonores ultrasoniques sont envoyées vers le tissu adipeux à l'aide d'un gel conducteur et aident à le décomposer, tout en réduisant les cellules adipeuses décomposées et en amincissant et resserrant le corps, ce qui aide à éliminer l'apparence de la cellulite dans une large mesure.

### Contenu technologique

M1 (LARGE) Tête de 1,1 MHz ; elle permet d'amincir et de réduire la graisse dans les zones non désirées. M2 (SMALL) Tête de 40 KHz ; elle permet de resserrer les zones amincies et affaissées sans endommager le tissu adipeux.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	41 * 124 * 64 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50-60 HZ
POIDS	29 KG
LANGUES UTILISÉES À L'ÉCRAN	10.4" ECRAN TOUCH
SYSTÈME DE TRAVAIL	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
COULEUR	SYSTÈME SONORE À ULTRASONS
NOMBRE DE TITRES	VIOLET FONCÉ (EN OPTION)
FRÉQUENCE DES TITRES	240 KHZ - 1,1 MHZ
TITRES UTILISÉS	40 KHZ HEADER - 1,1 MHZ HEADER

### Avantages pour les entreprises

◦ Grâce à la longueur d'onde utilisée, il n'y a pas de risque d'effets secondaires car les autres tissus ne sont pas endommagés lors de l'application. ◦ Il peut être appliqué chez les hommes et les femmes. ◦ Il affecte positivement les retours en fournissant un résultat satisfaisant visible dès le 15e jour. ◦ Il fournit des résultats permanents lorsqu'il est soutenu par le sport et le régime alimentaire. ◦ Opportunité de gain de temps avec une opportunité d'application courte. ◦ Il offre une facilité d'utilisation grâce à son design ergonomique, sa tête légère et son écran tactile numérique intelligent.

### Avantages pour l'utilisateur final

Possibilité d'une application indolore et confortable. Possibilité de poursuivre la vie quotidienne sans interruption après la procédure. Facilité d'atteindre la forme désirée en peu de temps sans avoir recours à une procédure chirurgicale. 2-10 cm d'amincissement dès la première séance. Fournit une solution permanente lorsqu'elle est soutenue par le sport et le régime alimentaire.



# BIGFIT

## AVEC BIG FIT ADIEU À LA GRAISSE RÉGIONALE



### Qu'est-ce que Big Fit ?

BIG FIT est un appareil non invasif de nouvelle génération développé et produit par Mormed Group et utilisé dans le domaine de l'esthétique. Il cible les points problématiques que les régimes et l'exercice physique ne peuvent atteindre en appliquant des ondes sonores ultrasoniques en mode bas et haut.

### Principe de fonctionnement de Big Fit ;

Le tissu adipeux est décomposé en petites particules qui peuvent être facilement évacuées (excrétées). Il permet à l'opérateur d'obtenir une puissance constante avec un effet thermique réduit (1-3 MHz et 40 kHz) Therapy (ondes de pression à haute fréquence). Grâce aux ondes de pression qui mobilisent les dépôts de graisse en excès, BIG FIT Total Frequency stimule le métabolisme cellulaire en créant une augmentation de la température des tissus.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	41 * 123 * 70 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50-60 HZ
POIDS	29 KG
ÉCRAN	10.4" ECRAN TOUCH
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
SYSTÈME DE TRAVAIL	SYSTÈME SONORE À ULTRASONS
COULEUR	BLANC (EN OPTION)
NOMBRE DE TITRES	4
FRÉQUENCE DES TITRES	:40 KHZ - 1.1 MHZ - 3 MHZ
TECHNOLOGIE DE TRAVAIL	ULTRASOUND
RÉGIONS CONCERNÉES	VISAGE ET CORPS

### Big Fit Care avant et après ;

Pour que vos applications soient plus efficaces, vous devez boire beaucoup d'eau avant et après l'application. Après l'application, un massage lymphatique ou un traitement thermique est recommandé pour maximiser les résultats. Durée de l'application - Les applications sont des séances de 30 minutes. Vous pouvez constater des résultats après une seule séance. Toutefois, il est recommandé d'effectuer une série de 6 à 12 séances.

### Les avantages qui distinguent Big Fit d'autres technologies comparables

Il atteint les cellules adipeuses les plus profondes avec 3 gammes de fréquences différentes (40KHZ, 1MHZ et 3MHZ). Grâce à cette caractéristique, il permet de toucher 100 % de votre clientèle.

### Quels sont les résultats visés par l'application Big Fit ?

Perte de poids harmonieuse Réduction des dépôts de graisse localisés Réduction de la cellulite Oxygénation des tissus



# SHAPE SCULPTURE

POUR DES RÉSULTATS IMPRESSIONNANTS EN  
MATIÈRE D'AMINCISSEMENT RÉGIONAL  
TECHNOLOGIE D'INSPECTION  
RÉGIONALE PRIVILÉGIÉE PAR LES  
CENTRES AGRÉÉS



Shape Sculpture est un appareil d'amincissement régional idéal dont la technologie permet d'amincir en refroidissant et en dysfonctionnant les cellules graisseuses indésirables dans les zones du corps grâce à ses deux têtes spécialement conçues, la grande et la petite. Fondamentalement, il refroidit la graisse dans le corps et assure la perturbation de la nutrition de la graisse.

## Principe de fonctionnement

Il refroidit les cellules graisseuses indésirables qui se forment dans différentes parties du corps et les rend dysfonctionnelles. Les cellules graisseuses qui perdent leur fonction sont décomposées et excrétées par les voies lymphatiques. Ce processus se déroule de manière rapide, saine et contrôlée et permet d'obtenir un amincissement régional.

## Contenu technologique

La grande tête refroidit de manière non invasive les zones les plus grasses (hanches, ventre, fesses, cuisses, mollets) et les rend non fonctionnelles. La petite tête refroidit de manière non invasive les zones les moins grasses (bras, dos, taille) et les rend non fonctionnelles.

## Avantages pour les entreprises

◦ Comme il a pour effet de réduire les cellules graisseuses, il peut fournir un effet visible.◦ Il offre une facilité d'utilisation avec son design ergonomique, sa tête légère et son écran tactile numérique intelligent.◦ Il n'y a presque pas d'effets secondaires avec un applicateur qualifié.◦ Grâce à sa grande et sa petite tête, il offre une facilité d'application en fonction de la zone.◦ Il est préféré avec sa capacité à être appliqué en toutes saisons.◦ Il peut être appliqué chez les femmes et chez les hommes.

## Avantages pour l'utilisateur final

Possibilité de poursuivre la vie quotidienne sans interruption après l'intervention. Confort élevé grâce à une procédure indolore et non douloureuse. Possibilité de réduire les cellules graisseuses et d'atteindre la forme souhaitée en peu de temps sans avoir recours à une intervention chirurgicale. Permet un amincissement de 2 à 10 cm dès la première séance.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	54*120*64 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50-60 HZ
POIDS	59 KG
ÉCRAN	10.4" ECRAN TOUCH
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
SYSTÈME DE TRAVAIL	VIDE - CHAUFFAGE - REFROIDISSEMENT
COULEUR	NOIR (EN OPTION)
TITRES UTILISÉS	GRANDE TÊTE D'ASPIRATION, PETITE TÊTE D'ASPIRATION



# Hobraz

SOLUTION ACTIVE POUR  
L'ÉCLAIRCISSEMENT RÉGIONAL  
LA TECHNOLOGIE DE LA  
RADIOFRÉQUENCE PRÉVIENT  
L'AFFAISSEMENT, AMINCIT  
ET RAFFERMIT LA PEAU



Hobraz est un appareil d'amincissement régional développé par Mormed Group en utilisant la technologie RF dans 3 têtes différentes. L'énergie RF contribue à la production de collagène en agissant sous la peau. De cette manière, le tissu cutané est remodelé et aide à l'amincissement et au resserrement en agissant sur la couche de graisse.

## Principe de fonctionnement

L'énergie RF contribue à augmenter la combustion des graisses et la production de collagène, tout en accélérant la circulation sanguine, en redonnant à la peau l'élasticité qu'elle avait perdue et en la resserrant. Dans les applications de radiofréquence, les molécules d'eau dans les cellules sont activées et atteignent les cellules adipeuses à forte teneur en eau, ce qui contribue à faire fondre le tissu adipeux.

## Contenu technologique

Tête liftante : elle aide à réduire les rides et le relâchement dans la région du cou, du menton, des joues et du front. Tête tripolaire : elle va plus profondément dans la peau et affecte la couche de graisse et aide à l'amincissement. Tête multipolaire : elle contribue au resserrement en aidant à faire fondre les graisses dans le corps et en accélérant la production de collagène.

## Avantages pour les entreprises

Possibilité d'application non invasive, procédure indolore et confortable, retour rapide à la vie quotidienne.  
Large champ d'application avec un seul appareil.  
Conception ergonomique, tête légère et écran tactile numérique intelligent facilitant l'utilisation.  
Minimisation des risques de complications avec un praticien qualifié.

## Avantages pour l'utilisateur final

Possibilité de poursuivre la vie quotidienne sans interruption après l'intervention.  
Confort élevé grâce à une procédure indolore.  
La forme souhaitée est obtenue en peu de temps sans qu'il soit nécessaire de recourir à une intervention chirurgicale.

## L'EFFET DES RF DANS LE LISSAGE DE LA PEAU



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	60 * 112 * 55 CM
VALEURS DE FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE	220 - 240 V / 50-60 HZ
POIDS	38 KG
ÉCRAN	10.4" ECRAN TOUCH
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
NOMBRE DE TITRES	3
TECHNOLOGIE DE TRAVAIL	FRÉQUENCE RADIO
COULEUR	GRIS (EN OPTION)
TITRES UTILISÉS	TÊTE DE LEVAGE, TRI-POLAIRE, MULTITRIPOLAIRE

# Hob

## plus

### LAISSEZ HOBRAZ PLUS MODELER VOTRE CORPS



Hobraz Plus, une combinaison unique de technologies d'énergie RF et de système d'aspiration, est un appareil d'amincissement régional de nouvelle génération qui vise à réduire la graisse interne et à lisser la peau.

#### Principe de fonctionnement

L'énergie RF vise à réduire les graisses internes et à accélérer la circulation sanguine grâce à la technologie du système d'aspiration. Elle réduit ainsi la cellulite et l'aspect orange, lisse la peau et l'aide à retrouver l'élasticité perdue.

#### Contenu technologique

Hobraz Plus est une technologie développée en combinant l'énergie RF et le système de vide, visant à fournir le plus haut niveau d'efficacité du processus.

#### Avantages pour les entreprises

- Possibilité d'application non invasive.
- Offre une procédure indolore et confortable.
- La personne retourne rapidement à sa vie quotidienne.
- Large zone d'application avec un seul appareil.
- Conception ergonomique,
- Il offre une facilité d'utilisation avec sa tête légère et son écran tactile numérique intelligent.
- La possibilité de complications est minimisée avec un praticien qualifié.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	53 * 108 * 60 CM
VALEURS DE FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE	220 - 240 V / 50-60 HZ
POIDS	40 KG
ÉCRAN	10.4" ECRAN TOUCH
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
NOMBRE DE TITRES	3
TECHNOLOGIE DE TRAVAIL	RADIOFRÉQUENCE ET VIDE
COULEUR	OR (EN OPTION)
TITRES UTILISÉS	PETIT, MOYEN, GRAND EN-TÊTE

#### Avantages pour l'utilisateur final

Possibilité de poursuivre la vie quotidienne sans interruption après l'intervention.

Confort élevé grâce à une procédure indolore.

Possibilité d'atteindre la forme souhaitée en peu de temps sans avoir recours à une procédure chirurgicale.

Elle peut permettre une révision de 2 à 10 cm dès la première séance.

La durée des séances est courte et la procédure rapide.



# MORENO

## NOUVELLE TECHNOLOGIE D'ÉCLAIRCISSEMENT RÉGIONAL



### Qu'est-ce que Moreno ?

MORENO est un appareil utilisé dans les applications esthétiques qui s'adresse à une nouvelle génération de zones étendues (visage et corps) sans invasivité, produit par Mormed Group en utilisant l'énergie de la radiofréquence (RF) dans les modes capacitif (CET) et résistif (RET) 2 et le système VACUUM.

### Soins profonds avec Moreno

La radiofréquence (CET, RET) est beaucoup plus efficace dans les tissus profonds que les autres systèmes de radiofréquence multipolaires, car elle traverse le corps en toute sécurité. En outre, sa fréquence spécifique renforce la biostimulation et respecte pleinement la physiologie cellulaire naturelle. Par conséquent, les résultats ne sont pas seulement visibles en surface, mais aussi en profondeur, avec des effets durables.

### Traitement en profondeur avec Moreno

Il augmente progressivement et de manière homogène la température dans des zones sélectionnées du corps sans perturber la physiologie des cellules, ce qui permet une application confortable et non invasive.

### Intervalle entre les séances d'application des soins profonds de Moreno

Tout d'abord, il est recommandé d'adopter de bonnes habitudes alimentaires, de boire suffisamment et de pratiquer une activité physique légère pour obtenir des résultats optimaux. Un traitement du visage et du cou dure généralement 45 minutes, tandis qu'un traitement du décolleté dure environ 30 minutes, et un traitement du corps dure de 45 à 59 minutes en fonction de la zone et de l'individu. Des intervalles de 5-6 ou 8-10 séances peuvent être nécessaires en fonction des indications et des zones d'application. Le nombre de séances est ajusté en fonction des besoins du client.

### Utilisations dans l'esthétique Moreno

- 1- Anti-âge
- 2- Atténue les rides et les lignes d'expression.
- 3- Améliore l'aspect du contour des yeux.
- 4- Atténue les poches sous les yeux.
- 5- Améliore l'aspect du double menton.
- 6- Remodèle et raffermi les contours du visage.
- 7- Cou et décolleté
- 8- Rajeunissement du corps, récupération, réduction de la cellulite.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	50 * 120 * 85 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50-60 HZ
POIDS	44 KG
ÉCRAN	10.4" ECRAN TOUCH
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
SYSTÈME DE TRAVAIL	RADIOFRÉQUENCE (CET, RET)
COULEUR	BLANC (EN OPTION)
NOMBRE DE TITRES	4

### Les étapes du résultat de l'entretien en profondeur de Moreno

Les résultats des traitements MORENO pour le visage commencent à se faire sentir dès la première séance et deviennent perceptibles après la troisième ou quatrième application. Les traitements pour le corps peuvent prendre plus de temps pour montrer une amélioration en fonction de l'IMC (les zones où des produits de comblement sont injectés ne sont pas traitées). De bonnes habitudes alimentaires, un apport hydrique suffisant et une activité physique légère sont bénéfiques pour obtenir des résultats optimaux.

### Soins profonds de Moreno

La radiofréquence est appliquée selon deux modes de fonctionnement : Le mode capacitif se concentre principalement sur les tissus mous superficiels et convient aux tissus superficiels et vascularisés. Le mode résistance est plus adapté aux tissus épais, gras et zbotiques.

### Y a-t-il des restrictions concernant les soins profonds de Moreno ?

Après l'application, vous pouvez poursuivre vos activités sociales sans devoir prendre de mesures particulières après l'application.

### Par Moreno ;

L'énergie de la radiofréquence étant inoffensive pour le corps humain et les tissus biologiques, elle n'a pas d'effets secondaires. Toutefois, dans certains cas, des rougeurs et des picotements peuvent être observés sur les peaux très sensibles.

### Le principe de fonctionnement du dispositif Moreno nouvelle génération ;

Le traitement du visage et du corps utilise des impulsions électriques et de la chaleur pour stimuler la production de collagène. Les couches profondes de la peau sont pénétrées par la chaleur, qui peut être ressentie comme une sensation de chaleur profonde, tandis que la couche externe de la peau est renforcée pendant le traitement pour éviter tout dommage. Nouveau collagène Les radiofréquences sont utilisées dans tout le corps pour briser les poches de graisse sous-cutanées tenaces, qui sont ensuite progressivement éliminées par le système métabolique naturel du corps. Notre traitement MORENO est appliqué à la fois au visage et au corps pour resserrer la peau en stimulant la formation de nouveau collagène. En délivrant une chaleur contrôlée directement sur le tissu qui provoque la contraction du collagène et la formation de nouveau collagène, il aide à réduire les rides et ridules, à renforcer la peau et à lui donner un aspect plus ferme, plus tendu et plus sain. Ainsi, avec ce seul traitement, votre peau reçoit trois avantages importants grâce à la combinaison de différentes énergies et températures : Biostimulation (activation du métabolisme, du collagène et des fibroblastes) + Microcirculation (augmentation du métabolisme, du flux sanguin et du drainage) + hyperactivation (désintoxication des tissus, élimination des graisses et régénération du collagène). Traitement pour éliminer le relâchement Le traitement peut être appliqué aux hommes et aux femmes, tant sur le visage que sur le corps, en fonction de votre objectif : rajeunir le visage, lisser les rides, revitaliser la peau, réduire la cellulite, raffermir la poitrine, etc. Il permet également d'éliminer le relâchement des bras et même d'atténuer les cernes et les poches des yeux. L'appareil fonctionne avec une crème conductrice.





**NON-INVASIF**  
**ESTHÉTIQUE DES SEINS ET DES FESSES**  
**6 TÊTES DIFFÉRENTES POUR UNE**  
**APPLICATION PRATIQUE ET CONFORTABLE**



Royal Lift est un appareil de soin de la peau de nouvelle génération développé par le groupe Mormed, qui vise à résoudre des problèmes tels que le relâchement et la perte d'élasticité. Il permet une application indolore et non invasive au niveau de la poitrine et des fesses, et comprend les technologies Vacuum, Led therapy et Electro therapy (Ems).

**Principe de fonctionnement**

Royal Lift : En assurant une absorption efficace dans le sein grâce à la méthode d'application sous vide, il dilate les vaisseaux sanguins et accélère la circulation sanguine. De cette manière, il augmente le taux de sécrétion de l'hormone mammaire et aide à donner de l'ampleur et de l'élasticité aux seins. En cas de problèmes d'affaissement et de relâchement, il renforce les muscles de la poitrine grâce au système d'électrothérapie (Ems), aide à resserrer et à repulper la peau en empêchant la formation de tissu adipeux grâce à l'Ems. Il donne une apparence plus fraîche et plus pulpeuse et détend grâce à la Led Therapy.

En outre, pour les petits seins, il donne une forme plus proéminente grâce à la technique de la force de traction 3D en appliquant une pression négative.

**Contenu technologique**

Royal lift est une technologie de soin de la peau qui vise à lifter, repulper, resserrer et agrandir en utilisant les puissantes technologies de l'aspiration, de la thérapie par leds et de l'électrothérapie avec les têtes et les différentes options de réglage.

Système de lifting : Il aide à éliminer les déformations telles que l'affaissement, le relâchement et la mollesse excessive des seins. La technologie du vide tire et étire lentement et efficacement le tissu mammaire, de sorte que les cellules étirées ajoutent de l'élasticité et de la vitalité au tissu mammaire.

Système repulpant et raffermissant : Avec le temps, le vieillissement, les prises et pertes de poids fréquentes, les accouchements, l'allaitement, l'utilisation incorrecte des soutiens-gorge, etc. Il donne une apparence fraîche et rebondie en resserrant les seins qui ont perdu leur aspect d'origine pour de nombreuses raisons, notamment.

Système d'augmentation : Grâce à la technique du vide scientifiquement prouvée pour les seins sous-développés, petits et plats, il augmente et clarifie le volume des seins avec des résultats rapides et efficaces.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

DIMENSIONS	46*38*68 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50-60 HZ
POIDS	24 KG
ÉCRAN	10.4" ECRAN TOUCH
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
SYSTÈME DE TRAVAIL	ASPIRATION - COURANTS ÉLECTRIQUES
COULEUR	NOIR (OPTION)
NOMBRE DE TITRES	6
TITRES UTILISÉS	TÊTE DE LIT ROYAL LIFT

**Avantages pour les entreprises**

- Des résultats fructueux et une grande satisfaction des clients grâce à un système d'aspiration efficace et puissant.
  - Vous pouvez obtenir une conversion élevée de la clientèle en cas de mécontentement lié à la poitrine, ce qui est sensible et important pour les femmes.
  - Traitement plus précis grâce au réglage progressif de la puissance d'aspiration.
  - Adapté à toutes les structures mammaires grâce à six têtes d'aspiration de tailles différentes.
  - Il offre la possibilité de traiter sans tissu cicatriciel, sans vergetures et sans déformation du sein.
  - Séances plus efficaces grâce à l'effet accru des coussins de levage Mio.
- Avantage d'une conception ergonomique et portable.
- Haute efficacité à faible coût.
  - Vous pouvez faire la différence avec vos concurrents en ajoutant cette technologie supérieure à votre portefeuille, qui n'est pas disponible dans toutes les entreprises.

**Avantages pour l'utilisateur final**

Il contribue à la qualité de vie en éliminant le mécontentement lié à la poitrine. Il est efficace pour soulever et remonter les fesses.

Il permet de gagner du temps grâce à sa rapidité d'application et à l'efficacité de ses résultats.

Application confortable et indolore.

Possibilité de continuer à vivre au quotidien après l'intervention.

Gain de confiance en soi grâce à l'aspect esthétique qu'il procure.

Effet visible dès la première séance.



# BIG MAG

NOUVEAU CONCEPT DE COMBUSTION DES  
GRAISSES ET D'AMINCISSEMENT  
AUGMENTATION DE LA MASSE MUSCULAIRE  
REMODELAGE NON INVASIF DU CORPS  
RÉDUCTION DE LA GRAISSE AUTOUR DE L'ABDO  
CONVIENT AUX HOMMES ET AUX FEMMES  
RÉSULTATS DURABLES



## HI-EMT/HIFEM

HI-EMT / HIFEM (High Intensity Focused Electromagnetic, énergie électromagnétique focalisée de haute intensité). Un autre nom est la stimulation musculaire magnétique.

## HI HIFEM

Le seul moyen de renforcer les groupes de muscles centraux est l'exercice physique. La technologie HIFEM peut induire près de 50 000 impulsions en une seule séance de 30 minutes. Cela représente plus de 10 000 redressements assis ! Ces impulsions stimulent les nerfs et entraînent des contractions musculaires supramaximales (contraction musculaire à 100 %), ce que l'exercice physique ne permet pas d'obtenir. Les muscles sont obligés de s'adapter à l'épaississement musculaire qui en résulte. Les muscles deviennent plus forts, plus résistants et augmentent de volume.

## Qu'est-ce qu'un Big Mag ?

Il s'agit d'un appareil de remodelage du corps et de renforcement musculaire de nouvelle génération développé et produit par MORMED GROUP à l'aide de la technologie HI-EMT / HIFEM. La technologie Big Mag est une nouvelle application de remodelage du corps non invasive qui cible uniquement les muscles par opposition à la graisse. En moyenne, la graisse représente 25 % du poids total du corps. Cependant, les muscles représentent une part encore plus importante du corps humain, soit 42 % chez les hommes et 36 % chez les femmes. Cette technologie imite le potentiel d'action des nerfs qui provoquent des contractions musculaires d'une rigueur et d'une intensité que vous ne pouvez pas réaliser physiquement par le biais d'un exercice volontaire.

## Neden HI-EMT

1-La profondeur de pénétration est de 8 cm, ce qui couvre l'ensemble du réseau nerveux et permet la contraction de l'ensemble de la couche musculaire.

2- L'apoptose des graisses et l'effet du GG : L'exercice musculaire qu'il réalise ne peut jamais être atteint par l'exercice physique.

3-Les études américaines ont montré que l'effet qu'il procure est le meilleur.

4-L'expérience et les résultats du traitement sont bons.

BIG MAG Avantages ;

1- Brûlage des graisses simultanément à la croissance et au renforcement des muscles. 2- Application non invasive.

3- Pas de sensation de douleur

4- Il n'y a pas de processus de lyophilisation

5- Pas de coûts de consommables

6- Peut être appliqué sur différentes parties du corps (abdomen, fesses, jambes, bras, épaules, dos)

7- Gain de temps avec une séance courte de 30 minutes

8- Procédé ne nécessitant pas de force physique

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	125 * 43 * 76 CM
FOINCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50-60 HZ
POIDS	48 KG
ÉCRAN	10.4" ÉCRAN TOUCH
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS, ALLEMAND (EN OPTION)
COULEUR	BLANC (EN OPTION)
NOMBRE DE TITRES	2
DENSITÉ DE SORTIE	0-7 TESLA
TECHNOLOGIE DE TRAVAIL	HI-EMT / HIFEM

## Curieux ; GRANDS RÉSULTATS DU MAG

Tant qu'une bonne alimentation est maintenue et que le poids reste constant, les effets visuels du traitement HI-EMT / HIFEM sont bien maintenus. Des études menées sur des patients traités par HIFEM ont montré que les muscles conservent leur taille et leur force accrues, même après un an. Contrairement à l'EMS, dont les effets sont temporaires.

## Cibler les muscles avec BIG MAG

Muscles abdominaux

Muscles fessiers

Muscles des cuisses et des épaules


Conclusion : HIEMT/HIFEM est très efficace pour renforcer les muscles centraux. Des études ont également montré une augmentation de la croissance des muscles abdominaux chez les clients après un traitement complet. Les niveaux de satisfaction générale sont très élevés pour le traitement de tous les groupes musculaires, en particulier dans la région des hanches. La procédure BIGMAG n'entraîne aucune restriction et les patients peuvent poursuivre leurs activités quotidiennes normales.

## Avec BIGMAG

Les recherches sur l'entraînement musculaire à haute intensité ont montré qu'une réaction de destruction de la graisse (lipolytique) se produit dans la graisse située à côté du muscle contracté. Il a été constaté que le traitement HIFEM affecte simultanément la graisse sous-cutanée et les muscles, augmentant le métabolisme des graisses de la même manière. Les scanners effectués sur des clients après un traitement HIFEM ont révélé une réduction de la graisse et une augmentation de la taille des muscles. Ces changements dans la réduction de la graisse sont durables tant que le client maintient son poids grâce à un bon régime alimentaire et à un exercice physique régulier. Des études ont montré une réduction de la graisse et une augmentation des muscles autour de l'abdomen.



NEIGE

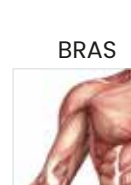

BRAS



HIP




LEG

## Processus iMAG

HI-EMT/HIFEM convient aux hommes et aux femmes. Il est excellent pour le renforcement musculaire et la réduction des graisses chez les personnes dont l'indice de masse corporelle se situe entre 19 et 30. Des études ont montré que le niveau de satisfaction est plus élevé chez les clients ayant un indice de masse corporelle plus élevé, bien que les effets soient plus visibles chez les clients plus minces. Une seule séance de BIGMEG entraîne 50 000 inductions d'impulsions, ce qui se traduit par 50 000 contractions musculaires "supramaximales". Les contractions musculaires "supramaximales" sont des contractions de l'ensemble du muscle, et non de 20 à 30 % comme lors d'une séance d'exercice physique. Il en résulte une hypertrophie (augmentation de la taille des fibres musculaires individuelles) et une hyperplasie (augmentation du nombre de fibres musculaires dans leur ensemble). Des études ont montré une augmentation de la masse musculaire après 4 séances. Cette augmentation est observée au niveau des muscles abdominaux, notamment le grand droit de l'abdomen et les obliques latéraux. Ce phénomène est connu sous le nom de diastasis des grands droits et est très fréquent après une grossesse. Il est extrêmement difficile de réduire cet écart par l'exercice physique. Grâce à la réduction de la graisse associée, une amélioration générale du tour de taille est également obtenue. Des gains similaires sont observés au niveau des muscles fessiers des hanches, des épaules et des bras, ainsi qu'au niveau des quadriceps et des ischio-jambiers.

# ESTCULTOR

SANS FATIGUE  
AVEC EFFET SPORTIF INTENSE  
RAFFERMIR

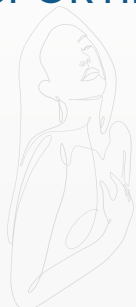

## Description de l'appareil

ESTCULTOR est un appareil d'électrothérapie (ems) développé par Mormed Group, où le plus haut niveau d'efficacité est visé grâce à l'harmonie parfaite des énergies de micro-courant et de courant galvanique.

## Principe de fonctionnement,

Les énergies du micro-courant et du courant galvanique ESTCULTOR sont utilisées avec 5 appareils de tête différents. Il est plus efficace en cas de problèmes régionaux de poids et d'élasticité. Il permet l'élimination de la cellulite, le renouvellement et la réparation des tissus conjonctifs (peptides) des fibres affaiblies. Il accélère la production de collagène et d'élastine grâce à l'augmentation des peptides. Il renouvelle la structure de la peau en augmentant la circulation sanguine et en accélérant le métabolisme cellulaire grâce à la pression exercée pendant la procédure.

Ainsi, la cicatrisation et l'activation au sein de la cellule régulent la détérioration de l'aspect peau d'orange, effet de la cellulite, et les déformations sont visiblement réduites, les tissus de la zone cellulitique retrouvant une texture de peau normale.

## Domaines d'application Rajeunissement du visage

L'application d'ESTCULTOR pour le renouvellement du visage a des effets visibles sur la récupération du visage, l'augmentation de l'élasticité et la revitalisation de la structure de la peau. Elle permet à la peau de gagner en élasticité et de se rétablir dans une proportion de 10 à 15 %. L'intervalle recommandé entre les séances est de 2 séances par semaine pour un total de 8 semaines. Bien que l'effet de la procédure soit ressenti dès la première séance, des effets visibles sont observés après 6 et 8 semaines. Cou et bajoues

Avec la diminution de la quantité de collagène et d'élastine due aux signes de vieillissement, le tissu adipeux sous la peau diminue et provoque l'affaissement du tissu. ESTCULTOR aide à éliminer ces problèmes en créant un effet sportif intense sur les muscles.

## Récupération et muscles abdominaux

ESTCULTOR renforce les muscles abdominaux et augmente leur élasticité. L'intervalle entre les séances est de 2 séances par semaine, soit 6 séances au total.

## Récupération et resserrement de la zone dorsale

Les énergies des micro-courants et des courants galvaniques d'ESTCULTOR et les nerfs du muscle sont contractés en même temps et le processus de récupération du dos se met en place. Un effet sportif intense se produit dans le corps. La pression exercée pendant la procédure accélère la circulation sanguine. Une révision entre 2 et 12 cm est observée. L'intervalle recommandé entre les séances est de 2 fois par semaine pour un total de 8 semaines.

## Lifting des fesses et lifting

Avec ESTCULTOR, des énergies de micro-courant et de courant galvanique sont appliquées à la zone souhaitée à différentes longueurs d'onde, ce qui provoque la contraction des muscles, créant un effet sportif intense. La circulation sanguine est augmentée par la pression exercée pendant la procédure et les fesses sont modelées. L'intervalle recommandé entre les séances est de 2 fois par semaine pour un total de 8 semaines.

## Raffermissment et récupération des jambes, des mollets et de l'intérieur des cuisses

Avec ESTCULTOR, des énergies de micro-courant et de courant galvanique sont administrées à différentes longueurs d'onde et les muscles sont contractés, créant ainsi un effet sportif intense. La pression exercée pendant le processus augmente la circulation sanguine, stimule la synthèse de l'ATP dans le corps et produit du nouveau collagène. En outre, grâce à l'énergie générée au cours de ce processus, les muscles utilisent le glycogène et les graisses de leurs propres tissus. Ainsi, le tissu adipeux régional est réduit et la compression est assurée. L'intervalle recommandé entre les séances est de 2 fois par semaine pour un total de 8 semaines.

## Cellulite et aspect peau d'orange

ESTCULTOR stimule l'élimination de la cellulite, la régénération et la réparation des fibres fatiguées et du tissu conjonctif (fibroblastes). Il accélère la production de collagène et la synthèse de l'élastine. ESTCULTOR aide les tissus de la zone cellulitique à se restructurer normalement et à lisser la zone. Grâce à la pression exercée pendant la procédure, la circulation sanguine est accélérée, le métabolisme cellulaire est stimulé et accéléré et la structure de la peau est renouvelée.

## Avantages pour les entreprises

- Possibilité d'une large zone d'application.
- Pas de coûts de consommables.
- Taux de satisfaction élevé
- Il s'adresse à l'ensemble de la clientèle.
- Application confortable pour les clients.

## Avantages pour l'utilisateur final


Il est indolore et non douloureux. Les résultats sont visibles et la peau se renouvelle en même temps qu'elle est revue et raffermie. Sans se fatiguer, vos muscles travaillent avec un effet sportif intense. Elle soutient également votre santé.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INTRODUCTION	AC110V-220V 50-60 HZ
PUISSANCE	350W
FRÉQUENCE DE SORTIE	1hz-200hz
ÉNERGIE	1-100
LANGUES UTILISÉES	TURC, ANGLAIS (EN OPTION)
MODÈLE DE TRAVAIL	7 MODÈLES DIFFÉRENTS
COULEUR	BLANC (EN OPTION)

# BINDEX

## AVEC RAPPORT D'ANALYSE CORPORELLE ACCÈS PRATIQUE AU TRAITEMENT ADÉQUAT ANALYSEUR DU CORPS

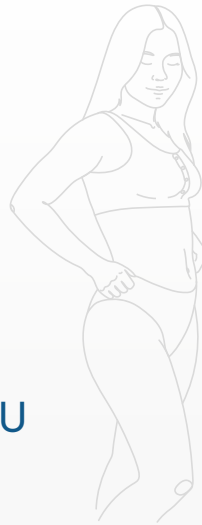

Bindex est un analyseur corporel doté de fonctions d'analyse de la composition corporelle qui teste l'impédance et la composition des éléments dans toutes les parties du corps humain, fournissant des données scientifiques sur le contrôle du poids, l'alimentation, la perte de poids, le développement musculaire et l'équilibre nutritionnel.

### Principe de fonctionnement

Il applique le principe du test d'impédance bioélectrique à haute fréquence avec le système de 8 points touchant la méthode de l'électrode, ce qui permet de préparer un protocole de traitement précis et personnalisé en mesurant le poids, les protéines, les graisses, l'eau, le rapport taille-hanche, etc.

### Contenu technologique

- RTH (rapport taille-hanche)
- Analyse de la graisse corporelle
- Poids des os
- Diagnostic de l'obésité
- Métabolisme de base
- Indicateur de poids maigre
- Évaluation de la nutrition
- Évaluation du poids
- TVS (pourcentage de fluides corporels)
- PBF (pourcentage de graisse corporelle)
- Sel minéral
- Analyse musculaire
- Impédance bioélectrique
- Indice de masse corporelle
- Calcul du poids cible
- Analyse des protéines

### Avantages pour les entreprises

- Le rapport d'analyse corporelle permet des traitements corrects.
- Recommandation de traitement idéal pour les valeurs personnalisées.
- Augmentation de l'efficacité du traitement appliqué grâce à l'analyse des valeurs corporelles.
- Avantage de travailler selon les besoins du corps en déterminant le traitement approprié pour la procédure.
- Avantages pour l'utilisateur final
- Obtention d'informations précises sur le corps.
- Motivation par rapport à l'effet du traitement.
- Perte de poids correcte.
- Un sentiment de confiance dans la précision du traitement à effectuer à la suite de l'analyse.

**Un diagnostic correct permet de poser le bon diagnostic et un diagnostic correct permet d'administrer le bon traitement.**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	118 * 50 * 49 CM
FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE VALEURS	220 - 240 V / 50-60 HZ
POIDS	28 KG
GAMME D'ESSAI	10-200 KG
SYSTÈME DE TRAVAIL	ANALYSE DU CORPS
COULEUR	BLANC
RUBRIQUES UTILISÉES	TÊTE D'ÉLECTRODE - APPAREIL À MAIN
TECHNOLOGIE DU TRAVAIL	IMPÉDANCE BIOÉLECTRIQUE HAUTE FRÉQUENCE



ANALYSES DE LA  
VALEUR CORPORELLE



RECOMMANDATION  
DE TRAITEMENT IDÉAL  
BASÉE SUR LES  
VALEURS



LA DÉTERMINATION  
DU TRAITEMENT  
APPROPRIÉ AVANT  
L'INTERVENTION

## 25 RÉSULTATS DE TESTS DIFFÉRENTS



Écran de  
fonctionnement

Rapport d'analyse  
corporelle



## ÉLECTROSTIMULATION GYMNASTIQUE PASSIVE



La gymnastique passive est une technologie basée sur la méthode d'exercice passif qui vise à éliminer les graisses et à raffermir les muscles qui ne peuvent pas travailler dans le corps à l'aide d'électricité à basse tension et à l'aide de coussins, ce qui leur permet de bouger grâce à des ondes radio. Comme la gymnastique passive donne à l'organisme l'impression de faire de l'exercice et de dépenser de l'énergie, la combustion des calories se produit en raison du surmenage du métabolisme. En même temps, les ondes radio envoyées au corps stimulent les tissus adipeux et favorisent l'élimination des graisses du corps.

### Principe de fonctionnement

Il est relié à la zone problématique à l'aide de coussinets et l'électricité basse tension est fournie et les muscles sont activés. Grâce à la présence de plusieurs coussins, il peut s'appliquer à plusieurs parties du corps en même temps et faire travailler les muscles de différentes zones simultanément. Grâce aux différentes options de niveau, le réglage le plus approprié peut être appliqué en fonction de la personne.

### Contenu technologique

Il dispose de 8 sorties et de 16 pads. Il peut être utilisé manuellement ou programmé automatiquement. Il est facile à utiliser et offre une excellente conformité à la clientèle.

### Avantages pour l'utilisateur final

Il offre l'effet d'un exercice intense en une seule séance et améliore la circulation générale chez les personnes qui ne font pas d'exercice.

### Avantages pour les entreprises

Une application indolore, sans douleur et confortable. ◦ Vous pouvez atteindre des masses de clients beaucoup plus importantes grâce à la variété des services que vous offrez. ◦ Applications plus précises grâce au réglage du niveau de traitement. ◦ Facilité d'utilisation et possibilité d'installation pratique. ◦ Utilisation fonctionnelle dans les extrémités supérieures et inférieures. ◦ Il aide à dépenser de l'énergie personnalisée avec 4 modes différents et des longueurs d'onde électriques. ◦ Il permet de lutter contre la cellulite et l'amincissement régional grâce aux ultrasons et à la radiofréquence.

## G5 MACHINE BEAUTÉ AVEC MASSAGE



La machine G5 est un appareil de massage vibrant professionnel utilisé pour raffermir et éliminer la cellulite grâce à son système vibrant.

### Principe de fonctionnement

La massothérapie assistée mécaniquement consiste à appliquer un massage par vibration. Elle stimule le système musculaire et nerveux et renforce en même temps la circulation sanguine et le système lymphatique. Elle assouplit les graisses, embellit les tissus cellulitiques, détend les muscles et aide à la récupération.

### Contenu technologique

G5 est une technologie de massage qui peut être appliquée avec différents titres pour toutes les parties du corps et contient un système de vibration efficace et puissant.

### Avantages pour les entreprises

Possibilité de combiner avec un autre appareil professionnel à ultra-sons et à radiofréquences pour obtenir un effet encore plus important. Applications plus précises grâce à un niveau d'intensité réglable. Utilisation plus fonctionnelle avec des parties de formes différentes telles que le ventre, l'épaule, le bras et la jambe.

Vous pouvez élargir votre portefeuille de services grâce à sa fonction de soutien à la thérapie physique. Vous pouvez atteindre un plus grand nombre de clients grâce à la variété des services que vous offrez.

### Avantages pour l'utilisateur final

Il aide à assouplir les graisses pour modeler le corps. Il aide à séparer les particules de graisse et à éliminer la texture du miel. Il aide à soulager efficacement la tension musculaire et la fatigue pour vous détendre. Il contribue à soulager les douleurs musculaires en éliminant la toxine et la fatigue. Il aide à prévenir la fatigue musculaire et les raideurs et contribue également à augmenter la mobilité des articulations. Aide à réduire le manque d'exercices musculaires pour réduire l'œdème articulaire. Aide à réduire la cellulite en favorisant la circulation sanguine.

## MACHINE DE PRESSOTHÉRAPIE LE DRAINAGE LYMPHATIQUE Système de massage par pression



Le drainage lymphatique est une technologie qui vise à améliorer la qualité de la peau, l'amincissement circonferentiel, le raffermissement cutané et sous-cutané par un massage de pression sur le corps. La circulation lymphatique et veineuse dans le corps est accélérée par la pression et aide à drainer le liquide accumulé entre les veines. C'est une méthode utilisée dans l'élimination des œdèmes et de la cellulite causés par diverses maladies et qui augmente également l'efficacité des programmes d'amincissement régional et de raffermissement du corps.

### Principe de fonctionnement

La personne est vêtue d'un équipement de drainage lymphatique et les pieds, les jambes et l'abdomen sont enveloppés, puis l'appareil de drainage lymphatique est mis en marche. L'appareil permet de drainer la lymphe en exerçant une pression du bout des doigts vers le haut à intervalles réguliers.

### Contenu technologique

L'appareil, qui permet d'effectuer des massages par pression sur le corps, dispose de 10 programmes différents. Dans chaque programme, la force de pression comprise entre 30 et 120 mm/Hg est programmée en fonction du patient.

### Avantages pour l'utilisateur final

Il aide à réduire la sensation d'œdème, de lourdeur et de douleur, en particulier dans les jambes. Favorise la perte de poids, la décomposition et la réduction des graisses. Aide à améliorer le métabolisme en favorisant la circulation sanguine. Favorise l'élimination des kilos et de la cellulite. Contribue à la régulation du flux lymphatique. Il aide à récupérer les tissus musculaires relâchés et l'affaissement du corps.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VALEURS DE FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
SYSTÈME DE TRAVAIL	APPLICATION DE MASSAGE
COULEUR	BLANC (EN OPTION)
CARACTÉRISTIQUES DE LA TÊTE DE LIT	8 PRISES, 16 COUSSINS
ZONES UTILISABLES	TAILLE, ABDOMEN, HANCHES
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	SOULÈVEMENT DE LA POITRINE

VALEURS DE FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT	MASSAGE PAR VIBRATION
COULEUR	BLANC (EN OPTION)
RUBRIQUES UTILISÉES	TITRE DU MASSAGE
TECHNOLOGIE DE TRAVAIL	MASSAGE VIBRATOIRE ASSISTÉ
RÉGIONS CONCERNÉES	MÉCANIQUEMENT
	VENTRE, ÉPAULE, BRAS, JAMBE

VALEURS DE FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT	THÉRAPIE PAR LE MASSAGE
COULEUR	NOIR
ÉCRAN	LCD
SONORISATION	TRAVAIL SILENCIEUX

# NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## CONTACTEZ-NOUS

**Web** [www.mormedgroup.com](http://www.mormedgroup.com)  
**E-mail** [info@mormedgroup.com](mailto:info@mormedgroup.com)  
**Tel** +90 850 767 0 999

**Branche** Çınardere Mah. Oba Sk. No2/2-3-4-5  
Posta Kodu: 34896 Pendik/ İstanbul

**Centre** Horuzluhan Mah. Kahraman Sk. No 10  
Posta Kodu: 42120 Selçuklu/ Konya

    /mormedgroup

**Showroom** Korkutreis Mah. Sezenler Cad. No: 4/4  
Posta Kodu: 06430 Çankaya/Ankara

    /+90 850 767 0 999